



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA VETERINARIA - MEDIA
DIGITAL VET SCALE - MEDIUM
BALANCE VÉTÉRINAIRE DIGITALE - MOYENNE
BÁSCULA VETERINARIA - MEDIA
ESCALA VETERINÁRIA - MÉDIA
VETERINÄRSKALA – DURCHSCHNITT
ΒΕΤΕΡΙΝΑΡΕΗ ΚΑΙΤΑΡ - СРЕДЕН
VETERINÁRNÍ MĚŘÍTKO - PRŮMĚR
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ELÄINLÄÄKINVÄLINEN ASAKA - KESKIMÄÄRIN
ÁLLATORVOSI MÉRLEG - ÁTLAGOS
SKALA WETERYNARYJNA - ŚREDNIA
SCALA VETERINARĂ – MEDIE
VETERINÁRNA STUPEŇ - PRIEMER

REF 6680 (Gima 27258) - 6681 (Gima 27259)

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/ Hersteller/ производител/
Výrobce/ Κατασκευαστής/ Valmistaja/ Gyártó/ Producent/ Producător

Výrobca:

Momert Zrt.

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14

Made in Hungary


Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distruido por/ Vertrieben von/ Разпространява се от/
Distribuoány/Διανέμονται από/ Jakelija/Forgalmazza/ Dystrybuowane przez/ Distribuit de/ Distribuovaný

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

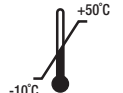



Διαβάστε ολόκληρο το Εγχειρίδιο Λειτουργίας προσεκτικά προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Αποθηκεύετε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε άτομο χρησιμοποιεί το προϊόν είναι εξοικειωμένο με τις παρούσες οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τη σωστή πολικότητα της μπαταρίας κατά την τοποθέτηση και αντικατάστασή της.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία.
- Μην αφήνετε τη συσκευή δίχως επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό που αναφέρεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας.
- Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο επάνω σε σταθερή οριζόντια επιφάνεια.
- Πριν από τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση του καλύμματος, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αφαιρέστε τη μπαταρία!
- Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο για καθαρισμό ή χημικά επιθετικές ουσίες για τον καθαρισμό της μονάδας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω, έχει υποστεί ζημιά ή έχει εκτεθεί σε τυχόν υγρά. Ο έλεγχος και η επισκευή της μονάδας πρέπει να γίνεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για οικιακή χρήση. Δεν έχει σχεδιαστεί για εμπορική χρήση.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, π.χ. καλοριφέρ, φούρνος, κτλ. Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρασία.
- Μην πιάνετε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια.
- Το προϊόν είναι μια εύθραυστη συσκευή μέτρησης. Προστατεύετε τη συσκευή από χτυπήματα και από πτώση.
- Μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύστημα μέτρησης ακριβείας
- Αυτόματος μηδενισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Ένδειξη χαμηλής ισχύος
- Ένδειξη υπερβολικού φορτίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση: 1 μπαταρία λιθίου CR2032, 3V (περιλαμβάνεται)
Μέγ. μετρούμενο βάρος: 3-100 kg
Προσαυξήσεις ζύγισης: 100g
Μέγεθος οθόνης: διάμετρος LCD = 8,0 εκ., 3,15 ίντσες
Πλατόφορμα: 6680 (GIMA 27258): 635x355 mm, 6681 (GIMA 27259): 830x620 mm
Μονάδες ζύγισης: kg, lb, st
Θερμοκρασία Λειτουργίας/Αποθήκευσης: 10-40°C/-10-50°C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προτού χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για πρώτη φορά, αφαιρέστε τη μονωτική γλωττίδα από τη μπαταρία στο πίσω μέρος της ζυγαριάς. Τοποθετήστε τη ζυγαριά επάνω σε μια επίπεδη, σκληρή επιφάνεια. Σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι μαλακή (π.χ.: επάνω σε χαλί), η τιμή που θα δείξει η ζυγαριά ενδέχεται να είναι ανακριβής. Για να ενεργοποιηθεί η ζυγαριά, πατήστε στο κέντρο της πλατόφορμας με το πόδι σας. Την πρώτη φορά η οθόνη δείχνει ένα κινούμενο "8" και έπειτα εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "0,0". Περιμένετε έως εμφανιστεί η ένδειξη "0,0"! Τοποθετήστε το κατοικίδιο επάνω στη ζυγαριά. Στη συνέχεια, το βάρος του κατοικιδίου σας θα εμφανιστεί στην οθόνη αναβοσβήνοντας δύο φορές. Το μετρούμενο βάρος εμφανίζεται για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ζύγιση μετά την ενεργοποίηση της ζυγαριάς, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Απαιτείται αντικατάσταση της μπαταρίας όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη:



Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας στο πίσω μέρος της ζυγαριάς και αφαιρέστε προσεκτικά τη μπαταρία τραβώντας τη μαύρη πλαστική γλωττίδα συγκράτησης. Η γλωττίδα ασφάλισης βρίσκεται στο επάνω μέρος της μπαταρίας. Μην σπάτε τη μεταλλική γλωττίδα. Αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια καινούργια. Η παλιά μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται σε κατάλληλο χώρο.

ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ

Όταν υπάρχει υπερβολικό φορτίο στη ζυγαριά, εμφανίζεται η παρακάτω ένδειξη:



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η επιφάνεια της μονάδας πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκληρά αντικείμενα διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας! Μην καθαρίζετε ποτέ τη μονάδα με τρεχούμενο νερό, μην την ξεπλύνετε και μην τη βυθίζετε σε νερό!

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οποιαδήποτε εκτεταμένη συντήρηση ή επισκευή που απαιτεί πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη του προϊόντος πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Τα υλικά της συσκευασίας και οι παλιές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται.
- Η απόρριψη του κουτιού που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά μπορεί να γίνει βάσει διαχωρισμένης συλλογής.
- Οι σακούλες πολυαιθυλενίου πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση.



Απόρριψη: Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται από κοινού με άλλα οικιακά απορρίμματα. Οι χρήστες πρέπει να απορρίπτουν τον εν λόγω εξοπλισμό σε ειδικό σημείο ανακύκλωσης που προορίζεται για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η βασική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.