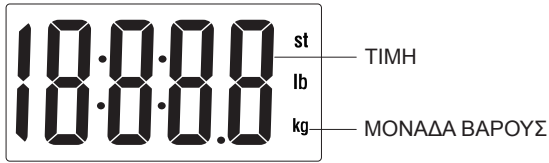


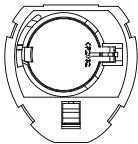
**BILANCIA IN PLASTICA ULTRASOTTILE  
ULTRA SLIM PLASTIC BODY SCALE  
BALANCE EN PLASTIQUE ULTRA MINCE  
ULTRADÜNNE PERSONENWAAGE  
BÁSCULA DE PLÁSTICO ULTRA FINA  
BALANÇA DE PLÁSTICO SUPER FINA  
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΗ  
WAGA PLASTIKOWA ULTRACIENKA**

ميزان من البلاستيك رقيق جدا

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE  
USE AND MAINTENANCE BOOK  
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN  
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN  
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO  
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI  
دليل الإستعمال والرعاية****ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.**ACHTUNG:** Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.**ATENÇÃO:** Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.**UWAGA:** przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu operatorzy muszą przeczytać podręcznik i upewnić się, iż wszystko to, co jest w nim napisane jest dla nich jasne i zrozumiałe**الحذر:** على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستعمال المنتج.**REF** 27262Teme l'umidità  
Keep away from humidityConservare al riparo della luce solare diretta  
Protect against direct sunlightFabbricante  
ManufacturerGima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Made in P.R.C.

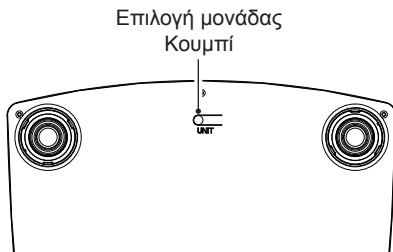
**ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ LCD**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- Auto ON
- LCD Εξαιρετικά μεγάλη 74x38mm
- Μονάδα Βάρους: kg, lb, st:lb
- Ικανότητα: 150kg/330lb/23st:8lb
- Κλίμακα: 0,1kg/0,2lb/0,2lb(1lb, ≥20st)
- Μήνυμα υπερφόρτωσης: “ — — — — ”
- Μήνυμα χαμηλής μπαταρίας “Lo”
- Μπαταρία: 1 x CR2032

**ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**


- Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι +/- είναι σωστοί.
- Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο για να διευκολύνετε την αφαίρεση της μπαταρίας από τη θέση της αν χρειάζεται.

*Αφαιρέστε τη μονωτική ταινία πριν από τη χρήση.*

**ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- 1) Πατήστε το κουμπί **UNIT** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα και να επιλέξετε μονάδα.
- 2) Τοποθετήστε την ζυγαριά σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, αφήστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα η ζυγαριά.
- 3) Ανεβείτε απευθείας στη βάση της ζυγαριάς. Η οθόνη αναβοσβήνει έως ότου μετρηθεί το βάρος. Μετά από 10 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται αυτόματα.
- 4) Αν δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείται αυτόματα
- 5) Όταν δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να αποθηκεύεται σε οριζόντια θέση χωρίς να τοποθετείτε αντικείμενα επάνω της.


**Προειδοποιήσεις:**

- Μη χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά πάνω σε χαλί
- Για να εξασφαλιστεί η ακριβής μέτρηση του βάρους, όταν μετακινείτε τη ζυγαριά συνιστούμε να την ενεργοποιήσετε (ή να την αγγίξετε) και να περιμένετε να σβήσει. Μετά μπορείτε να ανεβείτε στη ζυγαριά για να μετρήσετε το βάρος σας. Διαφορετικά, μπορεί να ανιχνεύσει μεγαλύτερο βάρος.



**ΧΩΝΕΥΣΗ:** Το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τις σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες στους χώρους συγκέντρωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία του δήμου παραμονής σας, το τμήμα χώνευσης τοπικών απορυμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Σε περίπτωση λανθασμένης χώνευσης υπάρχει κίνδυνος εφαρμογής κυρώσεων βάσει των κρατικών νόμων.

### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Συγχαίρουμε μαζί σας που αγοράσατε ένα δικό μας προϊόν. Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στα υψηλά ποιοτικά πρότυπα τόσο των υλικών όσο και της κατασκευής. Η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία απόκτησης του GIMA. Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης θα φροντίσουμε για την επιδιόρθωση και / ή την δωρεάν αντικατάσταση όλων των υλικών που θα παρουσιάσουν βλάβη λόγω αποδειγμένου προβλήματος κατασκευής, με εξαίρεση τα εργατικά έξοδα ή έξοδα μετακίνησης, μεταφορές και συσκευασίες. Εξαιρούνται της εγγύησης όλα τα αναλώσιμα υλικά. Η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση που γίνεται κατά την περίοδο εγγύησης δεν έχουν σαν αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου εγγύησης. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που: η επιδιόρθωση γίνεται από προσωπικό όχι εγκεκριμένο και με ανταλλακτικά όχι αυθεντικά, ζημιές ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από αμέλεια, χτυπήματα ή κακή χρήση. Η GIMA δεν ευθύνεται για κακή λειτουργία σε ηλεκτρονικές συσκευές ή software που προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες όπως: ανεβοκατεβάσματα ηλεκτρικής τάσης, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ραδιοφωνικές παρεμβολές, κ.λ.π.. Η εγγύηση παύει να έχει ισχύ εάν δεν τηρηθούν οι ως άνω κανόνες και εάν ο αριθμός μητρώου ( εάν υπάρχει ) έχει απομακρυνθεί, σβηστεί ή αλλοιωθεί. Τα προϊόντα που θεωρούνται με βλάβη πρέπει να αντικατασταθούν αποκλειστικά και μόνον από τον μεταπωλητή από τον οποίο αγοράστηκαν.

Αποστολή εμπορευμάτων κατευθείαν στην εταιρεία GIMA θα επιστραφούν.