

CALIBRO PER NEONATI
BABY MEASURING ROD WITH CALIPERS
JAUGE POUR BÉBÉ
CALIBRE PARA BEBÉS
MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS
MESSSCHIEBER FÜR NEUGEBORENE
PEDIOMETRU TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI
KROPPSMÄTARE FÖR SPÄDBARN
SUWMIARKA DLA NOWORODKÓW
ΒΡΕΦΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Manuale utente - User manual - Mode d'emploi - Manual de uso - Manual do utilizador - Benutzerhandbuch -
Manual de utilizare și întreținere - Instruktioner för användning och underhåll
Instrukcja użytkownika - Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

CUIDADO: Os operadores devem ler e compreender este manual completamente antes de usar o produto.

VORSICHT: Bediener müssen dieses Handbuch vollständig lesen und verstehen, bevor sie das Produkt verwenden.

ATENȚIE: Operatorii trebuie să citească și să înțeleagă complet acest manual înainte de a utiliza produsul.

FÖRSIKTIGHET: Operatörer måste läsa och förstå denna manual helt innan de använder produkten.

UWAGA: Operatorzy muszą w całości przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed użyciem produktu.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος.

GIMA 27326



Metrica S.p.A.,
Via A. Grandi 18, 20097
San Donato Milanese (MI) - Italy
Made in Italy





10455



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



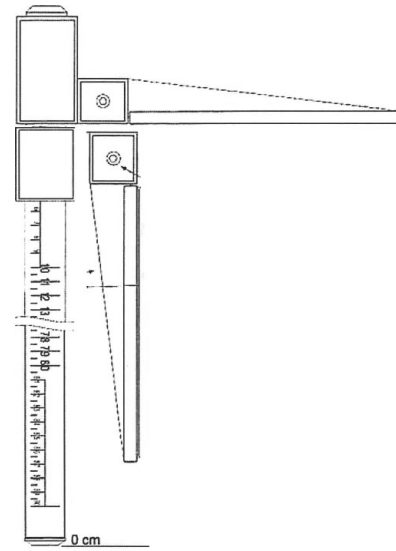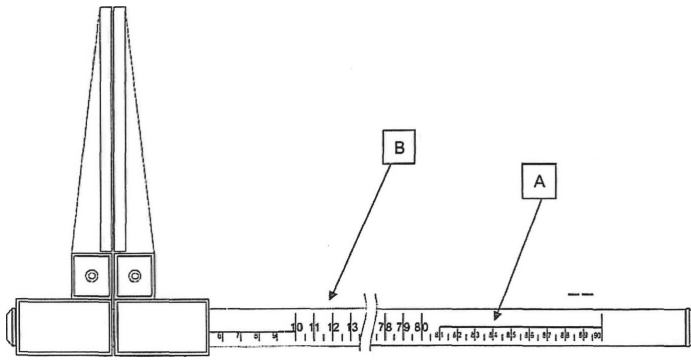

ΕΛΛΗΝΙΚΑ**ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρέχει στον πελάτη όλες τις πιθανές πληροφορίες για τη ΒΡΕΦΙΚΗ ΡΑΒΔΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ καθώς και τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης της ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.

Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να φυλάσσεται σε προσβάσιμο χώρο.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η ΒΡΕΦΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση σε εκατοστά του μήκους του σώματος ενός βρέφους ή ενός συγκεκριμένου μέρους του σώματός του, με ακρίβεια ± 1 εκ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πλησιάστε τις δύο σιαγόνες της ράβδου μέτρησης στο μέρος του σώματος που επιθυμείτε να μετρήσετε και διαβάστε την τιμή που υποδεικνύεται στον δείκτη που υπάρχει επάνω στη διαβαθμισμένη κλίμακα.

Το όργανο διαθέτει διαβαθμισμένη ράβδο με δύο τύπους κλίμακας για τη μέτρηση: σε εκατοστά (cm)

A) η κλίμακα με τους μικρότερους χαρακτήρες από 0-90 εκ. με βήματα του 0,5 εκ. – ανοχή $\pm 0,5$ εκ.

B) η μεγαλύτερη κλίμακα από 0-90 εκ. με βήματα του 0,5 εκ. – ανοχή $\pm 0,5$ εκ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατακόρυφα στρέφοντας κατά 90° την εσωτερική σιαγόνα φέρνοντάς την επάνω στη διαβαθμισμένη ράβδο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η ΒΡΕΦΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά. Μην επιδιωκώ να διορθώσετε μόνοι σας το προϊόν, εάν είναι απαραίτητο απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα και τα μέρη από τα οποία αποτελείται το προϊόν. Επιβεβαιώστε ότι δεν λείπει κανένα και ότι όλα είναι σε άριστη κατάσταση.

Ο καθαρισμός της ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ πρέπει να πραγματοποιείται με ένα πανί το οποίο έχετε βρέξει με ουσίες οι οποίες δεν προκαλούν ζημιά στο αλουμίνιο, π.χ. οινόπνευμα ή/και καθαριστικό τζαμιών.

Είναι απαραίτητο να αναφέρετε οποιοδήποτε ατύχημα σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν που σας παρέχουμε στον κατασκευαστή καθώς και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε

Η ΒΡΕΦΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκεί στον χρόνο: είναι ανθεκτική στα περισσότερα χημικά προϊόντα, με εξαίρεση τις μεθυλαιθυλοκετόνες (Μ.Ε.Κ.), τα αραιωτικά και τους διαλύτες για βερνίκια νυχιών.

Η ΒΡΕΦΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ πρέπει να αποθηκεύεται πάντα στη θήκη της σε περιβάλλον χωρίς υγρασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Αρ. Εξαρτήματος	Περιγραφή εξαρτήματος
1	Σιαγόνες
2	Κινητό στήριγμα
3	Διορθώθηκε η υποστήριξη
4	Διαβαθμισμένη ράβδος από αλουμίνιο
5	Πλαστικό κάλυμμα

Για την αντικατάσταση των εξαρτημάτων θα πρέπει να αποστείλετε το όργανο στον κατασκευαστή.

	Κωδικός προϊόντος		Αριθμός παρτίδας
	Διατηρήστε το προϊόν μακριά από το ηλιακό φως		Διατηρήστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/745		Κατασκευαστής
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Ημερομηνία κατασκευής
	Προσοχή: Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες (προειδοποιήσεις) χρήσης		Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
	Σειριακός αριθμός		Διανέμεται από
	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής		

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.