



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTINI DA VISITA MODELLO CLASSICO
CLASSIC EXAMINATION COUCHS
LITS ACCOMPAGNANTS CLASSIQUES
CAMILLAS CONSULTA CLÁSICA
MARQUESAS DE CONSULTA CLÁSSICAS
UNTERSUCHUNGSBETT KLASSISCHES
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ κλασικά

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF

27404 – 27405 – 27445

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



MD



ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- 27404 ΚΛΑΣΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ - επιχρωμιωμένο - μπεζ στρώμα
- 27405 ΚΛΑΣΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ - επιχρωμιωμένο - μπλε στρώμα - πλάτη με οπή
- 27445 ΚΛΑΣΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ - επιχρωμιωμένο - βερικοκί στρώμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 το προϊόν υπάγεται στα ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το ακόλουθο εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Κλασικό εξεταστικό κρεβάτι προορίζεται για χρήση σε νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κέντρα περίθαλψης και ιατρεία. Εξεταστικό κρεβάτι με σκελετό και πόδια εξ ολοκλήρου από γυαλισμένο επιχρωμιωμένο χάλυβα. Τα 2 τμήματα του στρώματος αποτελούνται από ανθεκτικό αφρώδες υλικό επικαλυμμένο με πλενόμενο πλαστικό που είναι ανθεκτικό στη φωτιά. Το τμήμα της πλάτης είναι πλήρως ανακλινόμενο.

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ:

- Στρώμα επενδυμένο με πλενόμενο ύφασμα ανθεκτικό στη φωτιά, στερεωμένο στον επιχρωμιωμένο σκελετό, με σύστημα ανύψωσης κεφαλιού
- Ράβδος συστήματος ανύψωσης κεφαλιού
- Επιχρωμιωμένα πόδια
- Κατόπιν αιτήματος: επιχρωμιωμένη βάση στήριξης εξεταστικού ρολου

Σακουλάκι με υλικά συναρμολόγησης:


- Αρ. 4 Βίδες TBE 8x16 (βιδωμένες στον σκελετό)
- ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΕΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


Το κρεβάτι παρέχεται μερικώς συναρμολογημένο: το στρώμα είναι ήδη στερεωμένο στο πλαίσιο του σκελετού. **Ξεκινήστε τη συναρμολόγηση πάνω σε μια σταθερή οριζόντια επιφάνεια εργασίας.**

Τοποθετήστε το κρεβάτι πάνω σε μια επιφάνεια εργασίας με την πλευρά του στρώματος πάνω στην επιφάνεια (το στρώμα είναι ήδη στερεωμένο στο πλαίσιο - **ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΒΙΔΩΝΕΤΕ**).

Ο εξοπλισμός που σας παρέχεται περιλαμβάνει ένα κλειδί άλλεν με το οποίο θα ξεβιδώσετε/βιδώσετε τα πόδια.

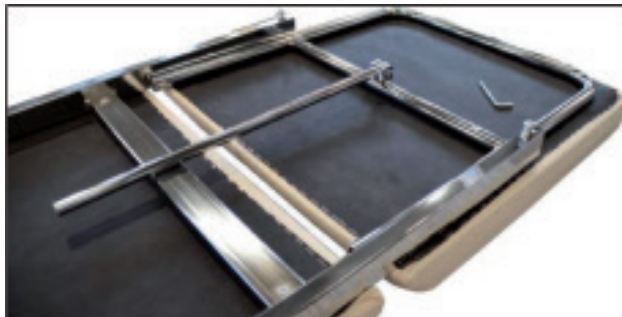


Ξεβιδώστε τη ράβδο του συστήματος ανύψωσης κεφαλιού μέσω της εξάγωνης βίδας και του αντίστοιχου παξιμαδιού.

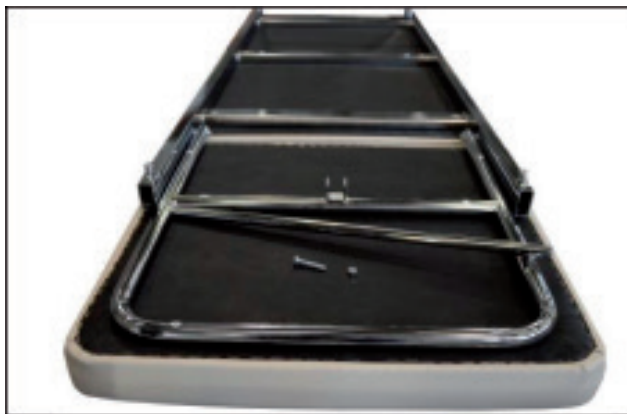



Αφού χαλαρώσετε τις σχετικές βίδες TBE 8X16, τοποθετήστε τα πόδια με την εγκάρσια δοκό για την ανύψωση κεφαλιού στην υποδοχή του πλαισίου που είναι στερεωμένο στον σκελετό και ξαναβιδώστε με το κλειδί άλλεν του εξοπλισμού.

Ενεργήστε με τον ίδιο τρόπο και για τα υπόλοιπα πόδια του κρεβατιού.

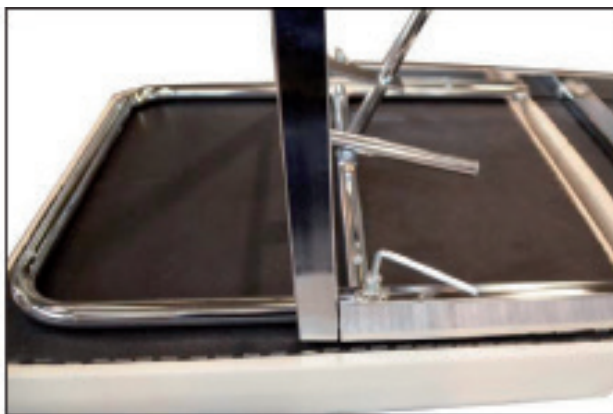

Εισάγετε το κοντάρι ρύθμισης του συστήματος ανύψωσης κεφαλιού στην υποδοχή του (οπή πάνω στο πλακίδιο).

Βιδώστε και πάλι την εξάγωνη βίδα και το αντίστοιχο παξιμάδι.

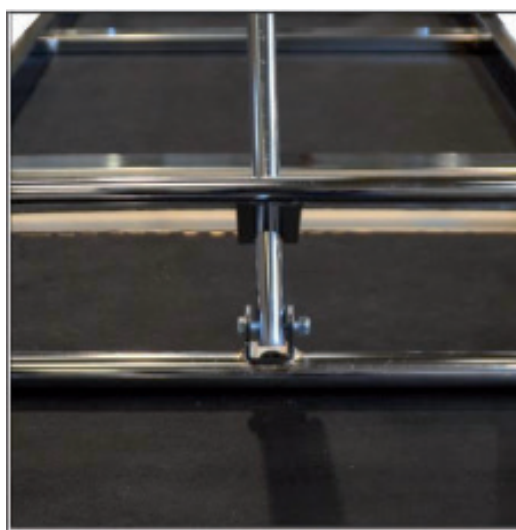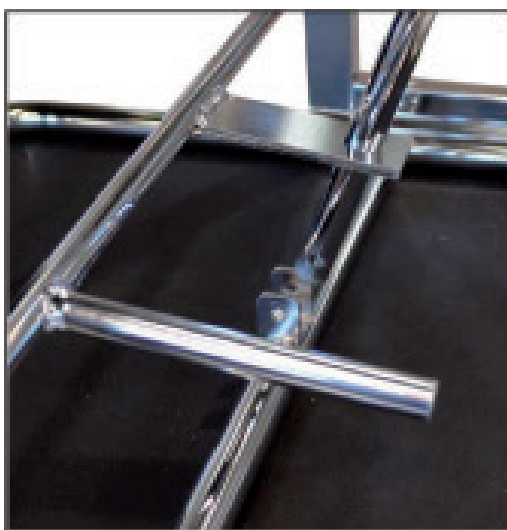

Λεπτομέρεια συστήματος ανύψωσης κεφαλιού μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης.



ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαστάσεις	ΕΚ.188 x 57,5 x 73,5 Υ συσκευασία 198 x 17 x 64 Υ
Βάρος	28 kg
Μέγιστο φορτίο	120 kg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια της διάταξης ασφάλισης είναι καλά σφιγμένα.
- Τηρείτε το μέγιστο φορτίο που υποδεικνύεται στα τεχνικά δελτία.
- Αποφύγετε την άμεση επαφή με ανοιχτές πληγές. - Μη κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Όταν ρυθμίζετε το ύψος του κρεβατιού και της πλάτης βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κανείς τοποθετημένα τα χέρια, τα πόδια ή οτιδήποτε άλλο εντός του χώρου μετακίνησης: **ΚΙΝΥΝΟΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ!**
- Μετακινήστε το κρεβάτι χωρίς να το σηκώσετε από το έδαφος. Αν το κρεβάτι διαθέτει ρόδες, προτού το μετακινήσετε βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα πέδησης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ












- Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Ελέγχετε περιοδικά όλα τα σημεία στερέωσης
- Για τη βέλτιστη συντήρηση, συνιστάται να αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση στις ακτίνες του ηλίου, την επαφή με αλατούχα περιβάλλοντα και την αποθήκευση σε χώρους με πολύυγρασία.
- Πλύνετε τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα με νερό και σαπούνι και χρησιμοποιήστε ειδικά απολυμαντικά.
- Ξεβγάλτε με ένα βρεγμένο πανί και στεγνώστε με προσοχή.
- Μη ρίχνετε πάνω στις επιφάνειες απορρυπαντικά που έχουν βάση το χλώριο ή την αμμωνία, λιπαρές και ελαιώδεις ουσίες.
- Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό εργαλεία που περιέχουν σίδηρο. Αν απαιτείται απολύμανση χρησιμοποιήστε μόνο κατάλληλα μη διαβρωτικά προϊόντα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ:

Καθαρίστε με πανί που έχετε βρέξει με νερό και σαπούνι και ξεβγάλτε καλά με καθαρό νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, χλωρίνη και χημικά καθαριστικά ή γυαλιστικά σπρέι.

Προσοχή: Γενικά τα ανοιχτά χρώματα των συνθετικών δερμάτων δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με ρούχα που δεν έχουν σταθερές βαφές (π.χ. τζιν και παρόμοια) ώστε να αποφεύγονται λεκέδες και σημάδια που δεν μπορούν

να καθαριστούν.

	Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	Κωδικός προϊόντος		Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης		Παραγωγός
	Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)		Αριθμός παρτίδας		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής		Ημερομηνία κατασκευής		

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.