



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

**CARRELLO EXCEL  
EXCEL TROLLEY  
CHARIOT EXCEL  
CARRO EXCEL  
CARRINHO EXCEL  
WAGEN "EXCEL"  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ EXCEL**

**Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso  
Guia para utilização - Gebrauchs ungsanleitung - Οδηγίες χρήσης**

---

**REF** 27440 - 27441



Distribuito da / distributed by / distribué par / distribuido por /  
vertrieben von / distribuído por / Διανέμεται από:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Made in Italy

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante  
/ Hersteller / Κατασκευαστής:

**SCROSATI ARREDAMENTI METALLICI SRL**

Via Vittorio Veneto 95, 21015 Lonate Pozzolo (VA)  
scrosati@scrosati.com

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το ακόλουθο εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το παρόν προϊόν είναι ένα τροχήλατο τραπέζακι από βαμμένο χάλυβα με 3 ή 4 σταθερά ράφια. Είναι ένα τροχήλατο τραπέζακι για νοσοκομειακή χρήση.


Το τροχήλατο τραπέζακι Excel είναι ένα πρακτικό τροχήλατο τραπέζακι κατάλληλο για τη στήριξη και/ή μεταφορά μικρών ηλεκτρικών ιατρικών συσκευών.

**ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**


- 3 ράφια κωδ.27440
- 4 ράφια κωδ.27441
- 2 πόδια

**Σακουλάκι με υλικά συναρμολόγησης:**

- 4 τροχοί

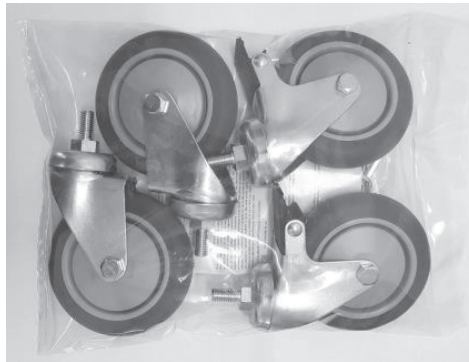

- 12 βίδες ΤΤΒΕ 8X25 κωδ.27440
- 16 βίδες ΤΤΒΕ 8x25 κωδ.27441
- 12 ροδέλες 8X16 κωδ.27440
- 16 ροδέλες 8X16 κωδ.27441
- 12 βίδες ΤΤ 8X16 FE κωδ.27440
- 16 βίδες ΤΤ 8X16 FE κωδ.27441

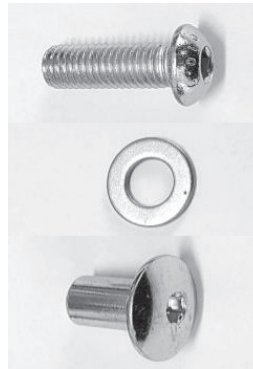

- 2 ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ


**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Ξεκινήστε τη συναρμολόγηση πάνω σε μια σταθερή οριζόντια επιφάνεια εργασίας.

Βιδώστε τους τροχούς στη βάση των δύο ποδιών.

Για να στερεώσετε τα ράφια στην κατασκευή ξεκινήστε από τη μία πλευρά τοποθετώντας τις βίδες σύνδεσης.

Βίδες σύνδεσης	Βίδα και ροδέλα που τοποθετούνται στο <b>εσωτερικό</b> του ραφιού	Βίδα ΤΤ που τοποθετείται στην κατασκευή, στην <b>εξωτερική</b> πλευρά του ποδιού
		

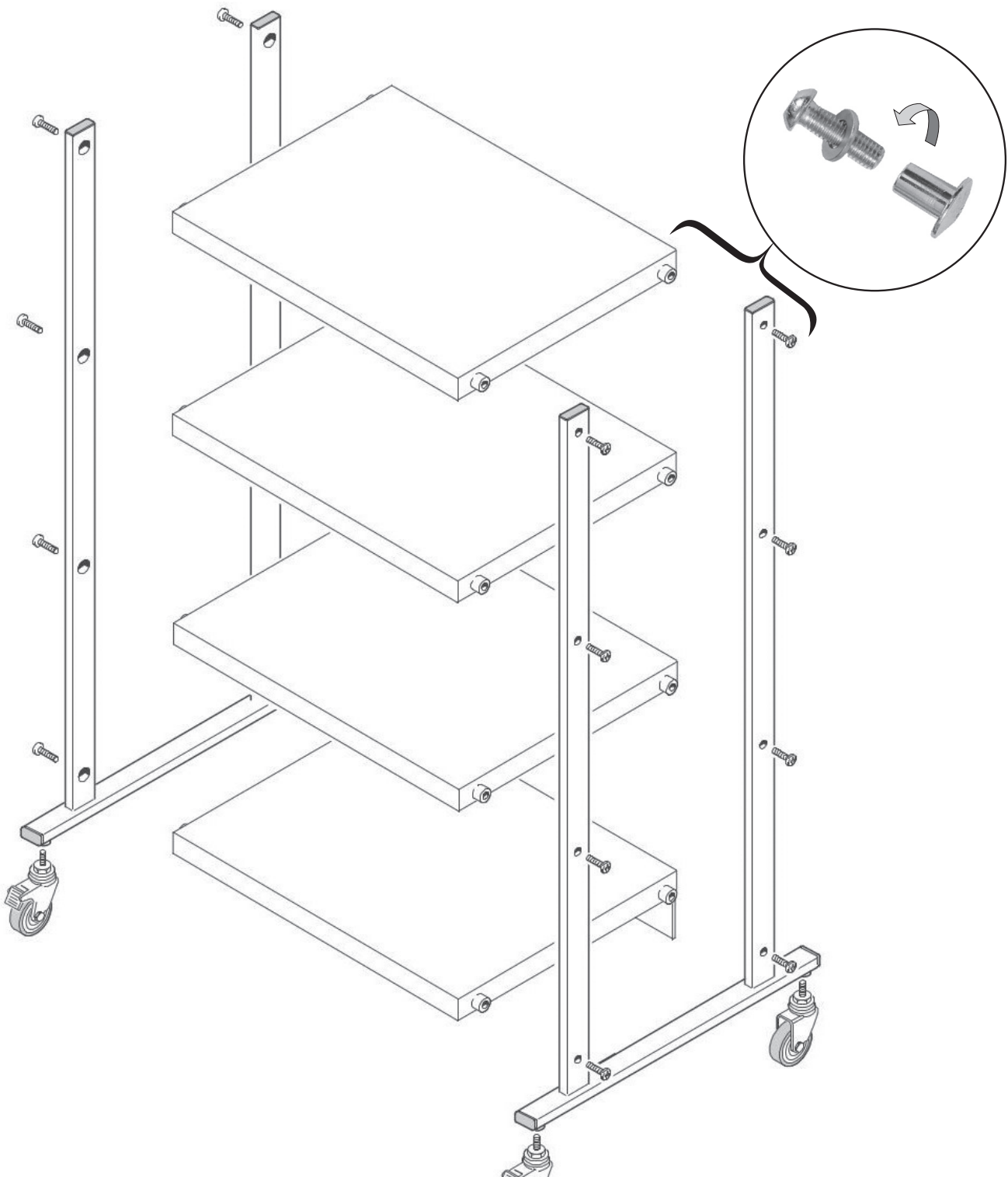

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

<b>Διαστάσεις</b>	Τροχήλατο τραπεζάκι 3 ραφιών: 66x68x Υ 81 εκ. Τροχήλατο τραπεζάκι 4 ραφιών: 66x68x Υ 111 εκ. Ράφι: 60 x 45 x Υ 2,5 εκ. Κουτί: 96,5 x 18,5 x Υ 74 εκ.
<b>Βάρος</b>	Τροχήλατο τραπεζάκι 3 ραφιών: 27 kg (28,8 kg με το κουτί) Τροχήλατο τραπεζάκι 4 ραφιών: 35,5 kg (37,3 kg με το κουτί)
<b>Μέγιστο φορτίο</b>	80 kg



## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- Βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια της διάταξης ασφάλισης είναι καλά σφιγμένα.
- Τηρείτε το μέγιστο φορτίο που υποδεικνύεται στα τεχνικά δελτία.
- Αποφύγετε την άμεση επαφή με ανοιχτές πληγές.
- Μη κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

## **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

- Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Ελέγχετε περιοδικά όλα τα σημεία στερέωσης
- Για τη βέλτιστη συντήρηση, συνιστάται να αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση στις ακτίνες του ηλίου, την επαφή με αλατούχα περιβάλλοντα και την αποθήκευση σε χώρους με πολύ υγρασία.
- Πλύνετε τις επιφάνειες από ανοξειδωτο χάλυβα με νερό και σαπούνι και χρησιμοποιήστε ειδικά απολυμαντικά.
- Ξεβγάλτε με ένα βρεγμένο πανί και στεγνώστε με προσοχή.
- Μη ρίχνετε πάνω στις επιφάνειες απορρυπαντικά που έχουν βάση το χλώριο ή την αμμωνία, λιπαρές και ελαιώδεις ουσίες.
- Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό εργαλεία που περιέχουν σίδηρο. Αν απαιτείται απολύμανση χρησιμοποιήστε μόνο κατάλληλα μη διαβρωτικά προϊόντα.

## **ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA**

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.