

SPONDA PER LETTO A FORMA DI N
N-SHAPED BEDRAIL
BARRIÈRE DE LIT EN FORME DE N
BARANDILLA DE CAMA EN FORMA DE N
GRADE DE CAMA DE FORMA N
N-GEFORMTES SEITENTEIL FÜR BETTEN
ȘINĂ PENTRU PAT ÎN FORMĂ DE N
N-FORMAT SÄNGRÄCKE
BARIERKA ŁÓŻKOWA W KSZTAŁCIE LITERY N
ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ-N

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF LW10206 (GIMA 27697)



Mingguang Longway Technology Co., Ltd.
No. 59 Lingji Rd., Industrial Park, Mingguang, Anhui, China
Made in China



Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10, 1 e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



- ⚠ • Μη χρησιμοποιείτε τη βάση του προϊόντος για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο.
- ⚠ • Τα πλαϊνά κάγκελα κρεβατιού δεν προορίζονται για τη στήριξη ολόκληρου του βάρους ενός ατόμου.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση ανήκουν στην Κατηγορία Χαμηλού Κινδύνου (Κατηγορία Ι) και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και, όπου είναι απαραίτητο, με τα σχετικά πρότυπα και τη σχετική νομοθεσία.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

- Ελέγξτε το πλαίσιο για τυχόν ζημιά προκειμένου να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του προϊόντος. (Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασμένα σημεία στο πλαίσιο).
- Σε περίπτωση ζημιάς μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για περαιτέρω οδηγίες.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σωστά συναρμολογημένο και ότι όλες οι βίδες είναι καλά σφιγμένες.
- Ελέγξτε πάντα τον βαθμό φθοράς των μηχανικών στοιχείων ώστε να επιβεβαιώνεται η απόλυτα ασφαλής χρήση του προϊόντος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Εάν το προϊόν σας χρήζει αντικατάστασης ή πάψει να σας είναι απαραίτητο, κατά την απόρριψή του λάβετε υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μη απορρίψετε το προϊόν μαζί με τα κοινά αστικά απορρίμματα (αυτό ακριβώς υποδεικνύει το σύμβολο της ανακύκλωσης).
- 2) Επικοινωνήστε με τις Δημόσιες Αρχές και ζητήστε πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα ανακύκλωσης στα οποία μπορείτε να απορρίψετε το προϊόν σας.
- 3) Η σωστή απόρριψη του προϊόντος σας συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην ανακύκλωση των επιμέρους εξαρτημάτων του προϊόντος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης και της απαραίτητης υγιεινής, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί αυτές τις διαδικασίες πριν από κάθε χρήση.

Ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώνει την ακεραιότητα του προϊόντος και των επιμέρους εξαρτημάτων του. Για τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Φορέστε γάντια.
2. Αφαιρέστε την ορατή βρωμιά προτού προχωρήσετε σε βαθύτερη απολύμανση.
3. Χρησιμοποιήστε νερό ή ήπιο απορρυπαντικό για τη διαδικασία καθαρισμού.
4. Σκουπίστε με ένα στεγνό και καθαρό πανί.
5. ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν βρεγμένο.
6. Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το πλαίσιο. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος
7. Εάν θέλετε να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό
8. Προστατεύστε το προϊόν από γρατζουνιές, κοψίματα και τρυπήματα.
9. Λίπανση: το προϊόν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απαιτείται ελάχιστη συντήρηση. Ωστόσο, κάθε έξι μήνες ελέγχετε τη λίπανση των κινούμενων & μηχανικών εξαρτημάτων προκειμένου το προϊόν να αντέξει στον χρόνο όσο το δυνατό περισσότερο.



Βάρος Φορτίου: 75kg

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Τα προστατευτικά κάγκελα κρεβατιού είναι ένα αξεσουάρ που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αποτρέπει την τυχαία πτώση του ασθενούς από το κρεβάτι και προορίζεται για νοσοκομειακή ή οικιακή φροντίδα.

Είναι κατάλληλο για τα περισσότερα μεταλλικά κρεβάτια & διαθέτει εύκολο σύστημα χειρισμού, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αφαιρεθεί τελείως σε περίπτωση μεταφοράς του ασθενούς από και προς το κρεβάτι. Τα προστατευτικά κάγκελα κρεβατιού είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ταιριάζουν στα περισσότερα κρεβάτια χάρη στο απλό πλαίσιο που διαθέτουν, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί στο κεφαλάρι και στο ποδαρικό του κρεβατιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Σε περίπτωση ζημιάς ή δυσλειτουργίας των προϊόντος σας ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και καταρτισμένο αντιπρόσωπο.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η LONGWAY Medical δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από εσφαλμένη χρήση αυτού του προϊόντος και από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του πλαισίου του προϊόντος.
- Η LONGWAY Medical διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Υπάρχει απόκλιση $\pm 3\%$ όσον αφορά τις Διαστάσεις των Προϊόντων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- ⚠ • Εάν δεν διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν ή κάποιο άλλο διαθέσιμο προϊόν. Εάν δεν κατανοείτε τα μέτρα προφύλαξης, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή με κάποιον ειδικό προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- ⚠ • Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
- ⚠ • Αποθηκεύστε το έγγραφο αυτό για μελλοντική αναφορά.
- ⚠ • Απαιτείται προσοχή όταν υπάρχουν παιδιά πλησίον του προϊόντος και μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- ⚠ • Μην υπερβαίνετε το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
- ⚠ • Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή διότι τα κινούμενα μέρη μπορεί να προκαλέσουν παγίδευση των άκρων και τραυματισμό.
- ⚠ • Μην επιχειρείτε να σηκώσετε το προϊόν κρατώντας το από τα αποσπώμενα μέρη του.


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες που αφορούν τη συναρμολόγηση είναι ενδεικτικές ώστε η διαδικασία να είναι σαφέστερη. Ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με το πραγματικό προϊόν.

Για να συναρμολογήσετε τα Κάγκελα στο Κρεβάτι:

1. Αφαιρέστε τις βίδες με τις περιστρεφόμενες λαβές στερέωσης στη βάση των σφικτήρων, προσαρμόστε τις υπόλοιπες βίδες στερέωσης στα άκρα σύμφωνα με τη δομή του κρεβατιού, τοποθετήστε το πλαϊνό τμήμα και με τους δύο σφικτήρες στο πλαίσιο του κρεβατιού, ξαναβάλτε τις βίδες με τις λαβές στερέωσης που είχατε αφαιρέσει προηγουμένως, προσαρμόστε τη θέση που θέλετε να έχουν τα κάγκελα σε σχέση με το κρεβάτι και σφίξτε με ίδιο τρόπο τις περιστρεφόμενες λαβές στερέωσης στα άκρα (όπως φαίνεται στην εικόνα).

Περιστρεφόμενη λαβή κλίσης και προσαρμογής

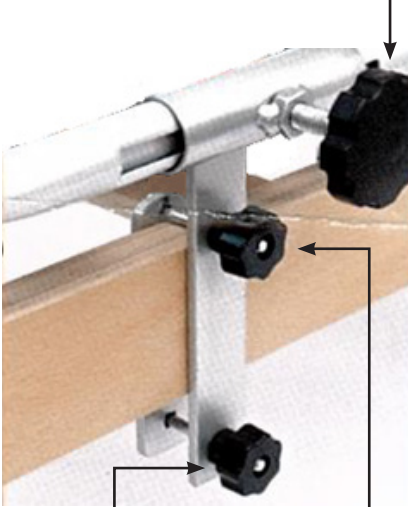

Περιστρεφόμενες λαβές στερέωσης στον σφικτήρα

Περιστρεφόμενες λαβές στερέωσης στη βάση του σφικτήρα

2. Εάν χαλαρώσετε τις περιστρεφόμενες λαβές κλίσης και προσαρμογής μπορείτε να μετακινήσετε τα πλαϊνά κάγκελα προς τα πόδια ή το κεφάλι του ασθενούς στην απόσταση που επιτρέπεται από τις εγκοπές. Αφού εκτελέσετε την προσαρμογή, θα πρέπει να ξανασφίξετε τις λαβές.

3. Εάν χαλαρώσετε τις περιστρεφόμενες λαβές κλίσης και προσαρμογής μέχρι οι εγκοπές να απελευθερωθούν τελείως, το πλαϊνό τμήμα μπορεί να διπλωθεί κατά 180°, επιτρέποντας έτσι οποιαδήποτε παρέμβαση στο κρεβάτι ή στον ασθενή. Αφού ολοκληρώσετε την παρέμβαση, θα πρέπει να επανατοποθετήσετε το πλαϊνό τμήμα και να ξανασφίξετε τις περιστρεφόμενες λαβές.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν διαθέτει εγγύηση ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς.





Η εγγύηση ισχύει για εργοστασιακά ελαττώματα & ΔΕΝ ισχύει

για ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση, ελλιπή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή μη τήρηση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος.

Επίσης ΔΕΝ ισχύει για τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά κατά τη διάρκεια της χρήσης ή με την πάροδο του χρόνου. Ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας ισχύος (όπου ισχύει) & μεταφορές δεν καλύπτονται από την εγγύηση.


Το σέρβις ή η χρήση ανταλλακτικών πραγματοποιούνται μόνο εφόσον το προϊόν ελεγχθεί από ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις ή από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα αποστολής για τα προϊόντα με εγγύηση επιβαρύνουν τον τελικό χρήστη - πελάτη ή τον προμηθευτή.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΘΡΥΛΟΣ

	Παραγωγός
	Ημερομηνία παραγωγής
	Κωδικός προϊόντος
	Αριθμός παρτίδας
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)
	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής
	Διάθεση WEEEI
	Εισαγωγή από

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών

 **ΤΧΩΝΕΥΣΗ:** Το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τις σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών