



GIMA

**MATERASSI ANTIDECUBITO
ANTI DECUBITUS MATTRESS
MATELAS ANTI-ESCARRES DE DÉCUBITUS
COLCHONES ANTI-DECÚBITO
COLCHÕES ANTI-FERIDAS**
Στρώματα με ειδική κατασκευή κατά της κατάκλισης
فراش ضد مخاطر الإضطجاع

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

دليل الإستعمال والرعاية

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

الحذر: على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستعمال المنتج.

CE





ΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΦΟΥΣΚΕΣ

Στρώμα από PVC με χωριστούς θαλάμους οι οποίοι σχηματίζουν φουσκάλες τοποθετημένες κατά μήκος όλης της επιφάνειας χρήσεως και οι οποίες, φουσκώνοντας εναλλακτικά, συγκρατούν το υποκείμενο που βρίσκεται ξαπλωμένο πάνω του. Πρόκειται για το σύστημα που χρησιμοποιείται περισσότερο.

Κωδικός προϊόντος **28492** στρώμα με φούσκες από PVC πάχους 0,40 χιλ.

<u>Τεχνικά χαρακτηριστικά</u>	Υλικό:	PVC
	Χρήσιμη επιφάνεια:	1,9μ. x 0,85μ.
	Υποδοχές:	2
	Σωλήνες διασύνδεσης:	2 των 1,4μ. ο καθένας-εσωτ. διάμ. 5 χιλ.
	Βάρος:	3,0 Κιλά περίπου (RBLB)
	Εγγύηση:	12 μήνες

ΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ

Στρώμα από PVC που αποτελείται από κυλινδρικά στοιχεία τα οποία ενώνονται οριζόντια μεταξύ τους και στερεώνονται πάνω σε ένα κάλυμμα από PVC. Επιτρέπει την ενδεχόμενη αλλαγή του καθενός στοιχείου, ξεχωριστά, το οποίο ενδεχομένως έχει υποστεί ζημιές, μεγάλωνοντας έτσι τον χρόνο διάρκειας ζωής. Το μεγαλύτερο ύψος των φουσκωμένων στοιχείων σε σχέση με το στρώμα με φούσκες επιτρέπει την χρήση του στρώματος με τις εναλλασσόμενες ράβδους και στις περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος για ισχαιμία είναι πολύ μεγάλος.


Κωδικός προϊόντος **28493** στρώμα με 20 εναλλασσόμενες ράβδους

<u>Τεχνικά χαρακτηριστικά</u>	Υλικό:	PVC πάχους 0,4 χιλ.
	Χρήσιμη επιφάνεια:	1,6μ. x 0,85μ.
	Αριθμός στοιχείων:	20
	Σωλήνες διασύνδεσης:	2 των 1,3μ. ο καθένας-εσωτ. διάμ. 5 χιλ.
	Βάρος:	4,0 Κιλά περίπου (RINT)
	Εγγύηση:	12 μήνες

Χρήση και λειτουργία Συνδέστε τους δύο σωλήνες από PVC στους κατάλληλους συνδετήρες του αεροσυμπιεστή.

ΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CPR

Το σύστημα RINT PLUS αποτελείται από ένα στρώμα που κατασκευάστηκε από μαλακό και γερό PVC, και αποτελείται από 17 αποσπάσιμα μονά στοιχεία και από έναν συμπιεστή αέρος για το φούσκωμα.

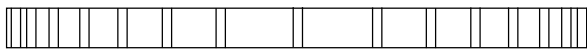

Το σύστημα RINT PLUS μελετήθηκε για την τοποθέτηση των ασθενών στους οποίους υπάρχει κίνδυνος κατάκλισης.

Το στρώμα τοποθετείται πάνω από το κανονικό στρώμα.

Η ολοκληρωμένη λειτουργία CPR (Καρδιο Πνευμονική Αναβίωση) επιτρέπει επίσης το γρήγορο άδειασμα των 17 στοιχείων, τραβώντας την κίτρινη λουρίδα.

Η επένδυση είναι διελαστική, αδιαπέραστη στα υγρά και διαπερατή στους υδρατμούς.

Κωδικός προϊόντος **28495** στρώμα με 17 εναλλασσόμενες ράβδους και λειτουργία CPR

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό:	PVC πάχους 0,4 χιλ.
Χρήσιμη επιφάνεια:	2μ. x 0,90μ.
Αριθμός στοιχείων:	17 μονάδες
Σωλήνες διασύνδεσης:	2 των 1,3μ. ο καθένας-εσωτ. διάμ. 5 χιλ.
Βάρος:	5,5 Κιλά περίπου
Εγγύηση:	12 μήνες

ΣΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ

Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται την τεχνική την τεχνική της διανομής του βάρους του σώματος το οποίο, όταν βρίσκεται ξαπλωμένο, συγκρατείται πάνω σε όλη την επιφάνεια υποστήριξης, μειώνοντας τις πιέσεις επαναφοράς, ακόμη και στα πιο κρίσιμα σημεία. Το νερό επίσης, επειδή πρόκειται για υγρό, ευνοεί πάρα πολύ την ομοιογενή διανομή των βαρών. Το στρώμα έχει κατασκευαστεί από στοιχεία από PVC τα οποία, όταν γεμίσουν μέχρι το σημείο που πρέπει και στερεωθούν από το κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, αποτελεί ένα τέλειο σύστημα για την ομοιογενή διανομή του βάρους του σώματος.

Κωδικός προϊόντος **28499** στρώμα με τρία στοιχεία και πλαίσιο στήριξης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάσταση στοιχείων:	60 x 70 εκ.
Πλαίσιο στήριξης:	2 x 0,9 μ.
Υλικό:	PVC πάχους 0,4 χιλ.
Εγγύηση:	12 μήνες

Χρήση και λειτουργία

- Απλώστε το κάλυμμα στήριξης πάνω στο κανονικό στρώμα και φουσκώστε το με την αντλία που παρέχεται μαζί με το στρώμα.
- Γεμίστε με νερό τα τρία στοιχεία, χρησιμοποιώντας τον σωλήνα που παρέχεται, και προσθέστε το απολυμαντικό υγρό.
- Τοποθετήστε τα στοιχεία μέσα στο πλαίσιο στερέωσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα συγχαρητήριά μας για την εκλογή σας να αποκτήσετε ένα δικό μας προϊόν .

Αυτό το προϊόν απαντάει στους πιο απαιτητικούς κανόνες των υλικών ποιότητας κατασκευής και του τελικού ελέγχου. Η εγγύηση έχει ισχύ για το χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του εφοδιασμού GIMA.

Κατά την διάρκεια της ισχύς της εγγύησης θα φροντίσουμε για την διόρθωση και / ή την δωρεάν αντικατάσταση όλων των κομματιών με βλάβη εξ αιτίας της κατασκευής αφού διαπιστωθεί αυτό, εκτός από τα έξοδα του τεχνικού, μετάβαση εκτός έδρας, έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας κ.λ.π. Είναι λοιπόν εκτός εγγύησης τα στοιχεία που υπόκεινται σε φθορά όπως τα μέρη με καουτσούκ ή PVC, καθετήρες ντόπλερ, τα αισθητήρια SpO2, λάμπες, μπαταρίες, ηλεκτρόδια, χούφτα, λαστιχάκια, αντιστάσεις και άλλα ακόμα.



Καμία αποζημίωση δεν θα πρέπει να απαιτηθεί για την στάση της συσκευής.

Επί πλέον η αντικατάσταση ή η διόρθωση κατά την διάρκεια της εγγύησης δεν μπορεί να μεγαλώσει τον χρόνο εγγύησης.



Η εγγύηση δεν έχει ισχύ σε περίπτωση που: η διόρθωση έγινε από την μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από ανταλλακτικά μη αναγνωρισμένα από την GIMA, αβαρίες ή ατέλειες που προκλήθηκαν από αμέλεια, χτυπήματα, μη σωστή χρήση της συσκευής ή σφάλματα εγκατάστασης.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν ο αριθμός του μητρώου έχει μετακινηθεί, σβηστεί ή φθαρεί.

Τα προϊόντα που θεωρούνται με βλάβη πρέπει να αλλαχτούν αποκλειστικά και μόνον στους μεταπωλητές από τους οποίους έγινε η αγορά. Αποστολή δέματος κατ' ευθείαν σε μας θα απορριφθεί.



REF	28492-28493 28495-28499 Codice prodotto Product code
	Riparare da luce diretta Keep away from sunlight
	Teme l'umidità Keep dry
	Leggere le istruzioni Read instructions
CE	Prodotto conforme alla Direttiva Europea n.93/42/CEE (e successive modifiche) sui dispositivi medici Product complies with European Directive no. 93/42/CEE (and following amendments) on medical devices



FABBRICANTE/MANUFACTURER
GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy