


# HEEL PROTECTOR

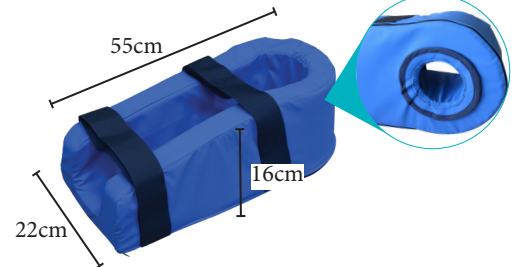

**Ref. 680 011** Αναφ. 680 011  
45\*10\*15 cm 150gr 45\*10\*15 εκ. 150 γρ.

**Ref. 680 008** Αναφ. 680 008  
22\*15.12 cm 90gr 22 \* 15,12 εκ. 90 γρ

**Ref. 680 010** Αναφ. 680 010  
22\*15.12 cm 90gr 22 \* 15,12 εκ. 90 γρ



110 kg

	FR	EN	DE	ES	
	Signification des symboles	Explanation of symbols	Zeichenerklärung	Explicación de los símbolos	
1	Dispositif Medical	Medical Device	Medizinprodukt	Dispositivo médico	
2	Lire le mode d'emploi avant l'utilisation.	Read the instruction manual before use	Vor Gebrauch Gebrauchsanweisung lesen!	Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo	
3	Respecter les instructions de sécurité!	Observe the safety instructions!	Sicherheitshinweise beachten!	Siga las instrucciones de seguridad	
4	Conformité CE	CE conformity	CE-Konformität	Conformidad con la normativa CE	
	PT	PL	HU	TR	
	Significado dos símbolos	Objaśnienia symboli	Szimbólumok jelentése	Sembollerin açıklamaları	
1	Dispositivo médico	Wyrób medyczny	Orvosi eszköz	Tıbbi cihaz	
2	Antes de utilizar, leia, por favor, o manual.	Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót	Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz	
3	Siga as instruções de segurança	Stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa.	Tartsa be a biztonságai utasításokat!	Güvenlik uyarılarını dikkate alınız	
4	Certificado CE	Deklaracja CE	CE megfeleléség	CE uygunluğu	
	IT	NL	SI	HR	GR
	Significato dei simboli	Verklaring van de symbolen	Pomen simbolov	Objašnjenje simbola	Επεξήγηση Συμβόλων
1	Dispositivo Medico	Medisch hulpmiddel	Medicinski pripomoček	Medicinski uređaj	Ιατρική Συσκευή
2	Prima dell'uso leggere le relative istruzioni!	Voor gebruik de handleiding lezen.	Pred uporabo preberite navodila	Pročitati korisničke upute prije uporabe	Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση
3	Osservare le istruzioni per la sicurezza	Veiligheidsinstructies respecteren	Upošteevajte varnostna navodila!	Pažljivo pogledajte sigurnosne upute	Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας!
4	CE conformità	CE conformiteit	CE Certifikat	CE-Deklaracija	CE Συμμόρφωση

**GR**-Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες και φυλάξτε τις προσεκτικά!

### 1. Οδηγίες ασφαλείας

- ♥ Να συμβουλευέστε πάντοτε τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπό σας για να ρυθμίσετε το ιατροτεχνολογικό προϊόν και για να μάθετε πώς να το χρησιμοποιείτε σωστά.
- ♥ Να μην φυλάσσεται σε εξωτερικό χώρο, να μην αφήνεται εκτεθειμένο στον ήλιο (Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να μην αφήνεται στο εσωτερικό αυτοκινήτου, απευθείας εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία!)
- ♥ Πρέπει να αποφεύγονται οι υγροί χώροι αποθήκευσης.
- ♥ Η βάση πτέρνας πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα για να αποφεύγεται τυχόν διάτρηση ή σχίσιμο.
- ♥ Ελέγξτε τη σταθερότητα της βάσης πτέρνας και τη σωστή τοποθέτησή της, ειδικά σε αναπηρική καρέκλα.
- ♥ Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (ανώτερες των 38°C ή 100°F ή κατώτερες των 0°C ή 32°F).
- ♥ Δεν πρέπει να τροποποιείτε ούτε να επισκευάζετε αυτό το προϊόν.
- ♥ Τηρείτε το όριο βάρους που υποδεικνύεται για κάθε προϊόν.
- ♥ Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης: Δεν πρέπει να γονατίζετε ή στέκεστε όρθιος/α επάνω στη βάση πτέρνας.
- ♥ Σε περίπτωση που δεν έχετε χρησιμοποιήσει το ιατροτεχνολογικό προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο αντιπρόσωπό από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν για έλεγχο του.
- ♥ Αυτό το ιατροφαρμακευτικό προϊόν έχει συνταγογραφηθεί από το γιατρό σας, ακολουθήστε τις οδηγίες της: διάρκεια και συχνότητα χρήσης.
- ♥ Σε περίπτωση δυσφορίας, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
- ♥ Αν παρατηρήσετε ερυθρότητα στο δέρμα σας, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- ♥ Αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά και αιχμηρά αντικείμενα, ώστε να μην καταστραφεί η βάση πτέρνας.

### 2. Ένδειξη

Είναι ευκολότερη η αποφυγή ελκών πίεσης από τη θεραπεία τους. Η εμφάνιση εξελκώσεων είναι το αποτέλεσμα υποξίας ιστού (έλλειψη παροχής οξυγόνου) που προκαλείται από την άσκηση υπερβολικής και παρατεταμένης πίεσης. Η εμφάνιση ελκών πίεσης μπορεί να αποφευχθεί αλλάζοντας συχνά τη θέση του ασθενούς για να αποφευχθεί η υπερβολική πίεση σε ευαίσθητες περιοχές, ειδικά στις περιοχές όπου τα οστά προεξέχουν (ιερό οστό, πτέρνα).

Είναι επίσης σημαντικό να εφαρμόζονται άλλες αρχές: να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής του δέρματος και να αποφεύγεται η εμπότιση, να παρακολουθείται καθημερινά η κατάσταση του δέρματος, να ακολουθείται η κατάλληλη διατροφή. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλα υποστηρίγματα πρόληψης όπως η βάση πτέρνας για να μειώσετε την πίεση στις ευαίσθητες περιοχές και τοποθετήστε σωστά τον ασθενή στην καρέκλα ή στο υπνοδωμάτιό του, αποφεύγοντας την ανάπτυξη ελκών πίεσης.

- Πρόληψη των ελκών πίεσης της πτέρνας, μετεχειρητικά.

### 3. Περιγραφή και χρήση του προϊόντος

#### Κωδικός 680010

Οι βάσεις πτέρνας είναι κατασκευασμένες από κοίλες ίνες με επικάλυψη σιλικόνης από 100% πολυεστέρα, η ολίσθηση μεταξύ των ινών αποτρέπει τη διάτμηση του υλικού και των ιστών. Η κοίλη δομή των ινών καθιστά δυνατή την καλή κυκλοφορία αέρα. Οι βάσεις πτέρνας καλύπτονται από 100% ύφασμα PU. Είναι στερεωμένα με αυτοσυγκρατούμενες συνδετήρες

#### Κωδικός 680008

Οι βάσεις πτέρνας της εταιρείας μας είναι ιδανικές για ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο ελκών πίεσης και χαμηλό κίνδυνο τριβής. Προσφέρουν ζέστη και άνεση στην πτέρνα, ενώ καθιστούν δυνατή την καλή κυκλοφορία του αέρα και στο πόδι να αναπνέει. Κλείνουν με βέλκρο.

#### 4. Συντήρηση

##### Κωδικός 680010:

Πλένεται στο πλυντήριο με κρύο νερό. Στεγνώστε το σε οριζόντια θέση, μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Δεν πρέπει να σιδερώνεται, να υποβάλλεται σε στεγνό καθάρισμα, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων χλωρίου και η αποστείρωση σε αυτόκαυτο.

##### Κωδικός 680008

Πλένεται στο πλυντήριο στους 40°C. Στεγνώστε το σε οριζόντια θέση, μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Δεν πρέπει να σιδερώνεται, να υποβάλλεται σε στεγνό καθάρισμα, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων χλωρίου και η αποστείρωση σε αυτόκαυτο.

#### 5. Υλικά

Κωδικός 680010

100% κοίλες ίνες με επικάλυψη σιλικόνης και κάλυμμα πολυουρεθάνης.

Κωδικός 680008-Πολυεστέρας 100%

#### 6. Διαχείριση αποβλήτων

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

#### 7. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το προϊόν διαθέτει εγγύηση διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος. Αυτό το προϊόν είναι βιοσυμβατό.

Συμμορφώνεται με το εξής πρότυπο: CE