



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## **SPECCHI FRONTALI LUX LUX FOREHEAD MIRRORS MIROIRS FRONTAUX LUX STIRNSPIEGEL FRONTALI LUX ESPEJOS FRONTALES LUX ESPELHOS FRONTAIS LUX ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ LUX LUX**

## مرايا جبين

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زدنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها

**REF 808-706-30 (Gima 31107) - 808-714-06 (Gima 31108) - 808-702-06 (Gima 31109) - 808-722-00 (Gima 31110) - 808-720-00 (Gima 31111)**



Medical Devices (Pvt) Ltd  
Wazirabad Road, Ugoki Sialkot. Pakistan  
Made in Pakistan



Obelis s.a. Bd Général Wahis 53  
B-1030 Brussels, Belgium



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



## Χαρακτηριστικά

Τα κάτοπτρα μετώπου ORL είναι τοπικές συσκευές φωτισμού με πρόσθιο φωτεινό κάτοπτρο και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την εξέταση της στοματικής κοιλότητας, της μύτης και του αυτιού. Τα προϊόντα διαθέτουν κάτοπτρα από ειδικό εμαγιέ γυαλί και ένα ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής, πρακτικό και προσαρμόσιμο στο κεφάλι του χειριστή.

Τα διαθέσιμα μοντέλα είναι τα ακόλουθα:

31107 Εμπρόσθιο κάτοπτρο LUX 100 (LED) μπαταρίας (2 x 3V CR-123A) - Ø 100 mm - 3V

31108 Εμπρόσθιο κάτοπτρο LUX 55 μπαταρίας (2 x 3V CR-123A) - Ø 55 mm - 6V

31109 Εμπρόσθιο κάτοπτρο LUX 100 μπαταρίας (2 x 3V CR-123A) - Ø 100 mm - 6V

31110 Εμπρόσθιο κάτοπτρο LUX 55 - Ø 55 mm - 6V

31111 Εμπρόσθιο κάτοπτρο LUX 100 - Ø 100 mm - 6V

Τα πακέτα περιλαμβάνουν ένα κάτοπτρο με ιμάντα κεφαλής, μια λυχνία 6 volt, 3 Volt (LED), ένα καλώδιο τροφοδοσίας και ένα τροφοδοτικό ή μια μπαταριοθήκη (ανάλογα με το μοντέλο).

## Κανόνες ασφαλείας



*Τα κάτοπτρα είναι πολύ ευαίσθητα και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά.*

Το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση από πλευράς προσοντούχου ιατρικού προσωπικού.



*Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν ανιχνεύσετε ζημιές. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.*



*Αποφύγετε οποιαδήποτε πρόχειρη επιδιόρθωση. Οι επιδιορθώσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά που εγκαθίστανται κατά την προβλεπόμενη χρήση. Η λυχνία και το κάτοπτρο, αν σπάσουν, μπορεί να τραυματίσουν ή να κόψουν. Χειριστείτε με προσοχή και αντικαταστήστε άμεσα.*

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που απαιτούνται για την κανονική χρήση και δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο θα πρέπει να το κρατήσει σε ένα κλειστό περιβάλλον, αποφεύγοντας την έκθεση στο φως και τις καιρικές συνθήκες, φροντίζοντας να το προστατεύεται από τη σκόνη για να διασφαλίζονται οι όροι υγιεινής. Επίσης, προτείνεται να αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος που μπορεί εύκολα να ανακτηθεί από τους χειριστές σε περίπτωση ανάγκης.

## ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



*Υπενθυμίζουμε ότι το υλικό συσκευασίας (χαρτί, σελοφάν, συνδετήρες, κολλητική ταινία, κλπ..) μπορούν να κόψουν ή/και να τραυματίσουν αν δεν τα χειριστείτε με προσοχή. Θα πρέπει να αφαιρεθούν με κατάλληλα βοηθητικά μέσα και να μην αφεθούν ανεξέλεγκτα σε μη υπεύθυνα άτομα. Το ίδιο ισχύει και για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των υλικών συσκευασίας (ψαλίδια, μαχαίρια, κλπ ...).*


Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε μόλις ανοίξετε τη συσκευασία, είναι μια γενική επιθεώρηση των τεμαχίων που συνθέτουν το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι είναι παρόντα όλα τα εξαρτήματα και ότι βρίσκονται σε τέλεια κατάσταση.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Πριν από τη χρήση του προϊόντος, μπορείτε να προσαρμόσετε το στηρικτικό κεφαλής στις διαστάσεις του κεφαλιού, χρησιμοποιώντας τη βίδα ρύθμισης στο πίσω μέρος που σας επιστρέφει να σφίξετε ή να χαλαρώσετε τον ιμάντα σύσφιξης κεφαλής.
- Το προϊόν είναι διαθέσιμο με δυο διαμέτρους κατόπτρων, 100 mm και 55 mm.
- Το προϊόν είναι διαθέσιμο σε έκδοση με τροφοδοτικό εξωτερικό ή σε έκδοση με μπαταριοθήκη

- Με το προϊόν σωστά εγκατεστημένο και την λυχνία ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η ρύθμιση της φωτεινής δέσμης απομακρύνοντας ή προσεγγίζοντας την λυχνία από το κατόπτρο.


### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

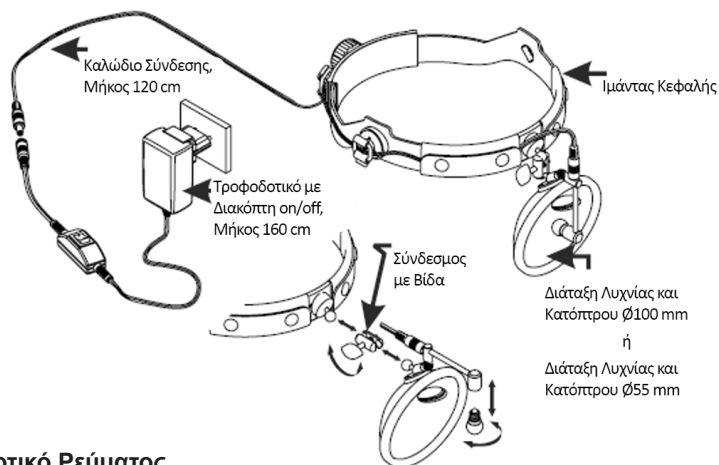

#### Συσκευή με Τροφοδοτικό Ρεύματος

- Τροφοδοτικό (220/110V) Έξοδος (όπως απαιτείται) V, 1.0A.
- Καλώδιο Σύνδεσης για Ιμάντα Κεφαλής, Μήκος 120 cm
- Ανταλλακτικός Σύνδεσμος με Βίδα.
- Ανταλλακτικός Ανοιχτός Ιμάντας Κεφαλής για Φωτισμό Κεφαλής Clear.
- Διάταξη Λυχνίας και Κατόπτρου, (Διάμετρος κατόπτρου όπως απαιτείται)


### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΟΘΗΚΗ

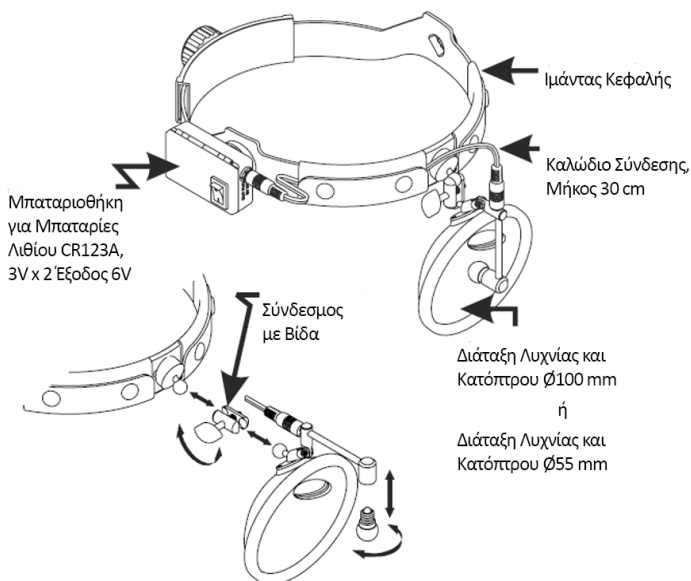

### Συσκευή με Μπαταριοθήκη Προσαρμοσμένη στον Ιμάντα Κεφαλής

- Μπαταριοθήκη CR 123 (6VDC) Έξοδος.
- Καλώδιο Σύνδεσης για Ιμάντα Κεφαλής, Μήκος 30 cm
- Ανταλλακτικός Σύνδεσμος με Βίδα.
- Ανταλλακτικός Ανοιχτός Ιμάντας Κεφαλής για Φωτισμό Κεφαλής Clar.
- Διάταξη Λυχνίας και Κατόπτρου, (Διάμετρος κατόπτρου όπως απαιτείται)

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (LED) ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΟΘΗΚΗ

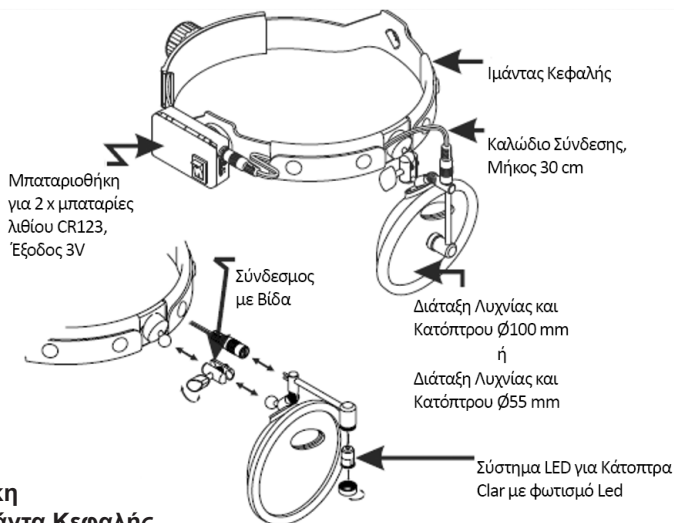

### Συσκευή με Μπαταριοθήκη Προσαρμοσμένη στον Ιμάντα Κεφαλής

- Μπαταριοθήκη CR 123 (3V DC) Έξοδος.
- Καλώδιο Σύνδεσης για Ιμάντα Κεφαλής, Μήκος 30 cm
- Ανταλλακτικός Σύνδεσμος με Βίδα.
- Σύστημα LED για Κάτοπτρα Clar.
- Ανταλλακτικός Ανοιχτός Ιμάντας Κεφαλής για Φωτισμό Κεφαλής Clar.
- Διάταξη Λυχνίας και Κατόπτρου, (Διάμετρος κατόπτρου όπως απαιτείται)

Με το προϊόν σωστά εγκατεστημένο και τη λυχνία ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η αύξηση ή μείωση της διαμέτρου της φωτεινής δέσμης απομακρύνοντας ή πλησιάζοντας τη λυχνία στο κάτοπτρο.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει μια ζωή. Είναι ανθεκτικό στις περισσότερες χημικές ουσίες, εκτός από τις κετόνες MEK.

- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά υλικά για τον καθαρισμό του κατόπτρου, διότι μπορεί να προκληθούν μόνιμες ζημιές. Πριν από την αφαίρεση της λυχνίας, βεβαιωθείτε ότι έχουν παρέλθει μερικά λεπτά από την απενεργοποίηση του εργαλείου για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος.
- Το στήριγμα κεφαλής καθαρίζεται με κρύο νερό και απολυμαντικό χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι.
- Για τον καθαρισμό του κατόπτρου χρησιμοποιήστε κατάλληλο καθαριστικό γυαλιού και βαμβακερό πανί

	Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)		Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον		Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		Διάθεση WEEE
	Παραγωγός		Κωδικός προϊόντος		Αριθμός παρτίδας
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		Εισαγωγή από		Ημερομηνία παραγωγής
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση				



**ΧΩΝΕΥΣΗ:** Το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τες σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

#### ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.