



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CASCHETTO 2 LED CON 5 LENTI

**2 LED HEADBAND ILLUMINATED MAGNIFIER
WITH 5 LENSES**

**LOUPE LUMINEUSE FRONTALE 2 LED
AVEC 5 LENTILLES**

LUPA ILUMINADA FRONTAL 2 LED CON 5 LENTES

**LUPA COM FAIXA DE CABEÇA, ILUMINADA
POR 2 LED, COM 5 LENTES**

2-LED-KOPFBANDLUPE MIT 5 LINSEN

**2 PANNBAND FÖRSTORINGSGLAS MED LED-LJUS
MED 5 LINSER**

**ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ
2 LED με 5 φακούς**

REF MG8001-H (GIMA 31168)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante /
Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Tillverkare
NINGBO ANMAS OPTOELECTRONIC CO., LTD
A-1507, Sunshine International, Yuyao, Zhejiang, China
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/
Importiert von/ Importado por/ Importado por/
Εισάγεται από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com


CE



ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ 2 LED ΜΕ 5 ΦΑΚΟΥΣ

(Με φορητό αποσπώμενο φωτισμό LED και 11 τύπους μεγέθυνσης)


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον πολυλειτουργικό μεγεθυντικό φακό κεφαλής διπλής ρύθμισης που αποτελεί νέα πατέντα! Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το ψάρεμα, το διάβασμα, την κηπουρική, τη μηχανική επεξεργασία, την ηλεκτρονική συντήρηση, κτλ. Για τη σωστή του χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες.

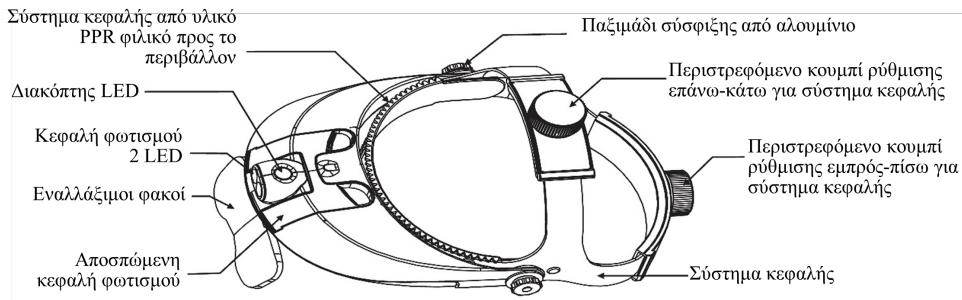


Κύρια χαρακτηριστικά:

1. Οι κοινοί μεγεθυντικοί φακοί κεφαλής διαθέτουν απλώς ρύθμιση του συστήματος εμπρός-πίσω. Η παρατεταμένη χρήση ενός μεγεθυντικού φακού κεφαλής μπορεί να προκαλέσει πίεση στα αυτιά με αποτέλεσμα να πονάνε. Το συγκεκριμένο σύστημα κεφαλής διαθέτει δυνατότητα διπλής ρύθμισης για την επίλυση του προαναφερθέντος προβλήματος.
2. Η δερματίνη επένδυση του συστήματος κεφαλής στους κοινούς μεγεθυντικούς φακούς κεφαλής είναι κατασκευασμένη από τεχνητό δέρμα PVC, το οποίο σκληραίνει εύκολα τον χειμώνα λόγω κρύου ενώ το καλοκαίρι δεν αφήνει να διαπερνά ο αέρας, προκαλώντας συνεπώς δυσφορία. Η επένδυση του συστήματος κεφαλής του συγκεκριμένου προϊόντος είναι κατασκευασμένη από υλικό PPR φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ ο ημισφαιρικός σχεδιασμός της επιφάνειάς του το καθιστά αεροδιαπερατό και άνετο. Επίσης, η επένδυση του συστήματος κεφαλής δεν έχει κοφτερές άκρες.
3. Οι κοινοί μεγεθυντικοί φακοί κεφαλής διαθέτουν μόνο τέσσερις εναλλάξιμους φακούς. Ο συγκεκριμένος ωστόσο μεγεθυντικός φακός κεφαλής διαθέτει πέντε φακούς (με διαφορετικά επίπεδα μεγέθυνσης), οι οποίοι εξασφαλίζουν συνολικά 11 διαφορετικούς τύπους μεγέθυνσης και ευρύτερο φάσμα εφαρμογής.


Τρόπος χρήσης της φορητής αποσπώμενης κεφαλής φωτισμού:

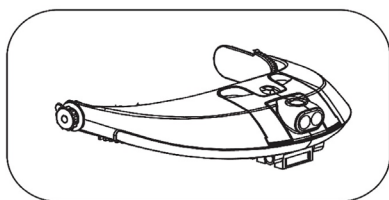


Μπορείτε πλέον να περιστρέψετε τη βάση στήριξης των LED πάνω-κάτω;

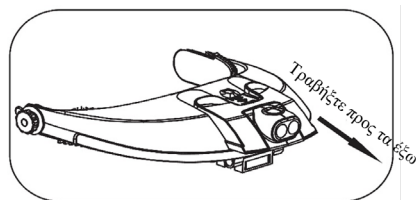

Η κεφαλή φωτισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά ως μέσο φωτισμού αφού πρώτα την αποσυνδέσετε

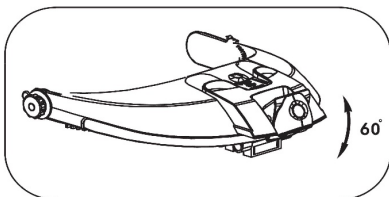

Μπορείτε πλέον να περιστρέψετε τη βάση στήριξης των LED πάνω-κάτω;

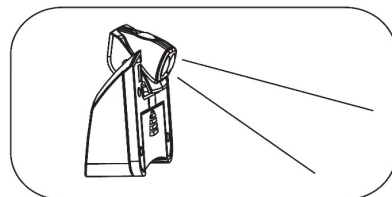

Η κεφαλή φωτισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά ως μέσο φωτισμού αφού πρώτα την αποσυνδέσετε.

Τοποθέτηση και αφαίρεση φακών:

1. Τοποθέτηση φακών


(1) Σκουπίστε την επιφάνεια των φακών με ένα καθαρό απαλό χαρτί ή πανί ώστε να μην προκληθούν γρατζουνιές στην επιφάνεια των φακών;

(2) Τοποθετήστε την κυρτή επιφάνεια των φακών προς τα έξω και την επίπεδη επιφάνεια προς τα μάτια;


(3) Εισάγετε απλώς τη μία πλευρά των φακών (με την τοξωτή επιφάνεια) προς τα κάτω, μέσα στην οπή εισαγωγής των φακών.

2. Αφαίρεση φακών: επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία εκτελώντας τα βήματα με αντίστροφη σειρά.

3. Κατά τη συχνή τοποθέτηση και αφαίρεση των φακών, τοποθετείτε και αφαιρείτε πάντα παράλληλα τους φακούς. Διαφορετικά, το επάνω μέρος των φακών ενδέχεται να υποστεί ζημιά εάν η τοποθέτησή τους γίνεται τυχαία.

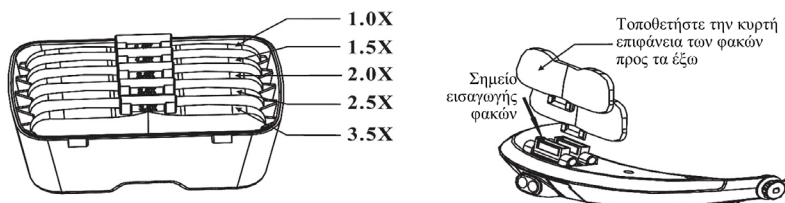


Φακοί με 5 τύπους μεγέθυνσης:

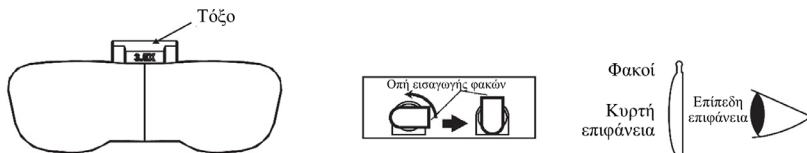


Τρόπος ρύθμισης του συστήματος κεφαλής:


1. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης μεγέθους κεφαλιού (A) για να προσαρμόσετε το σύστημα στο μέγεθος του κεφαλιού σας.
2. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης επάνω-κάτω (B) για να προσαρμόσετε το ύψος του συστήματος κεφαλής.
3. Με το παξιμάδι σύσφιξης από αλουμίνιο (C) μπορεί να ρυθμιστεί επάνω-κάτω η θέση των φακών.

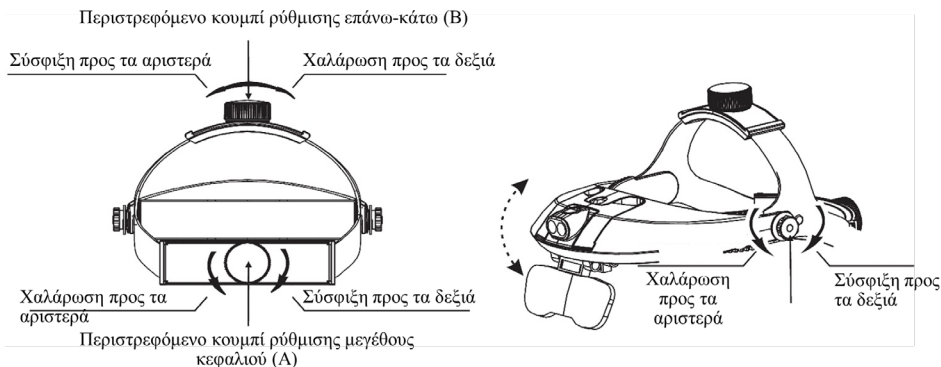

Αντικατάσταση φακών:

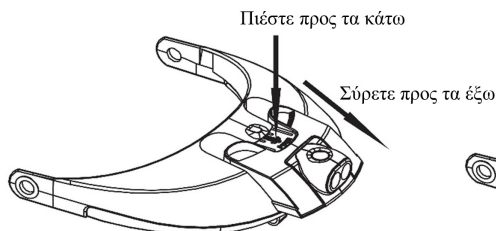


Πιέστε τον σύνδεσμο με την ένδειξη PUSH και σύρετε την κεφαλή φωτισμού προς τα έξω

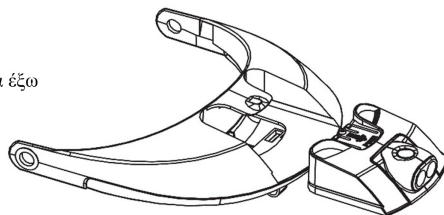

Αφαιρέστε την κεφαλή φωτισμού

Σύρετε το καπάκι των μπαταριών προς τα έξω

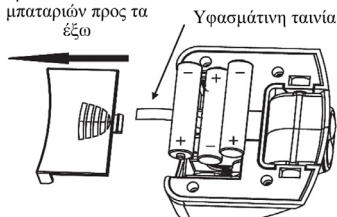

1. Η διαρροή της μπαταρίας, η υπερθέρμανση και η εμφάνιση ρωγμών αποτελούν αιτίες που προκαλούν δυσλειτουργία και ζημιά στα LED;

2. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες με διαφορετικός μέγεθος, σχήμα και απόδοση;

3. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες όταν ο φωτισμός LED δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα

Σύρετε το καπάκι των μπαταριών προς τα έξω σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους, τραβήξτε την υφασμάτινη ταινία προς τα επάνω για να αφαιρέσετε τις 3 παλιές μπαταρίες και έπειτα τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες

Τιμές μεγέθυνσης	Απόσταση από αντικείμενο
1.0x	300~350 mm
1.5x	240~260 mm
2.0x	215~235 mm
2.5x	205~225 mm
3.0x	160~180 mm
3.5x	135~145 mm
4.0x	125~135 mm
4.5x	110~130 mm
5.0x	100~120 mm
5.5x	80~95 mm
6.0x	60~85 mm

Μεγέθυνση φακών:









1. Οι φακοί μεγέθυνσης μονής πλάκας είναι 1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.5X.
2. Οι φακοί μεγέθυνσης διπλής πλάκας είναι 3.0X, 4.0X, 4.5X, 5.0X, 5.5X, 6.0X.
3. Η τιμή της μεγέθυνσης αναγράφεται στο κέντρο των φακών.
4. Ο πίνακας στα δεξιά αναφέρει την αναλογία της απόστασης μεταξύ των φακών μεγέθυνσης και των αντικειμένων στα οποία εστιάζετε

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών



ΧΩΝΕΥΣΗ: Το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τις σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

	<p>IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnings) sorgfältig lesen SV - Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενοστάσεις)</p>
	<p>IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode SV - Produktkod GR - Κωδικός προϊόντος</p>
	<p>IT - Numero di lotto GB - Lot Number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer SV - Satsnummer GR - Αριθμός παρτίδας</p>
	<p>IT - Data di fabbricazione GB - Date of Manufacturing FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstellungsdatum SV - Tillverkningsdatum GR - Ημερομηνία παραγωγής</p>
	<p>IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco PT - Armazenar em local fresco e seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern SV - Förvara på svalt och torrt ställe GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον</p>
	<p>IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern SV - Skyddas från solljus GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία</p>
	<p>IT - Smaltimento RAEE GB - WEEE disposal FR - Disposition DEEE ES - Disposición WEEE PT - Disposición WEEE DE - Beseitigung WEEE SV - Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) GR - Διάθεση WEEE</p>
	<p>IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea GB - Product complies with European Directive FR - Ce produit est conforme à la directive européenne ES - Producto conforme a la Directiva Europea PT - Produto em conformidade com a Diretiva Europeia DE - Produkt gemäß EU-Richtlinie SV - Produkt som överensstämmer med EU-direktiv GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία</p>