




# GIMA

## HEAD LOUPE

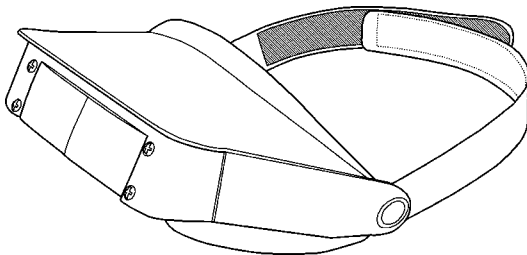

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE**  
**USE AND MAINTENANCE BOOK**  
**INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN**  
**BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN**  
**MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**  
**MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO**  
**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**  
**دليل الإستعمال والرعاية**

**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

**ACHTUNG:** Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.

**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

**ATENÇÃO:** Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

**الحتر:** على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستعمال المنتج.

CE





**GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia**

**ITALIA:** Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

**INTERNATIONAL:** Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

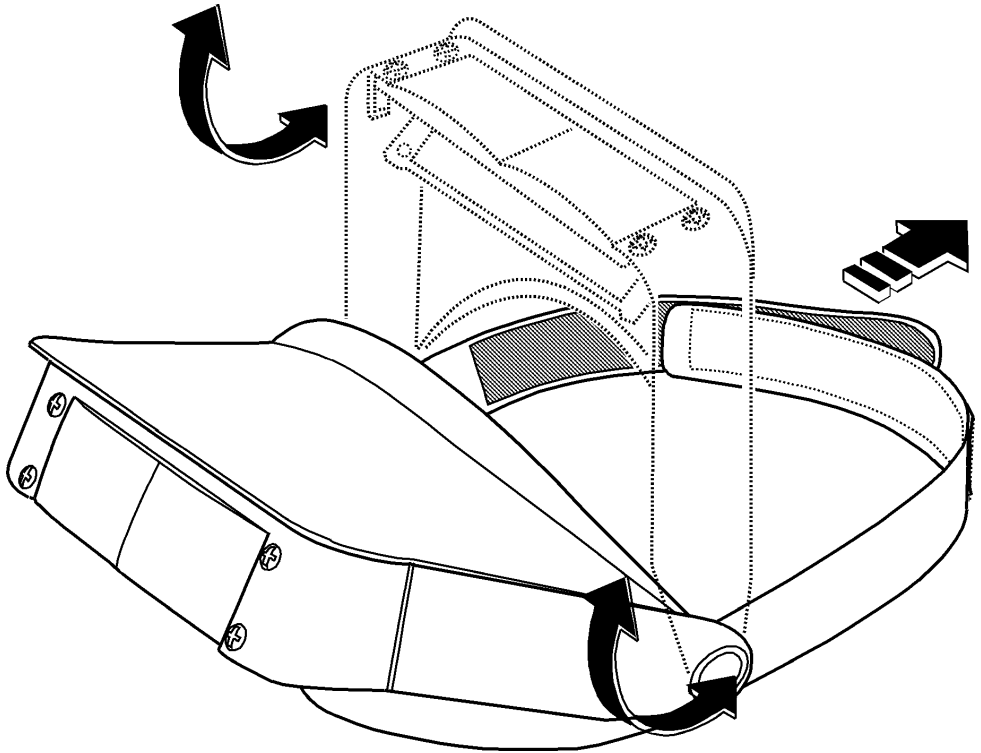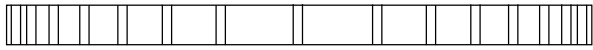



A garantia é anulada se o numero de matriculação for cancelado ou alterado.  
Os produtos considerados defeituosos devem ser devolvidos só e somente ao revendedor onde se comprou o aparelho. O envio do aparelho directamente à nós será rejeitado.



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

Το Head Loupe είναι ένας ειδικός τύπος συσκευής που πραγματοποιεί μεγεθύνσεις ακριβείας. Για τα χαρακτηριστικά της χρησιμοποιείται και από άτομα που συνήθως φορούν φακούς, σε εναπόθεση αυτών. Το Head Loupe επιτρέπει δύο τύπους μεγέθυνσης: 2,2 X εάν χρησιμοποιεί το πρώτο σύστημα των φακών και 3,3 X εάν εναποτίθεται το δεύτερο σύστημα. Η ονομαστική αξία της μεγέθυνσης είναι ενδεικτική και όχι απόλυτη. Είναι επίσης εροδιασμένη με ένα κούμπωμα από velcro που ρυθμίζεται και από μια εύχρηστη προσωπίδα κατά της αντανάκλασης. Η συσκευή, ή έστω και μέρη της, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παρόν εγχειρίδιο.

### ΕΝΤΟΛΕΣ

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την χρήση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, σε ιατρεία. Δεν προορίζεται για την χρήση σε χειρουργεία.



*Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για την κατ' ευθεία παρατήρηση του ήλιου ή άλλων πηγών φωτός!*

*Μη κρατάτε την εστιακή απόσταση των φακών με σκοπό να προκαλέσετε την μη εστίαση της εικόνας η οποία μπορεί να επιφέρει οπτική κόπωση.*

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί από υλικά ανθεκτικά στην διάβρωση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που προβλέπονται για την κανονική της χρήση, δεν χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή: παρόλα αυτά θα πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστό περιβάλλον και να μην παραμένει εκτεθειμένη στο φως και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, όπως επίσης θα πρέπει να φυλάσσεται και από τις σκόνες, έτσι ώστε να βρίσκεται πάντα κάτω από υγιεινές συνθήκες. Συνιστούμε επίσης να διατηρείτε το προϊόν σε μέρος τέτοιο ώστε ο χρήστης να μπορεί να το βρει εύκολα σε περίπτωση ανάγκης.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σαν πρώτη ενέργεια σταματήστε την μεγέθυνση με τις ζώνες του velcro του κουμπώματος και κατόπιν ρυθμίστε την απόκλιση του οπτικού γκρούπ. Εάν υπάρχει ανάγκη είναι δυνατόν να την αναποδογυρίσετε 90° πάνω από το μέτωπο.( κοιτάζτε την εικόνα) .



*Βεβαιωθείτε ότι οι άξονες που κρατούν τον μεγεθυντή δεν είναι ξελασκαρισμένοι.*

Για μια σωστή χρήση, εντοπίστε την εστιακή απόσταση σε σχέση με το αντικείμενο που θέλετε να μεγαλώσετε πλησιάζοντας σιγά-σιγά μέχρι να το δείτε το δυνατόν καθαρότερα. Σε σχέση με τις ατομικές ανάγκες, είναι δυνατόν να διαλέξετε ( δείτε την εικόνα) μεταξύ της μεγέθυνσης 2,2 X ( δεύτερος φακός που σηκώθηκε) ή 3,3 X ( δεύτερος φακός που χαμήλωσε), η εστιακή απόσταση αλλάζει ανάλογα με την λύση που διαλέξατε.



*Χρησιμοποιείτε την μηχανή πάντα στην εστιακή απόσταση και όχι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.*



## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για μια σωστή χρήση του γυαλιού καθαρίστε το με μαλακά πανιά που δεν προκαλούν γρατζουνιές και με συνήθη απορρυπαντικά για τα τζάμια αρκεί να μη είναι δυνατά. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Για την απολύμανση είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε ένα απολυμαντικό υγρό. Το προϊόν δεν αποστειρώνεται σε συσκευή αποστείρωσης. Το προϊόν διατηρείται σε περιβάλλον χωρίς οργανικούς ατμούς σε μια θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ των 5° C και +30° C .

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα συγχαρητήριά μας για την εκλογή σας να αποκτήσετε ένα δικό μας προϊόν . Αυτό το προϊόν απαντάει στους πιο απαιτητικούς κανόνες των υλικών ποιότητας κατασκευής και του τελικού ελέγχου. Η εγγύηση έχει ισχύ για το χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του εφοδιασμού GIMA. Κατά την διάρκεια της ισχύς της εγγύησης θα φροντίσουμε για την διόρθωση και / ή την δωρεάν αντικατάσταση όλων των κομματιών με βλάβη εξ αιτίας της κατασκευής αφού διαπιστωθεί αυτό, εκτός από τα έξοδα του τεχνικού, μετάβαση εκτός έδρας, έξοδα μεταφοράς , συσκευασίας κ.λ.π. Είναι λοιπόν εκτός εγγύησης τα στοιχεία που υπόκεινται σε φθορά όπως τα μέρη με καουτσούκ ή PVC, καθέτηρες ντόπλερ, τα αισθητήρια SpO2, λάμπες, μπαταρίες, ηλεκτροδία, χούφτα, λαστιχάκια, αντιστάσεις και άλλα ακόμη. Καμία αποζημίωση δεν θα πρέπει να απαιτηθεί για την στάση της συσκευής. Επί πλέον η αντικατάσταση ή η διόρθωση κατά την διάρκεια της εγγύησης δεν μπορεί να μεγαλώσει τον χρόνο εγγύησης.



*Η εγγύηση δεν έχει ισχύ σε περίπτωση που: η διόρθωση έγινε από την μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από ανταλλακτικά μη αναγνωρισμένα από την GIMA , αβαρίες ή ατέλειες που προκλήθηκαν από αμέλεια, χτυπήματα, μη σωστή χρήση της συσκευής ή σφάλματα εγκατάστασης.*

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν ο αριθμός του μητρώου έχει μετακινηθεί, σβηστεί ή φθαρεί. Τα προϊόντα που θεωρούνται με βλάβη πρέπει να αλλαχτούν αποκλειστικά και μόνον στους μεταπωλητές από τους οποίους έγινε η αγορά. Αποστολή δέματος κατ' ευθείαν σε μας θα απορριφθεί.