



# Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M



en	English	pp. 1	sl	Slovenski	pp. 33
fr	Français	pp. 3	et	Eesti	pp. 35
de	Deutsch	pp. 5	lv	Latviesu	pp. 37
it	Italiano	pp. 7	lt	Lietuviskai	pp. 39
es	Español	pp. 9	ro	Romana	pp. 41
nl	Nederlands	pp. 11	hr	Hrvatski	pp. 43
sv	Svenska	pp. 13	bg	Български	pp. 45
da	Dansk	pp. 15			
no	Norsk	pp. 17			
fi	Suomi	pp. 19			
pt	Português	pp. 21			
el	Ελληνικά	pp. 23			
pl	Polski	pp. 25			
hu	Magyar	pp. 27			
cs	Čeština	pp. 29			
sk	Slovensky	pp. 31			

# 3M™ Littmann® CORE Ψηφιακό Στηθοσκόπιο

## Οδηγός γρήγορης έναρξης

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Eko από το Apple App Store® ή το Google Play Store®.

Ενεργοποιήστε την Ασύρματη Τεχνολογία Bluetooth® στο τηλέφωνο ή το tablet σας, πραγματοποιήστε εκκίνηση της εφαρμογής και ενεργοποιήστε το CORE στηθοσκόπιο.


Eko

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Eko CORE Ψηφιακό Προσάρτημα και 3M™ Littmann® Cardiology IV™ Στηθοσκόπιο
- Πρόσθετο σετ 3M Μαλακές ελιές ακουστικών (μικρές)
- Περιβλήμα δακτυλίου που δεν παγώνει τον ασθενή
- Καλώδιο φόρτισης USB
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

## Ελιές ακουστικών

Εισαγάγετε τις ελιές των ακουστικών με πρόσθια κατεύθυνση.

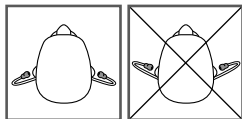

## Ένταση

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (+) και (-) για να ρυθμίσετε την ένταση. Υπάρχουν 7 βήματα αύξησης/μείωσης της έντασης.

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Όταν το στηθοσκόπιο CORE είναι απενεργοποιημένο, λειτουργεί ως μη ενισχυμένο στηθοσκόπιο.

Για να ενεργοποιήσετε το στηθοσκόπιο CORE, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης. Η φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοβλίνει. Πλέον θα ακούτε ενισχυμένους και φιλτραρισμένους ήχους στις ελιές.

## Δυνατότητες τηλειατρικής και τεχνητής νοημοσύνης

Η Eko προσφέρει δυνατότητες τηλειατρικής και τεχνητής νοημοσύνης που απαιτούν συνδρομή σε λογισμικό (όπου διατίθεται, πωλείται ξεχωριστά).

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συνδρομή σας ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [ekohealth.com](http://ekohealth.com).

## Ενεργή ακύρωση θορύβου

Το στηθοσκόπιο CORE διαθέτει ενεργή ακύρωση θορύβου για αφαίρεση του περιβαλλοντικού θορύβου. Η ενεργή ακύρωση θορύβου μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Eko.



## Ειδοποιήσεις

( ) (αναβοβλίνει)

● (κίτρινο)

( ) (κίτρινο)

Το στηθοσκόπιο CORE είναι ενεργοποιημένο και πραγματοποιεί αναζήτηση συσκευών

Το στηθοσκόπιο CORE είναι απενεργοποιημένο και φορτίζει

Το στηθοσκόπιο CORE διαθέτει χαμηλή στάθμη μπαταρίας

○

● (πράσινο)

( ) (μπλε)


Το στηθοσκόπιο CORE είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο

Το στηθοσκόπιο CORE είναι πλήρως φορτισμένο

Το στηθοσκόπιο CORE πραγματοποιεί εγγραφή

## Εγγραφή

Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην εφαρμογή Eko, πατήστε το κουμπί (o) για να ξεκινήσει η εγγραφή.

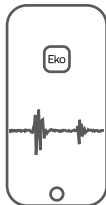

## Φόρτιση

Συνδέστε το καλώδιο micro USB στο στηθοσκόπιο CORE και χρησιμοποιήστε επιποίχιο φορτιστή USB 5V με πιστοποίηση UL ή σήμανση CE. Το στηθοσκόπιο CORE χρειάζεται περίπου 2 ώρες για πλήρη φόρτιση. Η φωτεινή ένδειξη γίνεται πράσινη όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

## Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το Littmann CORE Στηθοσκόπιο. Για να δείτε το εγχειρίδιο, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: [ekohealth.com/getstarted](http://ekohealth.com/getstarted)  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές 3M, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [HCBGRegulatory.3M.com](http://HCBGRegulatory.3M.com)

## Σέρβις και υποστήριξη

Στις ΗΠΑ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [littmann.com/service](http://littmann.com/service) ή τηλεφωνήστε στο 1-800-228-3957. Εάν βρίσκεστε εκτός των ΗΠΑ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [littmann.com](http://littmann.com) για να μάθετε τα στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού γραφείου της 3M.

el

To Apple App Store είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.  
To Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.  
To Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG  
LBL 143 Αναθ. Β

System assembled by 3M Company



**3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business

[www.littmann.com](http://www.littmann.com)



Made in USA with  
Globally Sourced Materials

 **3M Company**

2510 Conway Ave.  
St. Paul, MN 55144 USA

**MD**

**CE**

 **3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia


 **Eko Devices, Inc.**

1212 Broadway, Suite 100  
Oakland, CA 94612 USA

**MD**

**CE**

**0537**

 **Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.

Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11

34-8726-3344-0