



GIMA

**GUIDA RAPIDA DI PRONTO SOCCORSO
PALLONE RIANIMATORE PORTATILE**

***PORTABLE RESUSCITATOR BAG
FIRST AID BASIC GUIDE***

**BALLON DE RÉANIMATION PORTATIF
GUIDE RAPIDE DE PREMIER SECOURS**

***BALÓN REANIMADOR PORTÁTIL
GUÍA RÁPIDA DE URGENCIAS***

**BALÃO DE REANIMAÇÃO PORTÁVEL
GUIA RÁPIDA DE PRONTO SOCORRO**

***ΦΟΡΗΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
Γρήγορος οδηγός πρώτων βοηθειών***

**كرة مطاطية منعشة سهلة النقل
دليل سريع للإسعاف الأولي**

GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com


ΦΟΡΗΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

Γρήγορος οδηγός πρώτων βοηθειών




1-Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής είναι μακριά από πηγές κινδύνου: φωτιά, νερό, γκάζι, αναθυμιάσεις, ηλεκτρικά καλώδια σε τάση, κλπ.

2-Ελέγξτε τις αναπνευστικές οδούς να μην είναι φραγμένοι. Σε περίπτωση που υπάρχουν ξένα σώματα, νερό ή σάλιο, απομακρύνετε τα, χρησιμοποιώντας την σφήνα για το άνοιγμα του στόματος, τοποθετώντας της ανάμεσα στα δόντια του ασθενή, για να αποφύγετε πληγές στα δάκτυλα.

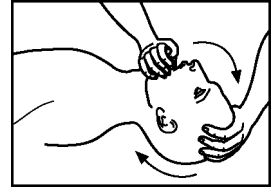

3-Τοποθετήστε το κεφάλι του ασθενή προς τα πίσω, πιέζοντας τα σαγόνια του προς τα επάνω, για να χαλαρώσετε τον λαιμό και να ανοίξετε τις αναπνευστικές οδούς.



4-Ελέγξτε εάν ο ασθενής αναπνέει και εάν το χρώμα της επιδερμίδας του επανέρχεται. Σε περίπτωση που έχει επανέλθει το χρώμα της επιδερμίδας και η αναπνοή, γυρίστε τον ασθενή στο πλάι ή μπρούμυτα ή ανάσκελα με τα πόδια ελαφρά υπερυψωμένα (τοποθετώντας τα πάνω σε αντικείμενο ή λυγίστε τα) έτσι ώστε το κεφάλι να βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο. Καλέστε γιατρό ή ασθενοφόρο.

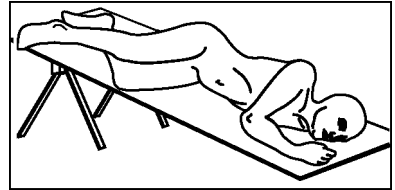


Σε περίπτωση που δεν επανέλθει η αναπνοή, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή χωρίς διακοπή, μέχρις ότου ο ασθενής να αναπνεύσει μόνος ή να έρθει γιατρός.

5-Τεχνητή αναπνοή με το μπαλόνι GIMA

Πιέστε την μάσκα στο πρόσωπο του ασθενή, σκεπάζοντας το στόμα και την μύτη. Κρατήστε το κεφάλι προς τα κάτω και με το χέρι που εφαρμόζετε την μάσκα, τραβήξτε τα σαγόνια προς τα εμπρός. Πιέστε όλο το μπαλόνι και ελέγξτε εάν ο θώρακας διαστέλλεται. Για να κρατήσετε ανοιχτές τις αναπνευστικές οδούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους αεραγωγούς, τοποθετώντας του κάτω από την μάσκα. Προσοχή να μην φραγούν οι αναπνευστικοί οδοί από την γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιήστε την λαβίδα έκτασης γλώσσας.

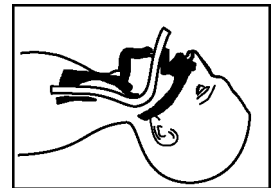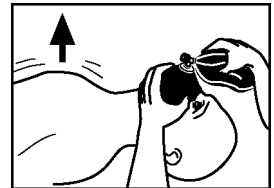

6-Μειώστε την πίεση στο μπαλόνι και περιμένετε να αδειάσει ο θώρακας. Επαναλάβετε ξανά την διαδικασία 10-20 φορές το λεπτό. Εάν διαθέτετε οξυγόνο, διοχετεύστε το μέσω της σχετικής σύνδεσης. Ελέξτε εάν υπάρχει σφυγμός, πιέζοντας ελαφρά με τα δάκτυλα στο πλάι του λαιμού. Εάν υπάρχει σφυγμός, συνεχίστε την τεχνητή αναπνοή μέχρι που ο ασθενής να αναπνεύσει αυτόνομα. Εάν δεν υπάρχει σφυγμός σημαίνει ότι δεν υπάρχει καρδιακή λειτουργία. Ενεργείστε επείγοντος, γιατί μετά από 4 λεπτά χωρίς παροχή οξυγόνου, ο εγκέφαλος θα υποστεί σοβαρές βλάβες.

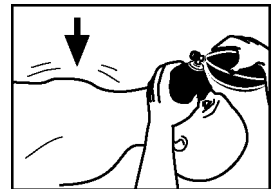

7-Σε περίπτωση καρδιακής προσβολής είναι απαραίτητη η εφαρμογή εξωτερικής πίεσης στην καρδιά. Πιέστε με δύναμη και με τα δυο χέρια, τοποθετώντας τα κάτω από τον θώρακα, στο μέρος της καρδιάς, 60 – 70 φορές το λεπτό. Κατά την διάρκεια εφαρμογής πίεσης πρέπει να ανιχνεύσετε τον παλμό στον λαιμό. ΠΡΟΣΟΧΗ : Στα μωρά συμπιέστε με λιγότερη δύναμη χρησιμοποιώντας μόνο το ένα χέρι. Κάθε 5-8 συμπιέσεις, εφαρμόστε μια εμφύσηση τεχνητής αναπνοής. Συνεχίστε να συμπιέζετε μέχρι την σταθερή επαναφορά της αναπνοής και τουλάχιστον για μια ώρα. Ακόμη και όταν η καρδιά επανέλθει στον ρυθμό της, μπορεί να είναι απαραίτητη η τεχνητή αναπνοή για επιπλέον χρονικό διάστημα.

