

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δεν προορίζεται για άτομα άνω των 242 lbs (110 kg) - Δεν προορίζεται για παγωμένες ή ολισθηρές συνθήκες. - Δεν προορίζεται για άτομα με αλλεργίες στο λατέξ.

ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ: Για να ξεδιπλώσετε το μπαστούνι σας, κρατήστε τη λαβή και αφήστε τα πτυσσόμενα τμήματα του άξονα να ξεδιπλωθούν προς το δάπεδο. Για την αποτροπή των πτώσεων πρέπει πάντα να ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι τα επιμέρους τμήματα του άξονα (Εικ. 1) είναι ασφαλισμένα στη θέση τους.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε το σώμα του Trusty Cane TM. Το μπαστούνι περιέχει ένα ελαστικό κορδόνι μέσα. Η μη ελεγχόμενη απελευθέρωση του ελαστικού κορδονιού στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε απροσδόκητα μέρη του σώματος, ειδικά στα μάτια. Εάν το ελαστικό κορδόνι κοπεί, φθαρεί ή έχει υποστεί βλάβη, διακόψτε τη χρήση. ΜΗΝ τεντώνετε το κορδόνι περισσότερο από ό, τι χρειάζεται για να αποσυναρμολογήσετε ή να συναρμολογήσετε τα τμήματα.

Για να ρυθμίσετε το ύψος του Trusty CaneTM: Χαλαρώστε την κλειδαριά περιστροφής (Εικ. 2) περιστρέφοντας την δεξιόστροφα αρκετές στροφές. Αποσυμπιέστε το κουμπί κλειδώματος (Εικ.3) και τραβήξτε προς τα επάνω τη λαβή για να επιμηκυνθεί ή πιέστε προς τα κάτω τη λαβή για να μικρύνει. Να θυμάστε ότι πρέπει να σφίξετε ξανά την περιστρεφόμενη κλειδαριά αφού ρυθμίσετε το μπαστούνι Trusty CaneTM στο επιθυμητό ύψος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τις πτώσεις, να διασφαλίζετε πάντα ότι τα μεμονωμένα τμήματα του άξονα είναι ασφαλισμένα στη θέση τους και ότι το κουμπί κλειδώματος είναι πλήρως ενεργοποιημένο.

Για να ανοίξετε το Trusty CaneTM: Το Trusty CaneTM είναι εύκολα αναδιπλούμενο σε ένα βολικό μέγεθος ταξιδιού διαχωρίζοντας τα 4 μεμονωμένα τμήματα άξονα μεταξύ τους. Κρατήστε κάθε σέτ τμημάτων άξονα κοντά στην άρθρωση και τραβήξτε τα (Εικ. 4). Τα επιμέρους τμήματα του άξονα θα αναδιπλωθούν ομοιόμορφα (Εικ. 5)

Για να χρησιμοποιήσετε τα φώτα στο Trusty CaneTM: Το κουμπί στην κορυφή της λαβής Trusty CaneTM (Εικ. 6) ενεργοποιεί τα φώτα. Πατώντας το κουμπί μία φορά θα ανάψετε τα φώτα, και πατώντας το ξανά θα τα σβήσετε. Το φως θα σβήσει αυτόματα μετά από 20 λεπτά.

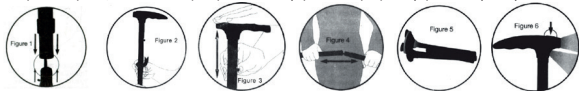

Συντήρηση του Trusty CaneTM: Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι κεφαλής Philips για να ξεβιδώσετε το μέρος της μπαταρίας κάτω από τη λαβή Trusty CaneTM. Αφαιρέστε τυχόν τελειωμένες μπαταρίες και απορρίψτε τις σωστά. Χρησιμοποιώντας 3 μπαταρίες ΑΑΑ, ευθυγραμμίστε το + και το - όπως υποδεικνύεται, διαφορετικά τα φώτα δεν θα λειτουργούν. Αντικαταστήστε και σφίξτε τη βίδα στην πόρτα της θήκης των μπαταριών. Ελέγχετε τακτικά το μπαστούνι για σημάδια φθοράς, συμπεριλαμβανομένης τυχόν φθοράς του ελαστικού κορδονιού ή φθοράς στα πλαστικά πόδια. Εάν παρατηρήσετε σημάδια φθοράς, διακόψτε τη χρήση αμέσως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε μαζί αλκαλικές, τυποποιημένες μπαταρίες (ψευδαργύρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (νικελίου-καδμίου).

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA: Ισχύει η βασική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Valmistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Getfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberladd av/تصنيعها بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توزيع بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



