

**SEDIA COMODA E DOCCIA
COMMUNE AND SHOWER CHAIR
CHAISE D'AISANCE ET DE DOUCHE
SILLA WC Y DUCHA
CÓMODA E CADEIRA DE DUCHE
KOMMODE UND DUSCHSTUHL
KOMMOD OCH DUSCHSTOL
ΚΟΜΟΔΑ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΑ ΝΤΟΥΣ**

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF HE10635081 (Gima 43193)



HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO.,LTD
NO.1,Chuangye Street,Matou Industry Park,HanDan City,HeBei
Province,China
Made in China



Y.Sung Handelsvertretung
Dusselthaler Str. 24, 40211
Dusseldorf Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



HE10678103

ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Μέρη του προϊόντος



1. Στήριγμα πλάτης
2. Στήριγμα μπράτσου
3. Κάθισμα από PU
4. Πόδια στήριξης
5. Ακρο ποδιού

Οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Όλα τα μέρη πρέπει να ελέγχονται για τυχόν ζημιές καθώς και για ασφαλή εφαρμογή πριν από τη χρήση.
- Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Ενδέχεται να πιαστεί κάποιο ρούχο ή μέρος του σώματος όταν κάθεστε, σηκώνεστε, τοποθετείτε τον κάδο της τουαλέτας, καθώς και όταν σηκώνετε και ασφαλίσετε τα στηρίγματα των βραχιόνων.
- Εάν πρόκειται να διασχίσετε κάποιο κατώφλι, θα πρέπει να το κάνετε αργά και προσεκτικά, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος οι ρόδες να υποστούν ζημιά!
- Όταν χρησιμοποιείτε καρέκλα με ρόδες, χρησιμοποιείτε πάντα το φρένο.
- Κατά τη μεταφορά στην/από την καρέκλα με ρόδες, τα στηρίγματα των ποδιών πρέπει να είναι σηκωμένα ώστε να μην εμποδίζουν.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τα στηρίγματα ποδιών ως υποβοήθηση όταν σηκώνεστε διότι υπάρχει κίνδυνος ανατροπή!
- Μην επιτρέπετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, για παράδειγμα από παιδιά.
- Λαμβάνετε πάντα υπόψη το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του χρήστη.
- Η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται στα τεχνικά στοιχεία που

περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης καθώς και στην πινακίδα αναγνωριστικών στοιχείων

Συναρμολόγηση

Βήμα 1

Συνδέστε το στήριγμα πλάτης στον σκελετό πιέζοντας τα κουμπιά και ωθώντας τους σωλήνες του στηρίγματος πλάτης μέσα στους σωλήνες που υπάρχουν κάτω από το κάθισμα.





Βήμα 2








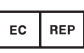


Συνδέστε τα πόδια στον σκελετό πιέζοντας τα κουμπιά μέσα στους σωλήνες που υπάρχουν σε κάθε πόδι.

Βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά «κουμπώνουν» σωστά μέσα στις οπές, ότι είναι σταθερά και προσαρμοσμένα με τον ίδιο τρόπο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν	ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
αριθμός προϊόντος	HE10635081
Ικανότητα φορτίου (lbs/kg)	300 lbs/ 136kg
Διαστάσεις προϊόντος (mm) Μ x Π x Υ	(521-558)×(692-730)×(850-955)mm
Βάρος προϊόντος (lbs/kg)	7,1kg
Υλικό στηρίγματος πλάτης	PU
Υλικό καθίσματος	PU
Υλικό στηρίγματος βραχίονα	Αφρώδες Υλικό EVA
Υλικό σκελετού	Αλουμίνιο
Χρώμα σκελετού	Ασημί
Ποσότητα στη συσκευασία (τεμάχιο)	1
Βάρος προϊόντος μαζί με τη συσκευασία (lbs/kg)	8,0kg
Διαστάσεις κουτιού Μ x Π x Υ	645*585*395 mm

Σύμβολα

	Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	Παραγωγός		Ημερομηνία παραγωγής
	Αριθμός παρτίδας		Κωδικός προϊόντος
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
	Σειριακός αριθμός		Εισαγωγή από

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών