

GIMA 43430



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China




KDB-506



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

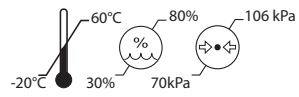

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Καρέκλα Ανύψωσης και Μεταφοράς

Αριθμός Μοντέλου: KDB-506

Χωρητικότητα βάρους: 125 Kg.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Η καρέκλα ανύψωσης και μεταφοράς χρησιμοποιείται για τη μεταφορά παραπληγικών ασθενών, ατόμων με προβλήματα στα πόδια ή ηλικιωμένων από το κρεβάτι, το αναπηρικό καροτσάκι, την καρέκλα ή το κάθισμα της τουαλέτας. Το προϊόν αυτό βοηθά σημαντικά την εργασία των φροντιστών. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της εργασίας των νοσηλευτών και μειώνει τους σχετικούς κινδύνους.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Προορίζεται αποκλειστικά για ανθρώπους.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε το προϊόν, όταν είναι απαραίτητο, με ζεστό νερό ή τρίψτε το με οινόπνευμα και βεβαιωθείτε ότι οι ρόδες είναι απαλλαγμένες από βρωμιά και τρίχες. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν φαινόλη ή χλώριο, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στα στοιχεία από αλουμίνιο και πολυαμίδιο.

Για να αποφευχθεί ο πιθανός σχηματισμός σκουριάς, δώστε προσοχή στα ακόλουθα σημεία για καλύτερη συντήρηση και για βελτίωση της διάρκειας ζωής του προϊόντος:

*Αφαιρείτε τυχόν διαβρωτικές ουσίες όπως αφρόλουτρα, σαμπουάν, κτλ. κάθε φορά μετά από τη χρήση.

*Τοποθετείτε το προϊόν σε ξηρό και επαρκώς αεριζόμενο χώρο κάθε φορά μετά από τη χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε και τηρήστε τις προφυλάξεις ασφαλείας προκειμένου η χρήση του προϊόντος να γίνεται με ευκολία και δίχως προβλήματα.
Διαβάστε και κατανοήστε τις παρούσες οδηγίες πριν από τη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας για κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη ζημιών στο προϊόν
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Πληροφορίες για τις οποίες απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- *Σχεδιάζετε ΠΑΝΤΑ τις ενέργειες ανύψωσης που θέλετε να εκτελέσετε προτού ξεκινήσετε.
- *Εκτελείτε ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΕΛΕΓΧΟ προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- *Πρέπει ΠΑΝΤΑ να εξοικειώνεστε με τα στοιχεία χειρισμού και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του προϊόντος πριν από την ανύψωση του ασθενούς.
- *ΜΗ χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά.
- *Η εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται ΠΑΝΤΑ σύμφωνα με τις οδηγίες.
- *Επιβεβαιώνετε ΠΑΝΤΑ ότι η ικανότητα φορτίου του προϊόντος είναι κατάλληλη για το βάρος του ασθενούς
- *Τηρείτε ΠΑΝΤΑ τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης για τη λειτουργία του προϊόντος.
- *Κατά την ανύψωση του ασθενούς οι ρόδες πρέπει ΠΑΝΤΑ να είναι κλειδωμένες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή μετακίνησης είναι σωστά ευθυγραμμισμένη με το κέντρο βάρους.
- *ΜΗΝ επιχειρείτε να μετακινήσετε το προϊόν σπρώχνοντας τον ενεργοποιητή, τον αναρτήρα ή τον ασθενή.
- *Μετακινείτε ΠΑΝΤΑ το προϊόν μέσω της λαβής ώθησης.
- *Τοποθετείτε ΠΑΝΤΑ τον ασθενή σε άνετη θέση πριν από τη μεταφορά.
- *ΜΗ μετακινείτε το προϊόν με τον ασθενή επάνω σε αυτό με ταχύτητα άνω των 3km/h 0,8m/s.
- *ΜΗ μετακινείτε το προϊόν επάνω σε ανώμαλο ή τραχύ έδαφος. Ιδίως εάν ο ασθενής κάθεται επάνω σε αυτό.
- *ΜΗΝ επιβάλλετε ελέγχους ασφαλείας. Όλα τα στοιχεία χειρισμού είναι εύκολα στη χρήση και δεν απαιτείται υπερβολική δύναμη.
- *ΜΗ σταθεμείτε το προϊόν σε πλαγιές έχοντας τον ασθενή επάνω σε αυτό.
- *ΜΗΝ ανυψώνετε τον ασθενή εκτός εάν έχετε εκπαιδευθεί γι’ αυτό και είστε σε θέση να το κάνετε.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Οι συνθήκες του περιβάλλοντος μεταφοράς και αποθήκευσης του προϊόντος είναι οι ακόλουθες:
a) Εύρος θερμοκρασίας: -20°C~+60°C.
b) Η σχετική υγρασία κυμαίνεται από 30% έως 80%.
c) Η ατμοσφαιρική πίεση κυμαίνεται από 70kPa έως 106kPa.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα σετ μέσα σε 1 χαρτοκιβώτιο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Οι περιορισμοί ως προς την απόρριψη του προϊόντος εξαρτώνται από το βαθμό μόλυνσης που προκλήθηκε κατά τη χρήση και υπόκεινται στην εθνική ή τοπική νομοθεσία.

Οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται το προϊόν που παρέχεται από την εταιρεία μας πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα σας.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ:

Σύμβολο	Εννοια	Σύμβολο	Εννοια
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν συμμορφούμενο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745		Ιατρική συσκευή
	Κατασκευαστής		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Ημερομηνία κατασκευής		Φυλάσσεται μακριά από το φως του ήλιου
	Αριθμός παρτίδας		Όχι στείρα
	Προειδοποίηση: Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες (προειδοποιήσεις) χρήσης		Κωδικός προϊόντος
	Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης		Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος
	Εισαγωγή από		Όριο θερμοκρασίας
	Όριο υγρασίας		Όριο ατμοσφαιρικής πίεσης
	Μοναδικό αναγνωριστικό		

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η βασική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.