



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**MEDICAL TROLLEY
CARRELLO CLINICO
CHARIOT CLINIQUE
CARRO DE ANESTESIA
CARRINHO CLÍNICO
KLINIKWAGEN
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
КЛИНИЧНА КОЛИЧКА
ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK
KLINIKKAVAUNU
KLINIČKA KOLICA
KLINIKAI KEREEKES KOCSI
MEDICININIS VEŽIMĖLIS
MEDISCHE KAR
WÓZEK MEDYCZNY
CĂRUCIOR PENTRU
INSTRUMENTAR MEDICAL
CLINICAL TROLLEY**



MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO - BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ΟΗΓΕΚΙΡΙΑ - VARTOTOJO VADOVAS

Gima 45715

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce / Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó / производител / Valmistaja / Gamintojas:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

REF SKR-CT625-1



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja / Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

1. Εγκατάσταση τροχών



Ευθυγραμμίστε το μπουλόνι του τροχού με την οπή σύνδεσης στο κάτω μέρος του τροχήλατου και εισάγετε τον τροχό. Εισάγετε τη βίδα στην οπή σύνδεσης και σφίξτε τη βίδα δεξιόστροφα.

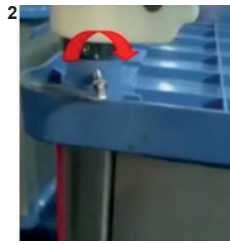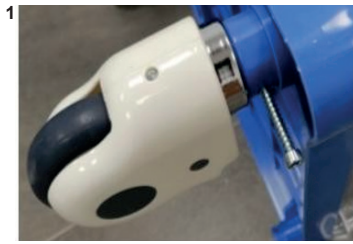

2. Τρόπος χρήσης των τροχών

Κλειδωμα τροχού: Αφού τοποθετήσετε το τροχήλατο νοσηλείας στην επιθυμητή θέση, πατήστε το κουμπί ON με το πόδι σας ώστε να ακουστεί ένα «κλικ» και να κλειδώσει ο τροχός, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Ξεκλείδωμα τροχού: Πατήστε το κουμπί OFF με το πόδι σας ώστε να ακουστεί ένα «κλικ» και να ξεκλειδώσει ο τροχός

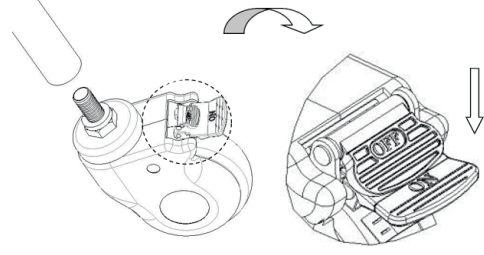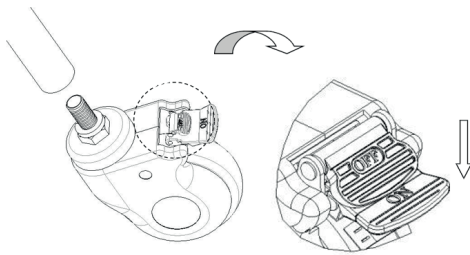

3. Επίλυση προβλημάτων

Συνθήκη προβλήματος	Πιθανές αιτίες	Τρόποι επίλυσης
Δυσκολία μετακίνησης του τροχήλατου	1. Ο τροχός είναι κλειδωμένος και δεν έχει απελευθερωθεί το φρένο 2. Ο τροχός έχει υποστεί ζημιά	1. Απελευθερώστε το φρένο, δείτε 2.1 2. Αντικαταστήστε τον τροχό, δείτε 1.2

4. Συντήρηση

- Για την ασφαλή χρήση του τροχήλατου νοσηλείας, είναι απαραίτητη η εκτέλεση τακτικών ελέγχων ασφαλείας. Συνιστάται να ελέγχετε το τροχήλατο κάθε έξι μήνες προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι συνδέσεις δεν είναι χαλαρές και ότι όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται ομαλά.
- Όταν το πλαίσιο του τροχήλατου νοσηλείας παλιώσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης, το μεταλλικό τμήμα του τροχήλατου του νοσηλείας και τα πλαστικά μέρη του πλαισίου μπορούν να ανακυκλωθούν.
- Αποφύγετε γρατζουνιές στο πάνελ με αιχμηρά αντικείμενα ή μαχαίρια κατά τη διάρκεια της χρήσης, και καθαρίζετε το συχνά ώστε να διατηρείται καθαρό και στεγνό.
- Εάν το πάνελ λερωθεί κατά λάθος, συνιστάται να το καθαρίζετε. Μη χρησιμοποιείται αλκαλικά ή διαβρωτικά χημικά για τον καθαρισμό του τροχήλατου νοσηλείας, καθώς μπορεί να προκληθεί σκουριά στην επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Ελέγχετε τακτικά τους τροχούς για να αποφύγετε χτυπήματα ή υπερφόρτωση που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στους τροχούς.
- Απαγορεύεται να πατάτε με δύναμη το φρένο διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύστημα φρεναρίσματος.
- Η φθορά της επιφάνειας των ελαστικών των τροχών μπορεί να διαπιστωθεί μέσω οπτικού ελέγχου. Ορισμένα νήματα και άλλα υλικά μπορεί να συσσωρευτούν και να τυλιχτούν γύρω από τους τροχούς, αφαιρέστε τα μπουλόνια και τα παξιμάδια των τροχών, καθαρίστε τη βρωμιά και ελέγξτε αν το ρουλεμάν του τροχού έχει υποστεί ζημιά. Εάν τα εξαρτήματα δεν έχουν υποστεί ζημιά, μπορείτε να τα επανασυναρμολογήσετε και να τα χρησιμοποιήσετε.
- Εάν οι τροχοί έχουν υποστεί φθορά λόγω της μακροχρόνιας χρήσης τους, μπορείτε να τους αντικαταστήσετε επιβεβαιώνοντας πάντα ότι τα μπουλόνια και τα παξιμάδια των αξόνων είναι σωστά συνδεδεμένα. Εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε ροδέλες ή ασφαλιστικά παξιμάδια προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία.
- Για τους τροχούς που διαθέτουν φρένο, είναι απαραίτητο να επιβεβαιώνετε τακτικά τη σωστή λειτουργία των φρένων. Ελέγχετε τα φρένα μία φορά την ημέρα ή πριν από κάθε χρήση. Όσον αφορά τα τροχήλατα νοσηλείας που διαθέτουν πολλαπλούς τροχούς με φρένο, μόνο ένας τροχός με φρένο μπορεί να κλειδωθεί τη φορά. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε δοκιμάσετε να σπρώξετε το τροχήλατο νοσηλείας και να ελέγξετε αν η απόδοση του φρεναρίσματος λειτουργεί σωστά. Εάν η λειτουργία του φρένου αποτύχει λόγω φθοράς ή ζημιάς στους τροχούς, αντικαταστήστε αμέσως τους τροχούς και έπειτα ξαναδοκιμάστε το σύστημα φρεναρίσματος.
- Εάν ο μηχανισμός του συστήματος φρεναρίσματος του τροχού υποστεί ζημιά και το φρένο πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση της εταιρείας μας ή με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Κάθε φορά που γίνεται αντικατάσταση των φρένων, η απόδοση του φρεναρίσματος των τροχών πρέπει να επανελεγχεται.

5. Συσκευασία, Μεταφορά, Αποθήκευση

- Η συσκευασία του τροχήλατου πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σύμβαση ή με τα πρότυπα του προϊόντος.
- Αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις και τους απότομους κραδασμούς και φυλάσσετε το τροχήλατο μακριά από το ηλιακό φως και από τη βροχή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
- Οι συνθήκες αποθήκευσης του τροχήλατου είναι οι εξής:
 - Θερμοκρασία περιβάλλοντος: +5°C ~ +40°C.
 - Σχετική υγρασία: ≤ 85%.
 - Ατμοσφαιρική πίεση: 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

- Φυλάξτε τα έγγραφα και τα τιμολόγια που συνοδεύουν το προϊόν, καθώς είναι απαραίτητα σε περίπτωση χρήσης της εγγύησης για τη συντήρηση του προϊόντος.
- Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση, επικοινωνήστε έγκαιρα με την εταιρείας μας, προκειμένου να σας παρέχει ακριβή και άμεση τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες συντήρησης.
- Εάν το προϊόν σπάσει ή υποστεί ζημιά παρά τη σωστή εγκατάσταση και χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες, παρέχεται δωρεάν εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς, καθώς και δια βίου σέρβις κατόπιν επίδειξης του σχετικού «πιστοποιητικού» ή τιμολογίου.
- Εάν, εντός ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς, το προϊόν παρουσιάσει κάποια βλάβη ή δεν λειτουργεί σωστά λόγω προβλήματος ποιότητας, η εταιρεία παρέχει στους χρήστες δωρεάν επισκευή του προϊόντος.

Δια βίου σέρβις από τον κατασκευαστή: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD