



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BILANCIA DIGITALE IN VETRO**  
**GLASS DIGITAL SCALE**  
**PÈSE-PERSONNES EN VERRE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE**  
**GLASPERSONENWAAGE**  
**BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL**  
**BALANÇA DIGITAL DE VIDRO**  
**ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ**  
**SZKLANA WAGA CYFROWA**  
**چاگز ن م ی ل ا ت ی ج ی د ن ا ز ی م**  
**DIGITAALINEN LASIVAAKA**  
**STAKLENA DIGITALNA VAGA**  
**ÜVEGBŐL KÉSZÜLT DIGITÁLIS MÉRLEG**  
**CÂNTAR DIGITAL DIN STICLĂ**  
**DIGITAL GLASVÁG**

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE**  
**USE AND MAINTENANCE BOOK**  
**INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN**  
**BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN**  
**MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**  
**MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO**  
**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**  
**PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI**  
**KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS**  
**PRIRUČNIK ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE**  
**HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ**  
**MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE**  
**ANVÄNDNINGSG- OCH UNDERHÅLLSMANUAL**

**REF** GBS-810D (GIMA 27248 - 27249)

Fabbricato da/Made by/Faite par/Hecho por/Feito por/Hergestellt von/Zrobione przez/Ἐτιασμένο από/  
**GUANGDONG TRANSTEK MEDICAL ELECTRONICS.CO.LTD.**  
Jin'an Road , Minzhong, Zhongshan 528441, China  
Made in China

Importato e distribuito da/Imported and distributed by  
**GIMA S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com



## ZNAČAJKE I SPECIFIKACIJE


- Automatski UKLJUČIVANJE
- Automatsko ISKLJUČIVANJE
- Jedinice težine: kg, lb, st: lb
- Kapacitet; 150 kg/330 lb/23st: 8 lb
- Mjerna skala: 0,1 kg/0,2 lb/0,2 lb (1 lb,  $\geq 20$ st)
- Indikacija preopterećenja: “— — — — —”
- Indikator niske baterije “Lo”
- Napajanje: 1 x CR2032 baterija

Neštekristallinäyttö



## ZA PROMJENU BATERIJE

- Provjerite jesu li +/- terminali ispravno postavljeni.
  - Upotrijebite odgovarajući alat za oslobađanje baterije iz odjeljka ako je potrebno.
- Molimo uklonite izolacijsku traku prije uporabe.

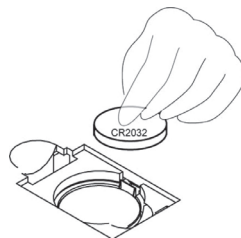

## FUNKCIJSKE TIPKE



## UPUTE ZA RAD

1. Pritisnite tipku UNIT za uključivanje i odabir jedinice.
2. Postavite vagu na čvrsto i ravno tlo, pustite da se vaga automatski isključi.
3. Korisnik stoji izravno na platformi vage, ona će treperiti i zaključati se na LCD-u nakon što se težina stabilizira, a zatim se automatski isključiti nakon 10 sekundi.
4. Ako nema nikakve radnje, automatski će se isključiti
5. Kada je ne koristite, molimo vas da je stavite u vodoravni položaj, a zatim ne stavljajte nijedan predmet na vagu.



### PODSJETNIK:

*Nemojte koristiti vagu na tepihu*

*Kako biste osigurali točno vaganje, kada pomičete vagu, najprije je uključite (ili dodirnite) i pričekajte da se isključi, zatim možete ponovno stati na platformu i izmjeriti svoju težinu. U suprotnom će se dodati vlastita težina vage.*



### ZBRINJAVANJE:

*Proizvod se ne smije odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom. Korisnici moraju zbrinuti ovu opremu tako da je odnesu na određeno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za dodatne informacije o centrima za recikliranje obratite se lokalnim vlastima, lokalnom centru za recikliranje ili trgovini u kojoj je proizvod kupljen. Ako uređaj nije pravilno odložen, mogu se primijeniti novčane kazne ili kazne u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i propisima.*

## GIMA JAMSTVENI UVJETI

Primjenjuje se standardno B2B jamstvo Gima od 12 mjeseci.