

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE. PRIJE UPOTREBE POSAVJETUJTE SE S LIJEČNIKOM.

KONTRAINDIKACIJE: Nije namijenjeno osobama težim od 110 kg (242 lbs) - Nije namijenjeno za ledene ili skliske uvjete. - Nije namijenjeno osobama alergičnima na lateks.

UPUTE ZA UPORABU: Za rasklapanje štapa uhvatite se za ručku i pustite da se sklopivi dijelovi osovine rasklope prema podu. - Kako biste spriječili padove, uvijek provjerite jesu li pojedinačni segmenti osovine (sl. 1) sigurno zaključani na svom mjestu.


UPOZORENJE: NE rastavljajte tijelo štapa Trusty Cane™. Štap sadrži elastičnu vrpцу unutra. Nekontrolirano otpuštanje elastične vrpce unutra može uzrokovati teške ozljede nezaštićenih dijelova tijela, posebno očiju. Ako je elastična vrpca prerezana, izlizana ili oštećena, prekinite upotrebu. NE rastežite vrpцу više nego što je potrebno za rastavljanje ili sastavljanje segmenata.

Za podešavanje visine vašeg Trusty Cane™ štapa: Olabavite osigurač (sl. 2) okretanjem u smjeru kazaljke na satu nekoliko puta. Pritisnite gumb za zaključavanje (sl. 3) i povucite ručku prema gore da biste je produžili ili pritisnite ručku prema dolje da biste je skratili. Ne zaboravite ponovno zategnuti osigurač nakon što ste Trusty Cane™ podesili na željenu visinu.

UPOZORENJE: Kako biste spriječili padove, uvijek provjerite jesu li pojedinačni segmenti osovine sigurno zaključani na mjestu i je li sigurnosna kopča potpuno učvršćena.

Za sklapanje Trusty Cane™ štapa: Vaš Trusty Cane™ štap se lako sklapa na praktičnu veličinu za putovanje odvajanjem 4 pojedinačna segmenta osovine jedan od drugoga.

Za korištenje svjetla na vašem Trusty Cane™ štapu: Gumb na vrhu ručke Trusty Cane™ štapa (sl. 6) aktivira svjetla. Jednokratnim pritiskom na gumb aktivirat ćete svjetla, a ponovnim pritiskom isključit ćete ih. Svjetla će se automatski ugasiti nakon 20 minuta.

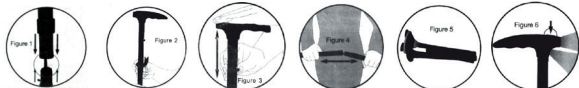

Održavanje vašeg Trusty Cane™ štapa: Za zamjenu baterija, upotrijebite križni odvijač za odvrtanje pretinca za baterije ispod ručke Trusty Cane™ štapa. Izvadite sve prazne baterije i pravilno ih zbrinite. Koristeći 3 AAA baterije, poravnajte + i - kao što je naznačeno, inače svjetla neće raditi. Vratite i zategnite vijak na vratima pretinca za baterije. Redovito pregledavajte štap na znakove istrošenosti, uključujući oštećenja elastične vrpce ili gumene nožice. Ako primijetite znakove istrošenosti, odmah prekinite s korištenjem.

UPOZORENJE: Ne miješajte stare i nove baterije. Ne miješajte alkalne, standardne (ugljik-cinkove) ili punjive (nikal-kadmijeve) baterije.

GIMA UVJETI JAMSTVA: Primjenjuje se Gima 12-mjesečno standardno B2B jamstvo.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Geïmporteer door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberfard av/تولید شده بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geïmporteerde door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توزیع بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



