


USE INSTRUCTION FOR MINI CYCLE

1. Izvadite tijelo mini bicikla iz kutije i pažljivo rukujte s njim. Vidi sliku 1.
2. Položite tijelo mini bicikla na tlo u istoj ravnini, a zatim na njega stavite vijak s gumbom A kao što je prikazano na slici. Vidi sliku 2.
3. Okrenite vijak s gumbom A kako biste pravilno pritisnuli os B (prema lijevo za pritisak, u suprotnom smanjite pritisak). Uključite gumb kalkulatora C i okrenite os B, odmah će se pokrenuti. Vidi sliku 3. (za detalje pogledajte upute kalkulatora.)
4. Nakon upotrebe povucite iglu 0 prema unutra i dobro je preklopite kao što je prikazano na slici 5.
5. Napomena:
 - (1) Pregledajte je i provjerite je li postavljena stabilno i u istoj ravnini prije upotrebe;
 - (2) Ne zaboravite da pritisak bude minimalan kada počnete koristiti, a zatim ga povećajte dok ne postignete potrebnu vrijednost;
 - (3) Odgovarajuće osobe: odrasli, djeca, starije osobe;

UPOZORENJE: Molimo vas da ne pokušavate stajati na mini biciklu, to će oštetiti stroj.

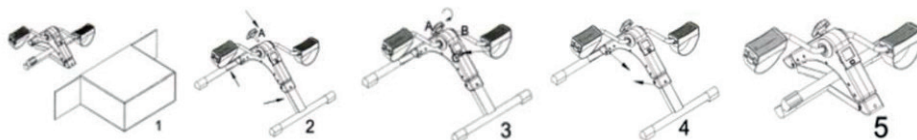

UPUTE ZA UPORABU RAČUNALA ZA VJEŽBANJE

SPECIFIKACIJE:

TIME -----00: 00-99:59MIN
 COUNT-----0-9999
 REPS/MIN-----0-9999
 CALORIE -----0-9999KAL

FUNKCIJSKE TIPKE:

MODE: Ova tipka vam omogućuje odabir i zaključavanje određene željene funkcije, a držanje tipke 4 sekunde omogućuje resetiranje svih vrijednosti funkcija.


OPERATIVNI POSTUPCI:

AUTO ON/OFF: Sustav se uključuje kada se pritisne bilo koja tipka ili kada osjeti ulazni signal sa senzora brzine. Monitor će se automatski isključiti ako nema signala unutar 4 minute.

FUNKCIJA:

TIME Pritiskanjem tipke MODE dok ">" ne pokaže na VRIJEME. Kada senzor brzine primi bilo kakav ulazni signal, pokreće odbrojavanje i automatski akumulira vrijeme vježbanja prilikom početka vježbanja. **COUNT** Kada ">" pokazuje na COUNT, računalo će prikazati korake. Kada senzor brzine primi bilo kakav signal, pokreće brojanje i automatski akumulira broj koraka prilikom početka vježbanja. **REPS/MIN** Pritiskom tipke MODE dok "<" ne pokaže na REPS/MIN. Kada senzor brzine primi bilo kakav ulazni signal, započinje odbrojavanje i automatski se akumulira broj vježbanja prilikom početka vježbanja. **CALORIE** Pritiskanjem tipke MODE dok ">" ne pokaže na CAL. Kada senzor brzine primi bilo kakav signal, on pokreće brojanje i automatski akumulira kalorije tijekom vježbanja prilikom početka vježbanja. **SCAN** Kada ">" pokazuje na SCAN, računalo će automatski prikazati sljedeće funkcije prikazanim redoslijedom: TIME-----COUNT-----STRIDES-----CALORIES

ZABILJEŠKA 1. Specifikacije baterije: 1,5 V, LR44 (1 kom.) - 2. Ako se na monitoru ne prikazuje ispravno, ponovno umetnite baterije. - 3. Postupak ugradnje baterija:

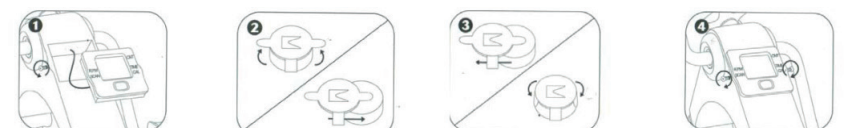

Otpustite i uklonite vijak sa svake strane zaslonske jedinice, a zatim pažljivo izvadite zaslonsku jedinicu iz njenog kućišta.

Na stražnjoj strani zaslona podignite jezičke baterije i izvadite bateriju.

Umetnite novu 1,5 V AG13 bateriju, poštivši nam prema dolje i zatvorite jezičke.

Vratite zaslon u njegovo kućište i pričvrstite ga vijkom.

UVJETI JAMSTVA GIMA

Primjenjuje se standardno B2B jamstvo Gima od 12 mjeseci.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF TD001P-3

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Ein-
geführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151