

REF

KDB-699 (GIMA 43202)



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

EC

REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



NAZIV

Toaletna stolica

Model: KDB-699

Kapacitet težine: 125 Kg.

NAMJENA:

Toaletna stolica se koristi za olakšavanje defekacije ljudi
pate od patologija, ozljeda ili invaliditeta, a mogu se koristiti kod kuće ili u bolnici.

OPERATER

Uređajem može upravljati sam korisnik, medicinsko osoblje ili njegovatelj.

POPULACIJA BOLESNIKA

Osobe s invaliditetom, bolesnici i starije osobe.

KONTRAINDIKACIJE

Nadzirite djecu kada koriste toaletnu stolicu.

UPUTE ZA UPORABU

- 1. Ovaj proizvod ima sklopivu strukturu, samo trebate rasklopiti okvir i instalirati potrebne dijelove kao što su kotači, popraviti kantu i ploču sjedala prije upotrebe.
- 2. Podignite ploču sjedala, pravilno postavite kantu na okvir kante, zatim spustite ploču sjedala za upotrebu.
- 3. Nakon upotrebe zatvorite poklopac kante, izvadite ga iz okvira kante.
- 4. Toaletna stolica se može sklopiti kada nije u upotrebi, što je zgodno za odlaganje i zauzima manje prostora.

ODRŽAVANJE

- 1. Površina proizvoda ne smije se grebati ili grebati tvrdim predmetima kako bi se spriječila materijalna šteta.
- 2. Za svakodnevno čišćenje i održavanje nanesite neutralni sintetički deterdžent, obrišite vlažnom krpom, a zatim obrišite suhom krpom.
- 3. Redovito čistite i dezinficirajte jednom dnevno od strane medicinskog osoblja ili korisnika, te temeljito dezinficirajte toaletnu stolicu prilikom mijenjanja pacijenata.
- 4. Ne izlažite ga jakim kiselinama i alkalijama kako biste izbjegli koroziju.

MJERE OPREZA I UPOZORENJA:

- 1. Postavite toaletnu stolicu na suho i prozračeno mjesto daleko od izravne sunčeve svjetlosti i izbjegavajte korozivne kemikalije poput ulja, kiselina i lužina.
- 2. Izbjegavajte izlaganje toaletne stolice suncu i kiši i osušite je odmah nakon svake uporabe.
- 3. Za bolje podmazivanje pokretnih dijelova mogu se nanijeti visokokvalitetna maziva.
- 4. Redovito provjeravajte spojeve toaletne stolice kako biste izbjegli nezgode uzrokovane labavljenjem i padovima.
- 5. Često provjeravajte da na toaletnoj stolici nema pukotina i drugih nedostataka koji ugrožavaju njezinu uporabu.
- 6. Često provjeravajte jesu li okvir i površina sjedala čvrsto pričvršćeni.
- 7. Proizvod mora biti postavljen stabilno i ne smije se snažno tresti kako bi se izbjegla strukturalna oštećenja. Toaletna stolica se NE smije koristiti kao ručna invalidska kolica, već samo za kretanje na kratkim udaljenostima.
- 8. Nemojte stajati na stolici s uklonjenim nogama, jer proizvod može pasti.

POHRANA

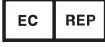
Zapakirana invalidska kolica treba čuvati na prozračenom i suhom mjestu, bez korozivnih plinova te u dobro prozračenoj i čistoj prostoriji. Izbjegavajte vlagu, prejaku svjetlost i držite podalje od izvora topline tijekom transporta.

ZBRINJAVANJE

Ograničenja odlaganja ovise o kontaminaciji nastaloj tijekom uporabe i podliježu nacionalnom ili lokalnom zakonodavstvu.

Sve ozbiljne nesreće koje uzrokuju medicinski uređaji koje mi dostavljamo moraju se prijaviti proizvođaču i nadležnim vlastima države članice u kojoj se nalazi vaš registrirani.

NALJEPNICE, DIZAJN LOGOTIPA AMBALAŽE::

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Medicinski uređaj usklađen s Uredbom (EU) 2017/745		Medicinski uređaj
	Proizvođač		Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici
	Datum proizvodnje		Čuvati dalje od sunčeve svjetlosti
	Broj serije		Nije sterilan
	Upozorenje: Pažljivo pročitajte i slijedite upute (upozorenja) za uporabu		Šifra proizvoda
	Pročitajte upute za uporabu		Čuvati na hladnom i suhom mjestu
	Uvezeno iz		

GIMA UVJETI JAMSTVA

Primjenjuje se Gima 12-mjesečno standardno B2B jamstvo.