


GIMA 43430

 Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

REF **KDB-506**

EC **REP** SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

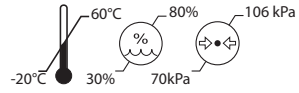

NAZIV PROIZVODA

Uređaj za podizanje i prijenos

Broj modela: KDB-506

Kapacitet težine: 125 Kg.

NAMJENA:

Uređaj za podizanje i prijenos služi za premještanje pacijenata s paralizom donjeg dijela tijela, nogu i stopala ili starijih osoba s kreveta, invalidskih kolica, sjedala ili WC sjedala. Ovaj uređaj uvelike rasterećuje posao njegovatelja. Poboljšava učinkovitost njegovateljskog rada i smanjuje rizik njegovanja.

INDIKACIJE

Koristi se samo za ljude

METODE ČIŠĆENJA/ODRŽAVANJA

Ako je potrebno, očistite uređaj toplom vodom ili alkoholom i provjerite jesu li kotačići čisti od prljavštine i dlaka. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže fenol ili klor jer mogu oštetiti aluminijske i poliamidne materijale.

Kako biste izbjegli moguće stvaranje hrđe, obratite pozornost na sljedeće točke radi boljeg održavanja i poboljšanja radnog raspona:

*Uklonite korozivne tvari kao što su gel za tuširanje, šampon itd. svaki put nakon upotrebe.

*Stavljanje proizvoda na prozračno i suho mjesto svaki put nakon upotrebe je također dobra navika.

MJERE OPREZA I UPOZORENJE

Pročitajte i pridržavajte se sigurnosnih mjera opreza navedenih u nastavku, koje mogu učiniti rad jednostavnim i bez muke.

Prije uporabe pročitajte i razumite ove upute.

UPOZORENJE - Važne sigurnosne informacije za opasnosti koje mogu uzrokovati ozbiljne ozljede

OPREZ - informacije za sprječavanje oštećenja proizvoda.

NAPOMENA - Podaci na koje treba obratiti posebnu pozornost.

UPOZORENJE

* UVIJEK planirajte operacije dizanja prije početka.

* UVIJEK izvršite DNEVNU PROVJERU prije korištenja uređaja.

* UVIJEK se upoznajte s kontrolama i sigurnosnim značajkama uređaja prije podizanja pacijenta.

*NEMOJTE koristiti oštećeni uređaj.

*UVIJEK montirajte uređaj prema uputama.

*UVIJEK provjerite odgovara li sigurno radno opterećenje uređaja težini pacijenta

*UVIJEK slijedite upute u korisničkom priručniku za korištenje uređaja.

*UVIJEK podižite pacijenta sa zaključanim kotačićima. Obavezno poravnajte mjenjač s ispravnim težištem.

*NEMOJTE pokušavati pomaknuti uređaj guranjem prema aktuatoru, kuki ili pacijentu.

*UVIJEK pomičite uređaj pomoću ručke za guranje.

*UVIJEK držite pacijenta u minimalno udobnom položaju prije prijenosa.

*NEMOJTE pomicati opterećeni uređaj brzinom većom od 3 km/h 0,8 m/s.

*NEMOJTE se kretati po neravnom ili grubom terenu. Pogotovo ako se pacijent nalazi na uređaju.

*NEMOJTE nametati sigurnosne kontrole. Sve su kontrole jednostavne za korištenje i ne zahtijevaju pretjeranu silu.

*NEMOJTE parkirati uređaj na kojem se nalazi pacijent na kosinama.

*NEMOJTE podizati pacijenta osim ako niste obučeni i sposobni za to.

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

Okolina transporta i skladištenja uređaja bit će sljedeća:

a) Raspon temperature: -20°C~+60°C.

b) Relativna vlažnost zraka kreće se od 30 % do 80 %.

c) Atmosferski tlak kreće se od 70 kPa do 106 kPa. .

PAKIRANJE:

Pakiranje sadrži jedan set u 1 kutiji.

ZBRINJAVANJE

Ograničenja odlaganja ovise o kontaminaciji nastaloj tijekom uporabe i podliježu nacionalnom ili lokalnom zakonodavstvu.

Sve ozbiljne nesreće koje uzrokuju medicinski uređaji koje mi dostavljamo moraju se prijaviti proizvođaču i nadležnim vlastima države članice u kojoj se nalazi vaš registrirani.

NALJEPNICE, DIZAJN LOGOTIPA AMBALAŽE:

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Medicinski uređaj usklađen s Uredbom (EU) 2017/745		Medicinski uređaj
	Proizvođač		Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici
	Datum proizvodnje		Čuvati dalje od sunčeve svjetlosti
	Broj serije		Nije sterilan
	Upozorenje: Pažljivo pročitajte i slijedite upute (upozorenja) za uporabu		Šifra proizvoda

	Pročitajte upute za uporabu		Čuvati na hladnom i suhom mjestu
	Uvezeno iz		Čuvati između i °C
	Granica vlažnosti		Granica atmosferskog tlaka
	Jedinstveni identifikator		

GIMA UVJETI JAMSTVA
Primjenjuje se Gima 12-mjesečno standardno B2B jamstvo.