

***POLTRONA PODOLOGIA MECCANICA
PODOLOGY MECHANICAL CHAIR
FAUTEUIL DE PODOLOGIE MÉCANIQUE
MECHANIKUS PODOLÓGIAI SZÉK
SCAUN DE PODOLOGIE MECANIC
MEKANISK PODOLOGISTOL***

GIMA 28021

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Gyártó / Producent / Tillverkare:

SILVERFOX CORPORATION LIMITED

No. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town, Pengjiang District,

JiangMen City, GuangDong Province, China

amy.liang@silverfox.cn

Made in China

REF 2231A

Importato da / Imported by / Importé par / Importálta / Importat de / Importerad av:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

1 BEVEZETÉS A JELEN KÉZIKÖNYV HASZNÁLATÁBA



Ez a kézikönyv csak hivatkozásként szolgál az adott modell használatához. Amennyiben a kézikönyvet egyéb célokra használják, semmilyen következményt és felelősséget nem vállalunk. A jelen kézikönyvben található összes információ szerzői joggal védett és a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos sokszorosítani, másolni vagy lefordítani, még részben sem.

2 FIGYELMEZTETÉSEK


- Az elektromos alkatrészek cseréje során, illetve a karbantartási és tisztítási műveletek során csatlakoztassa le a terméket a tápellátásról.
- A tüzesetek és az áramütés elkerülése végett a csatlakozódugót egy megfelelően telepített és földelt aljzatba kell helyezni.
- Ne álljon a termékre.
- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a termékkel és zárja el előlük; amikor nem használja a terméket, állítsa a háttámlát a legmagasabb helyzetbe.
- Ne tegye a terméket nedves helyiségbe, például fürdőszobába az áramütés és az egyéb meghibásodások elkerülése érdekében. A kezelőszervek nem érintkezhetnek vízzel.
- Ne helyezze el vagy használja a terméket olyan környezetben, ahol a felületek bevontak/festettek vagy ahol oxigént kibocsátó folyamatokat végeznek.
- Gyermekek és fizikai problémákkal, érintési zavarokkal, mentális zavarokkal küzdő, tapasztalattal vagy józan ésszel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha megfelelő oktatásban részesültek, illetve a biztonságukért felelős személyzet felügyelete mellett.
- Sérült vagy veszélyes csatlakozódugó esetén forduljon a forgalmazóhoz, az ügyfélszolgálathoz vagy a megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező személyzethez a javítások elvégzése érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy a szék használata közben ne legyenek elérhető tárgyak a közelben.
- A széket csak és kizárólag képzett szakemberek használhatják.

3 ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A felszerelést csak olyan tapasztalt szakemberek használhatják, akik ismerik a termék szerkezetét, teljesítményét és a használat módjait. Ezen kívül javasoljuk, hogy rendszeresen végezze el az előírt karbantartási beavatkozásokat.
- A termék összeszerelése, használata és beállítása előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Tartsa a terméket jó állapotban.
- Ne használja a terméket oldalra vagy egy pontra terhelve.
- A kockázati tényezők gyors kiküszöbölése érdekében tartsa be a biztonságos használattal kapcsolatos utasításokat, használat közben ne terhelje túl a terméket és győződjön meg arról, hogy a termék biztonságvédelmi eszközei épek és megbízhatóan működnek.
- Rendszeresen szorítsa meg a csavarokat és az anyákat, hogy elkerülje a meglazult részek által okozott meghibásodásokat, mivel azok elmozdulhatnak, rezgéseket kelthetnek vagy leeshetnek.
- A karbantartás során a kezelő nem szerelheti le a szék semelyik részét sem, saját belátása szerint.
- Ezt a terméket meghibásodás esetén tilos használni. Ha rendellenes jelenséget vagy zajt észlel, azonnal függessze fel a termék használatát és végezzen alapos vizsgálatot. Csak az esetleges problémák megoldását követően folytassa a munkát.
- A kezelőnek ismernie kell a kézikönyv minden szakaszában leírt óvintézkedéseket a személyek és a termék biztonságának garantálása érdekében.
- A szépségszalonok részére gyártott elektromos szék egy három vezetékkel rendelkező tápkábelrel felszerelt. A tápkábelt egy megfelelően telepített és földelt, három nyílású aljzatba kell csatlakoztatni. Ez nem csak az áramütés kockázatát előzi meg, hanem biztosítja a szék helyes működését is.
- Javasoljuk, hogy a készüléket a termékekre ragasztott figyelmeztető címkén lévő biztonsági utasítások szerint használja.
- Amikor felemeli az egész széket, a gombot folyamatosan nyomva kell tartani, amíg a szék el nem éri a kívánt pozíciót.
- Figyelmeztetjük, hogy a széket folyamatosan csak legfeljebb 2 percig használhatja, majd 18 percig kell pihenni hagyni, ha a motort használja.
- A karbantartást csak képzett szakemberek végezhetik.
- Minden kezelés után használjon semleges reagenst a por, a bőrre vagy a fa részekre került foltok eltávolítására.
- A háttámla, az ülés párná vagy a lábtartó beállítása, illetve az egész szék kézi vezérléssel történő vagy a termékre szerelt pedál általi felemelése során javasoljuk, hogy a kezét, a lábát és a fejét tartsa távol a mozgásban lévő készüléktől (lásd a jobb oldali ábrát).

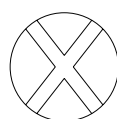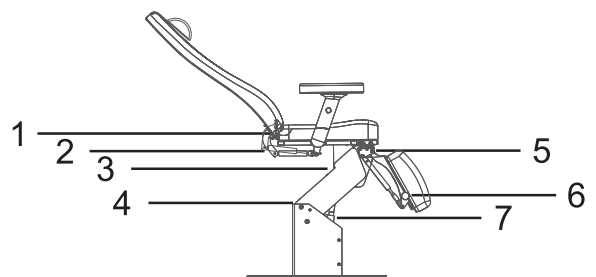

TILOS !

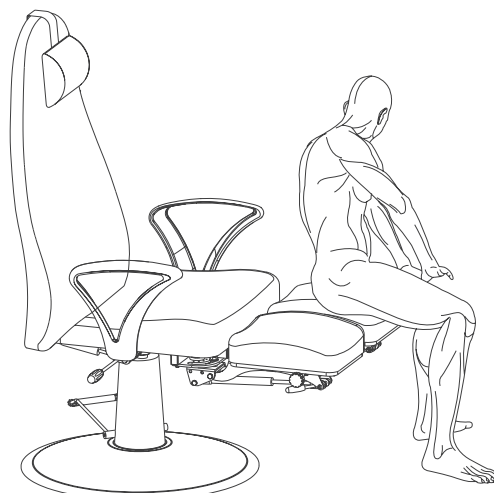

4 ALKALMAZÁSI KÖRNYEZET

Ezeket a termékeket szépségápolási kezelésekhez, masszázsokhoz és manikűrhez tervezték.


5 ÖSSZESZERELÉS

1. Helyezze a széket megfelelő helyzetbe, ügyelve az általános elhelyezésre, a napfényre vagy a mesterséges fényre, valamint a szalon vagy lakás üzemetési körülményeire. Tiszta, száraz és hűvös helyen tárolja.
2. Nyissa ki a csomagolódobozt, hogy ellenőrizze, hogy a szék ép-e és hogy megvan-e minden tartozék vagy cserealkatrész. Bármilyen probléma esetén, kérjük, hogy forduljon a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz.
3. Összeszerelés

A balesetek elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a szék sík és stabil padlón helyezkedik el.

6 A SZÉPSÉGSZALONOK RÉSZÉRE TERVEZETT SZÉK SZERKEZETE


- Beállítható a háttámla, a párna és a lábtartó szöge, felemelhető az egész szék, mivel egy kompakt és teljes szerkezetről van szó.

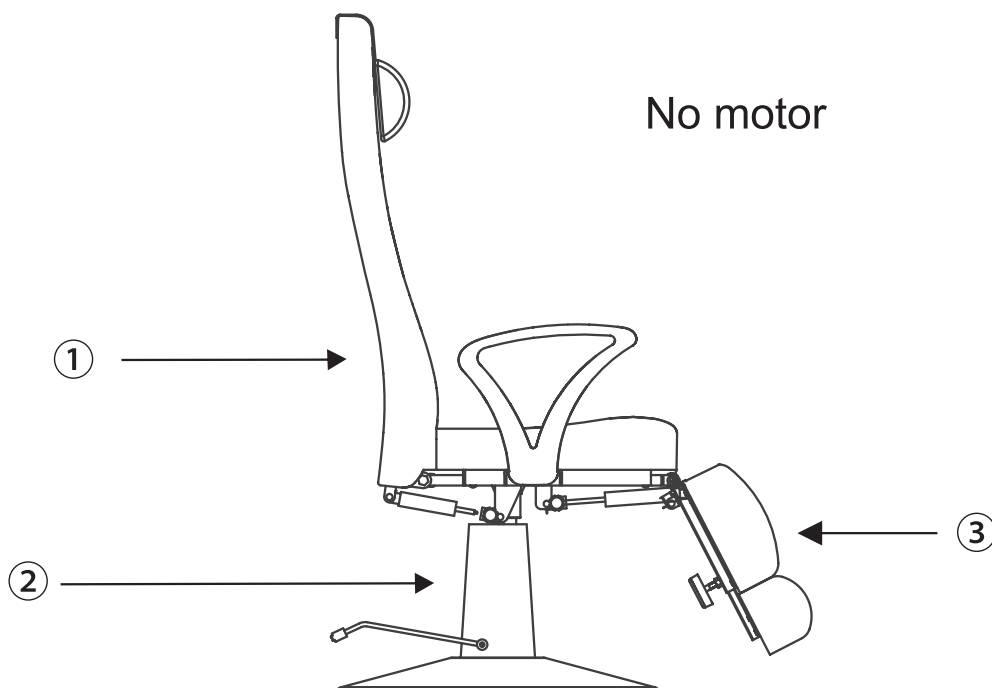

- ① a háttámla szögének beállítása (kézi beállítás)
- ② az egész szék emelési helyzetének beállítása (kézi beállítás)
- ③ a lábtartó szögének beállítása (kézi beállítás)

7 MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Környezeti hőmérséklet	0°C~+40°C
Relatív páratartalom	30%~90%
Az emelés névleges terhe	175 kg

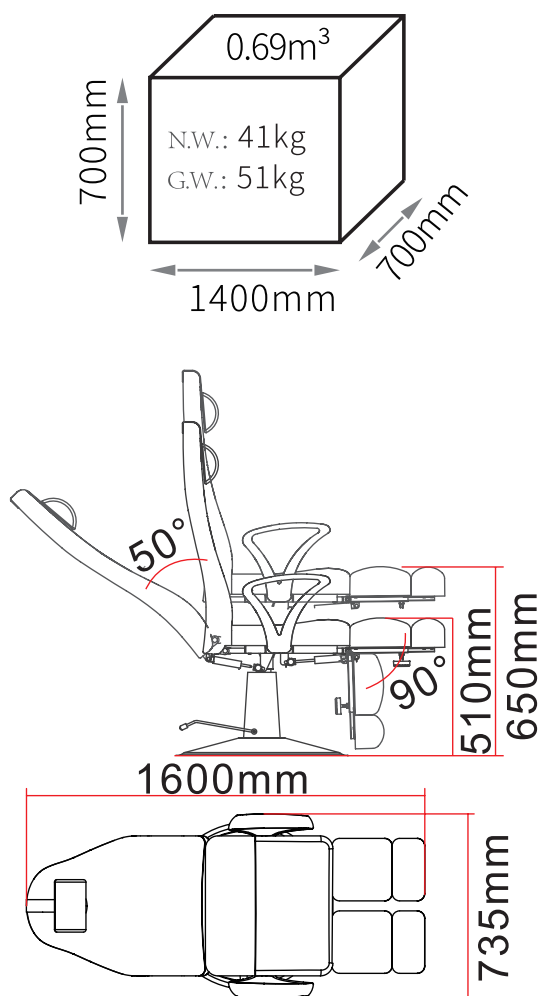

8 KARBANTARTÁS

1. Minden kezelés után használjon semleges oldatot a por, illetve a bőrön, a fémeken vagy a műanyag borításon lévő foltok eltüntetéséhez. Ne használjon fertőtlenítő oldatokat, például alkoholt, savakat vagy lúgos oldatokat. Ez lerövidítheti a bőrből készült és a műanyag borítású részek élettartamát.
2. Kérjük, hogy rendszeresen kenje a mozgó részeket (évente egyszer)

9 HIBAELEHÁRÍTÁS

HIBA	OK	MEGOLDÁS
Rendellenes zaj	1. A forgó részeket nem kenték meg megfelelően	1. Adjon hozzá kenőolajat
	2. A forgó csatlakozásokat (például csuklóspánatok, POM-ból készült alkatrész készletek) nem kenték meg megfelelően	2. Adjon hozzá kenőolajat

Ha a fent leírt műveletek elvégzése után a probléma továbbra is fennáll, a megoldásért forduljon az ügyfélszolgálatához vagy a szállítóhoz.

A GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEI

A 12 hónapos, standard Gima B2B jótállás érvényes.