


ARCVÉDŐ GIMA - PRZYŁBICA OCHRONNA GIMA

Cserélhető elülső párna
Wymienna wyściółka przednia

Felhajtható szemellenző
Przyłbica odchylana

Tépzárás szalag
Opaska z zapięciem na rzep

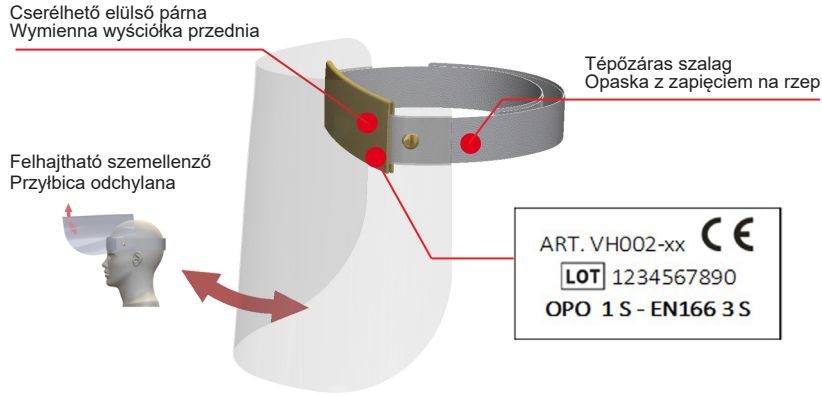

HU

JELŐLÉS ÉS A HASZNÁLAT JELZÉSEI

VH002: Termék modellje, xx szalag színkódja. LOT: tételszám OPO: A gyártó azonosítója; 1: Optikai osztály; S: alacsony energiahatás szimbóluma; -EN166 Referencia műszaki szabvány, 3: folyadékok szimbóluma; S: alacsony energiahatás szimbóluma, CE: CE tanúsítvány. Az arcvédő megfelel a 2016/425/EU rendeletnek. A 0426. számú bejelentett szervezet (Italcert Srl, Viale Sarca 33, Milánó) valamint megfelel az EN 166:2001 szabványnak. A CE megfelelőségi nyilatkozat a Gyártó és a Gima weboldalán érhető el: www.gimaitaly.com

ALKALMAZÁS ÉS BEÁLLÍTÁS

- 1) Helyezze fel az elülső tartót és szorítsa meg a tépzárral.
- 2) Helyezze a maszkot a homlokára, középre.
- 3) Feszítse meg a szíjakat, és rögzítse azokat a tépzárral a kívánt helyzetbe.

KARBANTARTÁS ÉS ÚJRA HASZNÁLAT

Minden használat előtt vizsgálja meg az arcvédőt: ellenőrizze annak tisztaságát, az átlátszóságát, a repedések hiányát és a varratok épségét. Ellenőrizze továbbá, hogy a fejpánt nem kopott-e el, és a fejhez rögzítve nem laza-e. Cserélje ki az arcvédőt, ha sérült - Idegen anyagokkal történt szennyeződés esetén tisztítsa meg - Cserélje ki sérülés vagy nem eltávolítható szennyeződés esetén.

Tisztítás: Az egyéni védőfelszerelést nem maró tisztítószerrel és langyos vízzel kell tisztítani, puha ruhával, amelyet az öblítési szakaszban is használni kell. A fertőtlenítéshez használjon alkohol alapú fertőtlenítő oldatokat. Az elülső tartót le lehet venni, és 40°-on ki lehet mosni mosógépben


Újrahasználat: Az arcvédő többször használható, ha előtte azt fertőtlenítette és kicserélte az elülső tartót

MEGŐRZÉS, TÁROLÁS, CSOMAGOLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Közvetlen napfénytől, fluoreszkáló fénytől, röntgensugaraktól és ózontól védendő. Száraz helyen tárolandó, a saját csomagolásukban és védje őket a deformációktól. Hőmérséklet: +5 °C ÷ +40 °C, Relatív páratartalom: < 60%. Csukott és jól lezárt tasakban szállítsa.

Lejáratú idő: 5 év, a végfelhasználónak történt eladástól számítva, ha a saját, eredeti csomagolásában tárolja és a fent említett körülmények között

A BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK

-  Az anyagok, amelyek érintkezésbe kerülhetnek a viselő bőrével, allergiás reakciókat válthatnak ki az arra érzékeny személyek esetében
A szemüvegen viselt arcvédő továbbíthatja az ütések, ezáltal veszélyt jelenthet a viselője számára
Cserélje ki az arcvédőt, ha a lencse megkarcolódott vagy megsérült
A védőberendezés nem alkalmas a nagy sebességű részecskék elleni védelemre sem környezeti, sem extrém hőmérsékleten.