





GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS


Forgalmazza - Dystribuowane przez:
Gima S.p.A
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ARCVÉDŐ GIMA - PRZYŁBICA OCHRONNA GIMA

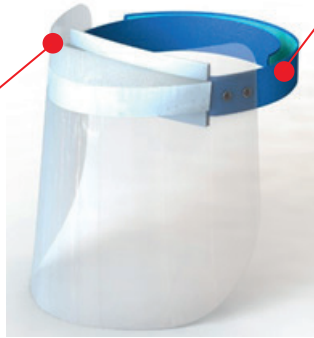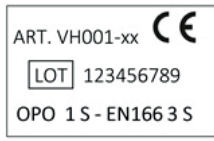

Tépzárás szalag
Opaska z zapięciem na rzep

Accesorii de blocare interschimabil
Utbytbar lăsetillbehör

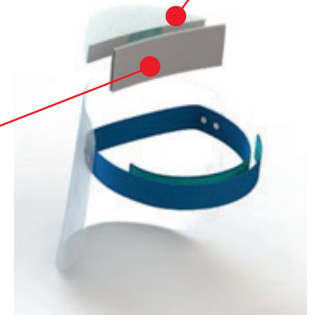

Cserélhető elülső párna
Wymienna wyściółka przednia

HU

JELŐLÉS ÉS A HASZNÁLAT JELZÉSEI

VH001: Termék modellje, xx szalag színkódja. LOT: tételszám OPO: A gyártó azonosítója; 1: Optikai osztály; S: alacsony energiahatás szimbóluma; -EN166 Referencia műszaki szabvány, 3: folyadékok szimbóluma; S: alacsony energiahatás szimbóluma, CE: CE tanúsítvány. Az arcvédő megfelel a 2016/425/EU rendeletnek. A 0426. számú bejelentett szervezet (Italcert Srl, Viale Sarca 33, Milánó) valamint megfelel az EN 166:2001 szabványnak. A CE megfelelőségi nyilatkozat a Gyártó és a Gima weboldalán érhető el: www.gimaitaly.com

ALKALMAZÁS ÉS BEÁLLÍTÁS

- 1) Helyezze fel az elülső tartót és szorítsa meg a tépzárral.
- 2) Helyezze a maszkot a homlokára, középre.
- 3) Feszítse meg a szíjakat, és rögzítse azokat a tépzárral a kívánt helyzetbe.

KARBANTARTÁS ÉS ÚJRA HASZNÁLAT

Minden használat előtt vizsgálja meg az arcvédőt: ellenőrizze annak tisztaságát, az átlátszóságát, a repedések hiányát és a varratok épségét. Ellenőrizze továbbá, hogy a fejpánt nem kopott-e el, és a fejhez rögzítve nem laza-e. Cserélje ki az arcvédőt, ha sérült - Idegen anyagokkal történt szennyeződés esetén tisztítsa meg - Cserélje ki sérülés vagy nem eltávolítható szennyeződés esetén.

Tisztítás: Az egyéni védőfelszerelést nem maró tisztítószerrel és langyos vízzel kell tisztítani, puha ruhával, amelyet az öblítési szakaszban is használni kell. A fertőtlenítéshez használjon alkohol alapú fertőtlenítő oldatokat. Az elülső tartót le lehet venni, és 40°-on ki lehet mosni mosógépben

Újrahasználat: Az arcvédő többször használható, ha előtte azt fertőtlenítette és kicserélte az elülső tartót és bármilyen opcionális zárótartozék.

MEGŐRZÉS, TÁROLÁS, CSOMAGOLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Közvetlen napfénytől, fluoresszkáló fénytől, röntgensugaraktól és ózontól védendő. Száraz helyen tárolandó, a saját csomagolásukban és védje őket a deformációktól. Hőmérséklet: +5 °C ÷ +40 °C, Relatív páratartalom: < 60%. Csukott és jól lezárt tasakban szállítsa.

Lejáratí idő: 5 év, a végfelhasználónak történt eladástól számítva, ha a saját, eredeti csomagolásában tárolja és a fent említett körülmények között

A BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK



Az anyagok, amelyek érintkezésbe kerülhetnek a viselő bőrével, allergiás reakciókat válthatnak ki az arra érzékeny személyek esetében

A szemüvegen viselt arcvédő továbbbírhatja az ütéseket, ezáltal veszélyt jelenthet a viselője számára

Cserélje ki az arcvédőt, ha a lencse megkarcolódott vagy megsérült

A védőberendezés nem alkalmas a nagy sebességű részecskék elleni védelemre sem környezeti, sem extrém hőmérsékleten.

