

Ear Wax Removal Tool Camera Instruction Manual

Modell: EWR-10



Kézikönyvverzió: A0
Kiállítás dátuma: 2024.09.

Rendeltetésyszerű használat
Az Ear Wax Removal Tool Camera egy világítással és kamerával ellátott kézi eszköz, amely a külső fül, a hallójárat és a dobhártya megfigyelésére szolgál egy okostelefon képernyőjén keresztül, valamint a fülzsír eltávolítására a megfigyelés során.

Célcsoport
Az Ear Wax Removal Tool Camera eszközt 1 évesnél idősebb gyermekeken felnőtt használhatja vagy 12 évesnél idősebb személyek önállóan használhatják.

Ellenjavallat
Ellenjavallat nincs

A szimbólumok magyarázata

	Figyelem
	Gyártói információk
	Gyártás dátuma
	Tekintse meg a használati utasítást
	Sorozatszám
	Tételkód
	Megfelel az ártalmatlanítással kapcsolatos helyi előírásoknak
	Orvostechikai eszköz
	Egyedi eszközazonosító
	Tartsa szárazon
	Vigyázat, törékeny
	Napfénytől tartsa távol.
	2 Védett 12,5 mm Ø és nagyobb szilárd idegen tárgyak ellen; 2 Védett a függőlegesen leeső vízcseppek ellen, ha a tok 15°-ig van megdöntve

	Nem ionizáló elektromágneses sugárzás
	BF-típusú alkatrész használata
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Importőr
	CE jelölés

Biztonsági előírások
Az eszköz használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és tartsa meg a használati útmutatót későbbi használatra. Amennyiben átadja az eszközt egy másik személynek, a használati utasítást is át kell adnia.
A Társaság igény szerint rendelkezésre állítja a kapcsolási rajzokat, az alkatrészek listáját, leírásokat vagy egyéb szükséges információt, hogy a Felhasználó műszaki szakemberét elősegítse az eszköz azon alkatrészeinek javításában, amelyek a gyártó szerint javíthatók.
Az anyagok, amelyekkel a felhasználó érintkezhet nem toxikusak, nem hatnak a szövetekre, és megfelelnek az ISO10993-5, ISO10993-10 és ISO10993-23 szabványoknak.

Általános figyelmeztetések

- Ez a termék nem használható diagnózis felállítására és betegek kezelésére, hacsak az orvos nem írja elő.
- Ez a termék nem alkalmas 12 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.
- Ne használja a terméket töltés közben.
- Az Ear Wax Removal Tool Camer használatakor a gyermekeket a szülőknél felügyelniük kell.
- A termék használata közben ügyeljen, hogy a termék legyen sértetlen, és ne legyenek hiányzó részek.
- Ha a hallójárat nem tökéletesen egyenes, finoman állítsa be az Ear Wax Removal Tool Camera eszköz pozícióját, hogy a dobhártya jól látható legyen.
- A kamera fókusz távolsága 15- 20 mm-re van beállítva. Igazítsa a távolságot a kamera lencséje és a fülé között, ha nem látja megfelelően a képet.

- Ne ejtse vagy merítse az eszközt vízbe vagy folyadékba.
- Ne törje el az Ear Wax Removal Tool Camera eszközt a kezével.
- Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát az eszköz üzemeltetésére.
- Ha az eszköz nem működik megfelelően, vagy kellemetlenül érzi magát illetve fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a használatot.
- Nem ajánlott mozgásban lévő háziallatokon használni.
- Ne hagyja a kis részeket olyan helyen, ahol gyermekek elérik. A gyermekek lenyelhetik. Ha egy gyermek véletlenül lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.
- HA először használja, javasoljuk, hogy óvatosan és lassan közelítse meg a hallójáratot.
- Kövesse a használati utasítást az első használatkor.
- Ne módosítsa a készüléket a gyártó engedélye nélkül.
- Ártalmatlanítsa a készüléket az élettartama végén. Kövesse a helyi rendeleteket és újrahasznosítási utasításokat a készülék ártalmatlanítását vagy újra hasznosítását illetően.
- Nincs szükség karbantartásra vagy szervizelésre a használat során.
- Ne használja a terméket, ha károsodás jelei találhatók rajta. Ha sérült, ne próbálja megjavítani a készüléket! Forduljon a viszonteladóhoz.
- Az Ear Wax Removal Tool Camera eszközt használat közben nem szabad javítani vagy szervizelni.
- Ha a teljesítmény változik (pl.: rendellenes kijelzés), azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon azonnal az ügyfélszolgálatához.

Megjegyzés

Ha a felhasználók vagy a betegek az eszközzel kapcsolatban súlyos balesetet tapasztalnak, kérjük, jelentse a gyártónak és a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Energia biztonság


- Ellenőrizze a névleges feszültséget, mielőtt a készüléket az elektromos aljzathoz csatlakoztatja. A termék feltöltéséhez használjon egy szokásos 5 V-os 0,5 A-es töltőcsatlakozót.

- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tölts fel a készüléket legalább 1 havonta egyszer, hogy elkerülje, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön, és visszafordíthatatlanul károsodjon.
- Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig közvetlen napfénynek kitéve. Helyezzen az AC adaptert és a készüléket szellőző helyre, például asztalra vagy padlóra, amikor az elem töltésére használja.
- Ne helyezzen nehéz tárgyat a termékre.
- Az AC adapter és a készülék felmelegedhet a töltés közben.
- Semmilyen esetben se helyezze a terméket hőforrás közelébe
- Ha az eszköz szokatlan szagot áraszt, túlságosan felmelegszik vagy felduzzad vagy deformálódik, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.

Szállítási terjedelem

- 1 Ear Wax Removal Tool Camera
- 1 töltőkábel
- 1 Kezelési útmutató

A termék szerkezete

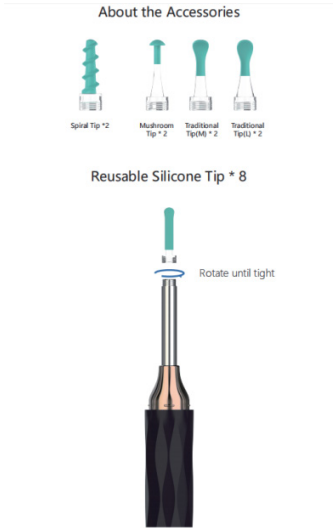

Előkészítés

Elem töltése
Használat előtt tölts fel a készüléket csatlakoztatva a töltőkábelt. Használjon egy USB-A tápkábel adaptert vagy számítógép portot az eszköz töltéséhez. Az adapternek meg kell felelnie az IEC 60601-1 szabvány követelményeinek és a specifikációnak meg kell felelnie a következő követelményeknek: bemenet: AC 100~240V 50/60 Hz, kimenet: DC 5V 0.5A. LED jelzőfény
Az eszközt fel kell tölteni, amikor az alkalmazás azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony.
 A LED kéken villog: A készüléket fel kell tölteni.
 Állandó kék LED: A készülék töltés alatt.
 Villogó fehér LED: A LED jelzőfény folyamatosan fehérén villog, ha az eszköz be van kapcsolva, de nincs társítva az alkalmazáshoz.
 Állandó fehér LED: Csatlakozás létrejött.

Használat

Megjegyzés: Az eszköz használata előtt le kell tölteni

az Ear Wax Removal Tool Camera alkalmazást.




Ezzel az alkalmazással ellenőrizheti a fület és videofelvételeket/képeket készíthet róla, és felöltheti a távegészségügyi rendszerbe a változások nyomon követéséhez.

- Keresse a „Cooler”-t a telefon alkalmazás-áruházában, tölts le és telepítse.
- Vegye ki az eszközt a dobozból.

Megjegyzés: Tisztítsa meg a készülék felületét 75%-os alkohol oldattal, mielőtt a bőrhöz érne.

- Kiválaszthatja a három kiegészítő egyikét, és lassan telepítheti a készülékre.
- Nyomja meg, és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot a készüléken. A jelzőfény fehérén villog, jelezvén, hogy a készülék be van kapcsolva, és készen áll, hogy társítsa az app-hoz.
- Csatlakozzon a „Cooler-XXXX” WIFI-hez egy mobiltelefonnal, és az eszköz szinkronizálni fogja az ALKALMAZÁS képernyőjét. (XXXX egy véletlen szám)

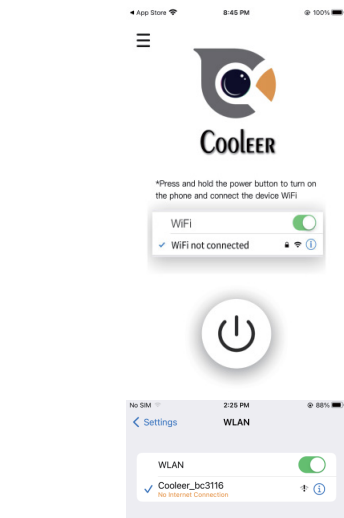

Megjegyzés: A Wi-Fi termékek csak 2,4 Ghz Wi-Fi jelhez csatlakoznak. A jelerősség a helytől, a sávszélességtől és a hálózat erősségétől függően változhat.

- Miután társította az eszközt az alkalmazáshoz, a jelzőfény állandó fehéren fog világítani.

Térjen vissza az fEar Wax Removal Tool Camera alkalmazáshoz, nyomja meg a középső gombot a kamera bekapcsolásához és a képernyő valós idejű megtekintéséhez.

Megjegyzés: Ne helyezze túl mélyre a füljratba, és ha a felhasználó fájdalmat érez, ne használja, és forduljon orvoshoz.

- A készülék gombjának rövid megnyomásával rögzíti az aktuális képet, és egy albumba menti.
- Kapcsolja ki az eszközt. Amikor befejezte az eszköz használatát, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a kikapcsoláshoz. Ha az eszköz be van kapcsolva, 5 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
APP kijelző nem működik megfelelően.	Indítsa újra az eszközt és az alkalmazást, majd csatlakoztassa újra az eszköz hálózatát, és lépjen vissza az alkalmazáshoz.
Miután visszatért az alkalmazáshoz, az eszköz hálózatára történő csatlakozáskor a felhasználónak továbbra is társítania kell az eszközt a Wi-Fi-n keresztül.	
Az eszköz nem válaszol az Indításra.	Használja a mellékelt töltőkábelt az eszköz feltöltéséhez.
a jelzőfény villog.	
Az app néha kikapcsol.	Távolítsa el és telepítse újra az alkalmazást.

Tisztítás és karbantartás

- Kapcsolja ki, és húzza ki az eszközt a tisztítás előtt.
- Minden használat előtt és után tisztítsa meg a kamera lenscéit egy puha, száraz mikroszálaskendővel vagy pamutkendővel egy kevés 70%-80%-os alkoholba mártva. Ne használjon túl sok maró alkoholt, és ne használjon tiszta izopropil-alkoholt.
- Ha nem tiszta képet lát, ellenőrizze, hogy a kamera lenscéje tiszta-e. Használjon egy kis vattakorongot, hogy letörölje róla az esetleges fülzsírt vagy szennyeződést.
- Várjon kb. 5 percet a tisztítás után, hogy az alkohol teljesen elpárologjon, mielőtt használja az eszközt.
- Soha ne használjon maró tisztítószereket vagy oldószereket, mivel károsíthatják az eszköz felületét vagy a belső alkatrészeket.
- Ügyeljen, hogy ne kerüljön nedvesség a készülék nyílásaiba vagy portjaiba. Engedje teljesen megszáradni az eszközt, mielőtt behelyezi vagy használja.
- NE törölje vagy nyomja meg túl erősen az Ear Wax Removal Tool Camera eszköz lenscéjét, mert ez károsíthatja a lenscéit.
- NE próbálja meg glutáraldehiddel, etilén-oxid gázzal, gőzzel vagy más folyadék- vagy gázfertőtlenítő szerrel fertőtleníteni az Ear Wax Removal Tool Camera eszközt.

Specifikációk

- A termék neve: Ear Wax Removal Tool Camera
- Modell: EWR-10

- Hálózati szabvány: 802.11g/n protokoll, 802.11b protokoll
- Működési frekvencia: 2,4 GHz
- Képtáviteli sebesség: 30fps
- Kamera fényforrás: 6 LED
- Optimális fókusztávolság: 15–20 mm
- Pixel: 0.3M
- Giroszkóp: 3 tengely
- Teljesítmény bemenet: DC 5V, 0,5A
- Akkumulátor típusa: 200 mAh lítium akkumulátor
- Áramütés elleni védelem fokozata: BF típus
- Áramütés elleni védelem típusa: Belső energiellátás
- Súly: 18,2 g
- Méret: 14*14*139,2 mm
- Üzemi élettartam: Három év
- Működési környezet: 10°C – 40°C, relatív páratartalom 15% – 93%, nyomás 700hPa – 1060hPa
- Szállítási és tárolási környezet: -20°C – 55°C, relatív páratartalom 15% – 93%, nyomás 700hPa – to1060hPa

Alapvető teljesítmény

- Működési frekvencia: 2,4 GHz
- Optimális fókusztávolság: 15–20 mm
- Pixel: 0.3M

Appendix: EMC information-Guidance and manufacturer's declarations

CAUTION:

- Don't near active HF surgical equipment and the RF shielded room of an ME system for magnetic resonance imaging, where the intensity of EM disturbances is high.
- Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.
- Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.”
- Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no

closer than 30 cm (12 inches) to any part of the equipment, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

Electromagnetic Emission

Guidance and manufacturer's statement - Electromagnetic emission	
Emission test	Compliance
RF emissions CISPR 11	Group 1
RF emissions CISPR 11	Class B
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not applicable
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Not applicable

Electromagnetic Immunity

Guidance and manufacturer's declaration - Electromagnetic Immunity		
Immunity Test	IEC 60601-1-2 Test level	Compliance level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	Not applicable	Not applicable
Surge IEC 61000-4-5	Not applicable	Not applicable
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	Not applicable	Not applicable
Power frequency magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
Conducted RF IEC61000-4-6	Not applicable	Not applicable
Radiated RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM at 1 kHz
NOTE UT is the a.c. mians voltage prior to application of the test level.		

Electromagnetic Immunity

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic Immunity						
Radiated RF IEC61000-4-3 (Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless communications equipment)	Test Frequency (MHz)	Band (MHz)	Service	Modulation	IEC 60601-1-2 Test Level (V/m)	Compliance level (V/m)
	385	380-390	TETRA 400	Pulse modulation 18 Hz	27	27
	450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz deviation 1 kHz sine	28	28
	710	704-787	LTE Band 13, 17	Pulse modulation 217 Hz	9	9
	745					
	780					
	810	800-960	GSM 800/ 900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation 18 Hz	28	28
	870					
	930					
	1720	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulse modulation 217 Hz	28	28
	1845					
	1970					
	2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation 217 Hz	28	28

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic Immunity				
Radiated RF IEC61000-4-39 (Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to proximity magnetic fields)	Test Frequency	Modulation	IEC 60601-1-2 Test Level (A/m)	Compliance level (A/m)
	30 kHz	CW	8	8
	134,2 kHz	Pulse modulation 2.1 kHz	65	65
	13,56 kHz	Pulse modulation 50 kHz	7,5	7,5

EC

REP

Share Info GmbH
Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf, GERMANY
Tel: 0049 179 5666 508
eu-rep@share-info.com

AOJ HEALTH Technology Co.,Ltd.
Building No.1, 1-3F, Building No.2, 2F, AOJ Industrial Park
Sanwei Community, Hangcheng Street, Bao'an District
Shenzhen 518126 CHINA
Made in China