







Directions for use

Ambu® Man School



Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com

492516040 - 11/2016 - V01 - Printed in China

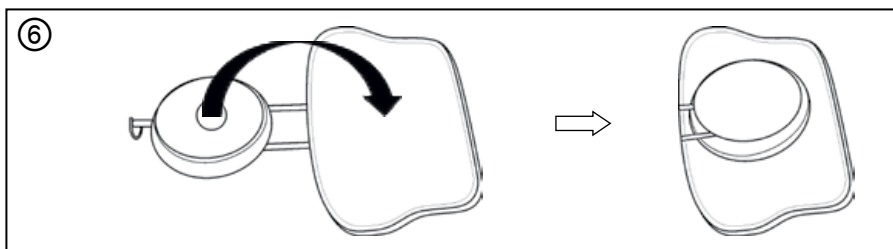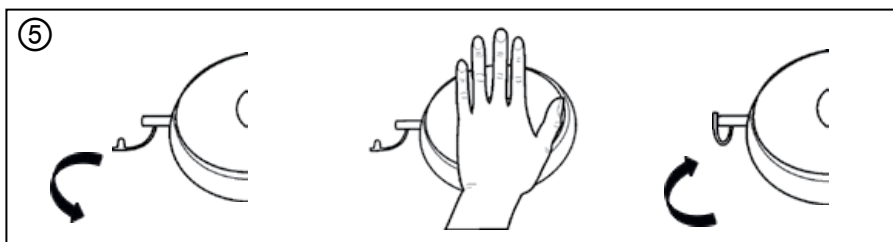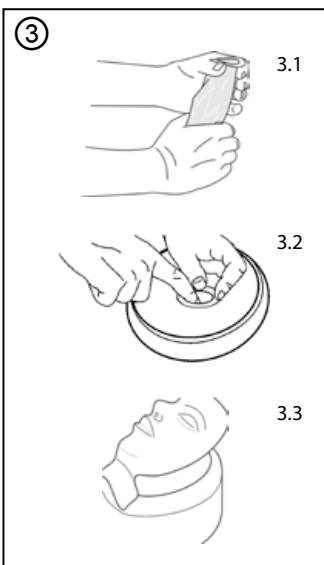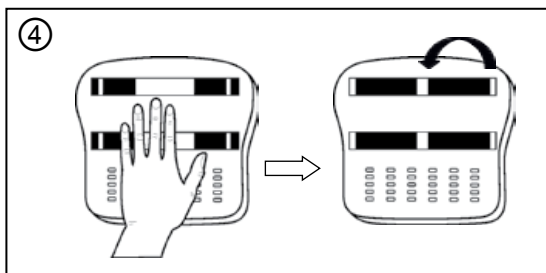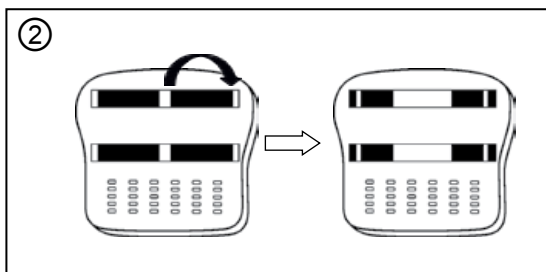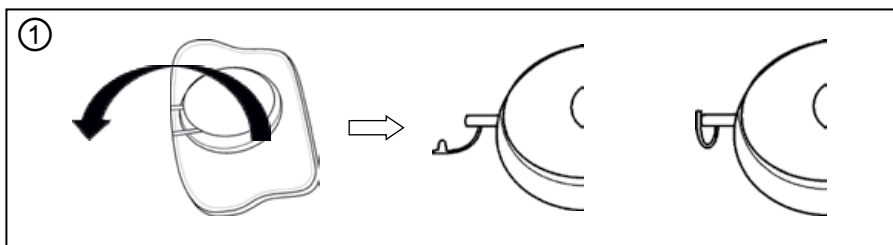

Tartalom

1. Bevezetés	44
2. Műszaki jellemzők	44
2.1. Méretek	44
2.2. Anyag	44
2.3. Használat és tárolás	44
3. Használat	44
3.1. Előkészítés az oktatásra	44
3.2. Oktatás után	45
3.3. Tisztítás	45
3.3.1. Arcrész	45
3.3.2. A fej és a test tisztítása	45

1. Bevezetés

Az AmbuMan School segítségével bemutathatók és oktathatók az alapvető újraélesztési folyamatok.

Oktatói/tanári felügyelet mellett diákok oktatására készült.

Az AmbuMan School segítségével az újraélesztési folyamat alábbi pontjai oktathatóak.

- Szájból szájba lélegeztetés
- Szájból orrba lélegeztetés
- Külső mellkaskompresszió
- AED párnák felhelyezése

2. Műszaki jellemzők

2.1. Méretek

Tömeg: 0,8 kg

Mérete (H x Sz x M): 45 x 30 x 10 cm

2.2. Anyag

Pántok	Nejlon	Fej	Szilikon
Alsó lemez	Polikarbonát	Arcrész	Polivinil-klorid
Belső rész	Hőre lágyuló elasztomer	Tüdőzsák	Polivinil-klorid
Mellkas	Polipropilén	Fejzsák	Polietilén

2.3. Használat és tárolás

Tárolási hőmérséklet (nem lecsapódó): -18 °C (-0,4 °F) és 40 °C (105 °F) között

Használati hőmérséklet (nem lecsapódó): -5 °C (23 °F) és 40 °C (105 °F) között

Páratartalom: 5–95 %

3. Használat

3.1. Előkészítés az oktatásra

Hajtsa ki a fejet, és fújja fel. A felfújást követően zárja le a levegőszelepet. ①

Fordítsa meg a tanbábut, középen oldja ki a pántokat, majd rögzítse őket a külső tépőzárakon. ②

Helyezze be a fejzsákot, majd illessze az arcrészt a fejre. ③

A tanbábu készen áll az újraélesztési folyamat oktatására.

MEGJEGYZÉS:

A fej beszenyeződésének elkerülése érdekében a fejet csak pumpa vagy fecskendő használatával fújja fel.

Ha használat közben összeesik a fej, nyissa ki a fejszelepet és a kívánt mértékben fújja fel. Soha ne használja a tanbábut fejzsák nélkül, mivel így a tanbábu belseje beszenyeződhet.

A fejzsákot és az arcrészt minden új tanulónál cserélni kell.

3.2. Oktatás után

Távolítsa el az arcrészt és a fejzsákot. A fejzsákot ki kell dobni.

A 3.3-as részben leírt módon tisztítsa meg a testet és az arcrészt.

Fordítsa meg a tanbábut, majd az összenyomáshoz középen nyomja be az alsó lemezt.

Először húzza ki oldalra a pántokat, majd a tépőzárral rögzítse őket az alsó lemez közepén. ④

Nyissa ki a levegőszelepet, a leengedéshez nyomja össze a fejet, majd zárja le a szelepet. ⑤

Hajtsa a fejet a mellkasra, majd tegye a tanbábut a tárolódobozba. ⑥

3.3. Tisztítás

3.3.1. Arcrész

Kézi tisztítás

A. Tiszta vízzel öblítse el az arcrészt.

B. Mossa ki a darabokat meleg, legfeljebb 65 °C-os (150 °F), enyhe mosószeres vízben.

C. Alaposan öblítse el a darabokat tiszta vízben, hogy a mosószer minden maradványát eltávolítsa.

Gépi tisztítás

Az arcrész mosható hagyományos mosógépben. Használjon normál mennyiségű mosószert, és legfeljebb 70 °C (158 °F) hőmérsékletű mosóprogramot válasszon.

Fertőtlenítés

A. Tegye a darabokat nátrium-hipoklorit legalább 500 mg/l aktív klórt tartalmazó oldatába (1/4 pohár folyékony háztartási fehérítő kb. 4 liter csapvízben) 10 percre. Az oldatnak frissnek kell lennie; használat után ki kell önteni.

B. Tegye a darabokat 70%-os alkoholos klórhexidin oldatba 2 percre (70% etil-alkohol és 0,5% klórhexidin).

C. Vegyi fertőtlenítés is végezhető elismert, polivinil-kloridhoz (PVC) használható fertőtlenítőszerrel. A forgalmazó adagolásra és a fertőtlenítési időtartamra vonatkozó utasításait szigorúan be kell tartani.

D. Fertőtlenítés után mindig öblítse el a darabokat tiszta vízben, és mielőtt eltenné, hagyja azokat száradni.

MEGJEGYZÉS: Az arcmaszknem tehető ki főzésnek, autoklávozásnak vagy gázsterilizálásnak.

3.3.2. A fej és a test tisztítása

Tiszta vízzel megnedvesített ruhával törölje át a fejet és a testet.