

SIGILLI IN PLASTICA CON INDICATORE DI VAPORE**PLASTIC SECURITY SEAL WITH STEAM INDICATOR****SCEAU DE SÉCURITÉ EN PLASTIQUE AVEC INDICATEUR DE VAPEUR****SELLO DE SEGURIDAD PLÁSTICO CON INDICADOR DE VAPOR****SELO DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO COM INDICADOR DE VAPOR****SIGILLARE DE SECURITATE DIN PLASTIC CU INDICATOR DE ABUR****MŰANYAG BIZTONSÁGI TÖMÍTÉS GŐZJELZŐVEL**

- Manuale d'uso e manutenzione
- Use and maintenance book
- Instructions de fonctionnement et entretien
- Manual de uso y mantenimiento

- Manual de uso e manutenção
- Manual de utilizare și întreținere
- Kezelési és karbantartási útmutató

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

CUIDADO: Os operadores devem ler e compreender este manual completamente antes de usar o produto.

ATENȚIE: Operatorii trebuie să citească și să înțeleagă complet acest manual înainte de a utiliza produsul.

VIGYÁZAT: A kezelőknek el kell olvasniuk és meg kell érteniük ezt a kézikönyvet a termék használata előtt.



	REF
GIMA 37330	902.111.1000
GIMA 37332	902.112.1000
GIMA 37340	902.113.1000
GIMA 37341	902.115.1000
GIMA 37343	902.114.1000



SP Medikal San Ltd. Sti,
Deliklikaya Mah. Cubuklu Cad. 39
Arnavutkoy Istanbul Turkey
info@spmedikal.com
Made in Turkey



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

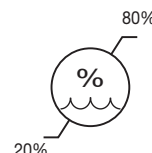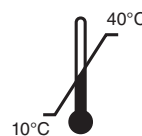

a tartály ne nyíljon ki a sterilizálás és a használat között. Egy 1. típusú gőzjelzővel rendelkezik, annak megkülönböztetésére, hogy a tartály átesett a sterilizáláson vagy nem (ha van).

Az 1. típusú gőzjelző nem nyújt következtetést a tartály sterilizálásával vagy annak tartalmával kapcsolatban.

Jellemzők:

A Tartály tömítés egy speciális PP anyagból készült (DEHP mentes), amely lágyulási pontja 150° C feletti. A Tartály tömítések gőzjelzővel vagy anélkül állnak rendelkezésre.

Minden Tartály tömítés kb 30 x 50 mm méretű (zárva). A vegyi jelző liláról zöldre vált, ha egy gőzsterilizálóval sterilizálja: Ciklus paraméter: 134° C 3,5 percig vagy 121° C 15 percig. A használt tinta nem mérgező, nehézfémmentes tinta.

További részletekért lásd a műszaki adatlapot.

A Tartály tömítés csap mérete 27 mm.

Rendeltetésszerű használat:

Ez a Tartály tömítés 121°C-on végzett, 15 perces és 134°C-on végzett 3,5 perces sterilizációs ciklus paraméterhez ajánlott, de egyéb sterilizációs módszerekhez is használható (a jelző nélküli változatok)



Figyelmeztetés:

Ne használja ezt a Tartály tömítést a fent említett SV-től eltérő SV-jű gőzciklusban.

A Tartály tömítéssel előforduló bármely súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak.

Használati utasítás:

Helyezze a Tartály tömítést a csapjával együtt a merev tartály rögzítéséhez, és zárja be.

Helyezze a tartályt a sterilizálóba, és indítsa el a ciklust.

A sterilizálás befejeztével a gőzjelző eléri a végleges színét (zöld).

Tárolási feltételek:

Kérjük, vegye figyelembe a termék címkéjén található tárolási feltételeket. Az SP Medikal csak akkor garantálja a termék szabványnak való megfelelését a lejárat időn belül, ha betartották a tárolási feltételeket. Ne tegye ki a Tartály tömítést sterilizáló anyagoknak vagy egyéb, bármilyen típusú vegyi anyagoknak.

Szabványoknak való megfelelés:

A Tartály tömítések megfelelnek az MSZ EN 868-8 és ISO 11140 - 1: 2014 szabványoknak (gőzjelző esetében)

Műszaki adatlap:

Ezekhez a termékekhez műszaki adatlapok állnak rendelkezésre, amelyekben hivatkozások találhatók a szabványokra, a csomagolásra, a tanúsítványokra stb.

Ez a használati utasítás a jövőben változhat.

Eltarthatósági idő:

A Tartály tömítéseknek nincs eltarthatósági idejük, de megfelelő körülményke között tárolandók. A gyártási idő és a tételszám a csomagolás címkéjén található.

Szimbólumok:

	Gyártás dátuma		Száraz, hűvös helyen tárolandó
	Gyártó		Napfénytől védve tárolandó
	Termékkód		és °C között tárolandó
	Tételszám		Páratartalom határérték
	Lejárat dátum		Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket)
	Importálta		Olvassa el a használati utasításokat

MAGYAR

Használati utasítás

(Dfu tartály tömítés 1-2025 C változat)

Ez a használati utasítás az alábbi Steritech™ termékekre érvényes:

Tartály tömítés:

- 902.111.1000 Tartály tömítés 2,7cm Kék
- 902.112.1000 Tartály tömítés 2,7cm Kék, gőzjelzővel
- 902.113.1000 Tartály tömítés 2,7cm Piros
- 902.114.1000 Tartály tömítés 2,7cm Piros, gőzjelzővel
- 902.115.1000 Tartály tömítés 2,7cm Sárga
- 902.116.1000 Tartály tömítés 2,7cm Sárga, gőzjelzővel
- 902.117.1000 Tartály tömítés 2,7cm Zöld
- 902.118.1000 Tartály tömítés 2,7cm Zöld, gőzjelzővel



Figyelmeztetések:

A termékek kézhezvételekor kérjük, ellenőrizze, hogy a csomagolás sértetlen-e és győződjön meg az anyagok lejárat idejéről.

Bevezetés:

A Tartály tömítést merev tartályokkal való használatra fejlesztették ki a rögzítés biztosítására, a sterilizálás elvégzése előtt. Biztosítja, hogy

GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A 12 hónapos Gima B2B standard jóttállás érvényes