

GIMA 43430



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China




KDB-506



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

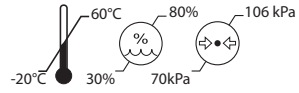

kell a gyártó felé és annak a tagállamnak a hivatalos szerve felé, ahol az Ön székhelye található.

CÍMKÉK, CSOMAGOLÁS LOGÓTERVEZÉS:

Szimbólum	Jelentése	Szimbólum	Jelentése
	Az (EU) 2017/745 rendeletnek megfelelő orvostechnikai eszköz		Orvosi eszköz
	Gyártó		Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Gyártási dátum		Tárolja napfénytől távol
	Tételszám		Nem steril
	Figyelmeztetés: Olvassa el és kövesse figyelmesen a használati utasításokat (figyelmeztetéseket).		Termék kódja
	Olvassa el a használati utasítást		Tárolja hűvös, száraz helyen
	Importált innen		és °C között tárolandó
	Páratartalom határérték		Légköri nyomás határértéke
	Egyedi azonosító		

MAGYAR

A TERMÉK NEVE

Emelő- és átvivőeszköz

Modellszám: KDB-506

Súlykapacitás: 125 Kg.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Az emelő és szállító eszköz az alsó test bénulásával, láb- és lábfejproblémákkal küzdő betegek vagy idősök szállítására szolgál az ágyból, a kerekesszékből, a székről vagy a WC-ülőről. Ez az eszköz nagymértékben megkönnyíti a gondozók munkáját. Javítja az ápolói munka hatékonyságát, csökkenti az ápolási kockázatot.

JAVALLAT

Csak emberek számára használható.

TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK/KARBANTARTÁS

Ha szükséges, tisztítsa meg az eszközt meleg vízzel vagy alkohollal dörzsölve, és győződjön meg arról, hogy a görgők nem piszkosak és nincs rajtuk szőr. Ne használjon fenolt vagy klórt tartalmazó tisztítószeret, mert ez károsíthatja az alumíniumot és a poliamid anyagokat.

A rozsdásodás esetleges kialakulásának elkerülése érdekében figyeljen a következő pontokra a jobb karbantartás és az éte lift javítása érdekében:

* Használat után minden alkalommal távolítsa el a maró anyagokat, például a tusfürdőt, sampont stb.

*Ezután tolja a terméket szellőztetett, száraz helyre, ami ugyancsak jó szokás minden használat után.

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Kérjük, olvassa el és kövesse az alábbiakban felsorolt biztonsági óvintézkedéseket, amelyek egyszerűvé és problémamentessé tehetik a műveletet.

Használat előtt olvassa el és értelmezze ezt az utasítást

FIGYELMEZTETÉS - Fontos biztonsági információk olyan veszélyekkel kapcsolatban, amelyek súlyos sérülést okozhatnak

FIGYELEM - Információ a termék károsodásának elkerülése érdekében.

MEGJEGYZÉS - Információ, amelyre különös figyelmet kell fordítania.

FIGYELMEZTETÉS

- *MINDIG tervezze meg az emelési műveleteket, mielőtt elkezdené.
- *MINDIG végezze el a NAPI ELLENŐRZŐLISTA előírásait az eszköz használata előtt.
- *MINDIG ismerkedjen meg az eszköz kezelőszerveivel és biztonsági funkcióival mielőtt felemelné a beteget.
- *NE használjon sérült eszközt.
- *MINDIG az utasításoknak megfelelően telepítse az eszközt.
- *MINDIG ellenőrizze, hogy az eszköz biztonságos terhelése megfelel-e a beteg súlyának
- *MINDIG kövesse a felhasználói kézikönyv utasításait az eszköz működtetéséhez.
- *MINDIG zárt görgőkkel emelje fel a beteget. Győződjön meg róla, hogy a váltót a megfelelő súlyponthoz igazította.
- *NE próbálja meg az eszközt a működtető, az akasztó vagy a beteg felé nyomva mozgatni.
- *MINDIG a nyomókarral mozgassa az eszközt.
- *MINDIG tartsa a beteget a minimális kényelmes helyzetben az áthelyezés előtt.
- *NE mozgassa az eszközt 3 km/h, 0.8m/s sebesség felett, ha beteg ül rajta.
- *NE mozgassa egyenetlen vagy durva talajon. Különösen akkor, ha beteg ül rajta.
- *NE erőltessen biztonsági ellenőrzéseket. Minden kezelőszerv könnyen használható, és nem igényel túlzott erőt.
- *NE parkolja a eszközt a beteggel semmilyen lejtőn.
- *NE emelje fel a beteget, kivéve, ha erre képzett és képes.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Az eszköz szállítási és tárolási környezete a következő:

- a) Hőmérséklet-tartomány : -20°C~+60°C.
- b) A relatív páratartalom 30% és 80% között mozog.
- c) A légköri nyomás 70 kPa és 106 kPa között mozog

CSOMAG:

A csomag egy készlet 1 kartondobozban.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Az ártalmatlanítási korlátozások a használat során fellépő szennyeződéstől függenek, és a nemzeti vagy helyi jogszabályok hatálya alá tartoznak.

Minden, az általunk szolgáltatott orvostechnikai eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet jelenteni

GIMA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A termékre a Gima szokásos, 12 hónapos B2B garanciája érvényes.