



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**MEDICAL TROLLEY
CARRELLO CLINICO
CHARIOT CLINIQUE
CARRO DE ANESTESIA
CARRINHO CLÍNICO
KLINIKWAGEN
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
КЛИНИЧНА КОЛИЧКА
ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK
KLINIKKAVAUNU
KLINIČKA KOLICA
KLINIKAI KEREEKES KOCSI
MEDICININIS VEŽIMĖLIS
MEDISCHE KAR
WÓZEK MEDYCZNY
CĂRUCIOR PENTRU
INSTRUMENTAR MEDICAL
CLINICAL TROLLEY**



MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO - BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ОНЈЕКИРЈА - VARTOTOJO VADOVAS

Gima 45715

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce / Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó / производител / Valmistaja / Gamintojas:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

REF SKR-CT625-1


Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja / Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

1. Kerekek beépítése

Igazítsa a kerékcsavart a kocsi alján található rögzítőfurathoz, és dugja be a kereket. Helyezze be a csavart a rögzítőfuratba, és húzza meg az óramutató járásával megegyező irányba.

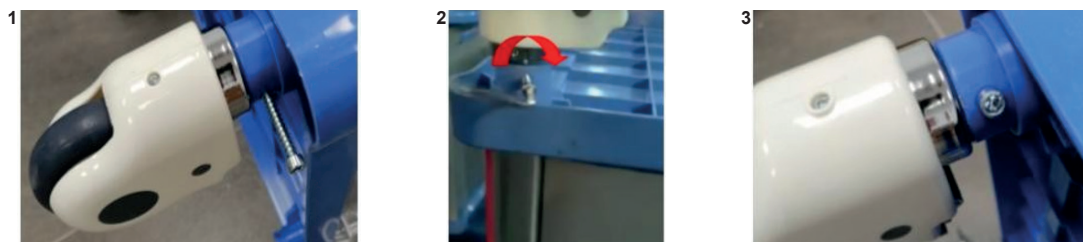

2. Kerekek használata

A kerék rögzítése: Miután az aneszteziológiai kocsit a kívánt helyzetbe tolta, a lábával nyomja meg a BE gombot, és rögzítse a kereket. Egy kattanást hall, az alábbi ábrán látható módon.

Kerék feloldása: Nyomja meg a KI gombot a lábával, kattanás jelzi, hogy kioldotta a kereket.



3. Hibák kizárása

Gyakori hibák	Valószínűsíthető okok	Módszerek kizárása
Nehéz mozgatni a kocsit	1. A kerék a fék kioldása nélkül rögzül 2. A kerék megsérült	1. Engedje ki a féket, ellenőrizze a 2.1 pontot 2. Cserélje ki a kereket, ellenőrizze az 1.2. pontot

4. Karbantartás

- Az aneszteziológiai kocsi biztonságos használatához végezzen rendszeres biztonsági ellenőrzéseket az aneszteziológiai kocsin. Javasolt félévente ellenőrizze, hogy a csatlakozások megfelelőek és a működnek.
- Amikor az aneszteziológiai kocsi váza előregszik és elér egy bizonyos szervizelési időt, akkor a fém és műanyag részei újrahaznosíthatók.
- Használat közben kerülje a panel karcolását éles eszközökkel vagy késekkel, és rendszeresen tisztítsa meg, hogy tiszta és száraz maradjon.
- Ha a panel véletlenül foltos lesz, javasolt megtisztítani. Ne használjon lúgos vagy maró vegyszereket az aneszteziológiai kocsi tisztításához, mert a rozsdamentes acél felületek elrozsdásodhatnak.
- Rendszeresen ellenőrizze a kerekeket, hogy elkerülje az ütések vagy a túlterhelést, amittől a kerekek károsodhatnak.
- Fékezés során tilos erőltetni a kerekek fékezését, mert ez károsítja a fékrendszert.
- A kerék gumibroncs felületének kopása vizuális ellenőrzéssel kimutatható. Előfordulhat, hogy fonaldarabkák és egyéb lerakódások tekerednek a kerekekre, ezért távolítsa el a kerék csavarjait és anyáit, takarítsa fel a törmeléket, és ellenőrizze, hogy a kerékcsofégy sérült-e. Ha az alkatrészek nem sérültek, akkor újra összeszerelhetők és használhatók.
- A kerékcserét a használat ideje, a kopás és elhasználódás fokozata jelzi. Kerékcseré során ellenőrizze, hogy a tengelyek csavarjai és anyái jól össze vannak-e szerelve és megfelelően csatlakoznak. Lehetőség szerint használjon rögzítő alátéteket vagy anyákat a folyamat megkönnyítésére.
- Ellenőrizze rendszeresen a fékek felszerelt kerekeket, hogy a fékek megfelelően működnek-e. Naponta egyszer, vagy minden használat előtt ellenőrizze a fékeket. Ha egy aneszteziológiai kocsin több fékezőkerék is van, akkor az egyes fékezőkerekek fékteljesítményét ellenőrizheti, ha egyszerre egyet rögzít és megpróbálja így eltolni a kocsit. Ha a fék a kerekek kopása vagy sérülése miatt nem megfelelő, akkor azonnal cserélje ki a kereket, majd ellenőrizze újra a fékrendszert.
- Ha a kerék fékrendszerének mechanizmusa sérült, és a fék javításra vagy cserére szorul, akkor keresse fel az értékesítés utáni ügyfélszolgálatot vagy a cégünk által biztosított hivatalos vizszonteladót. Fékcserékor ellenőrizze a kerekek fékteljesítményét.

5. Csomagolás, szállítás, tárolás

- A kocsit a szerződés vagy a termékszabvány szerint csomagoljuk.
- Kerülje a nagyon gyors tolást, az erős rezgést, és szállítás során óvja a napfénytől és az esőtől.
- A kocsi megfelelő tárolása:
 - Környezeti hőmérséklet: +5°C ~ +40°C.
 - Relatív páratartalom: ≤ 85%.
 - Légköri nyomás: 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Értékesítés utáni ügyfélszolgálat

- Örizzze meg a géphez mellékelt dokumentumokat és a termék számláit, és a cég garanciális vagy karbantartási munkái esetén mutassa fel ezeket a dokumentumokat.
- Ha bármilyen probléma merül fel a használat során, akkor időben vegye fel a kapcsolatot cégünkkel, hogy időben pontos és gyors műszaki támogatást és karbantartási szolgáltatásokat nyújthassunk.
- Ha a termék a specifikációnak megfelelő telepítés és használat ellenére eltörik vagy megsérül, akkor az értékesítés dátumát követő egy éven belül ingyenes garanciát és élethosszig tartó karbantartási szolgáltatást élvez a „tanúsítvány” vagy számla bemutatásával.
- A vásárlás dátumától számítva, ha a termék egy éven belül minőségi problémák miatt valóban megsérül, vagy nem működik megfelelően, a vállalat ingyenes javítást biztosít a felhasználóknak.

Élettartamra szóló gyártói ügyfélszolgálat: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD