

BIOPSY PUNCH



(IT) Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.



(IT) Sterile. MONOUSO.


Se sullo stesso paziente sono necessari più biopsie o campioni, ogni volta deve essere utilizzato un nuovo dispositivo.

- Non risterilizzare o riutilizzare a causa del rischio di infezione.
- Non utilizzare se la confezione sterile è compromessa o danneggiata.

(IT) Misure disponibili:
2; 3; 3.5; 4; 5; 6 & 8 mm

1.


(IT) La biopsia con punch è un metodo standardizzato che permette di effettuare biopsie della cute.

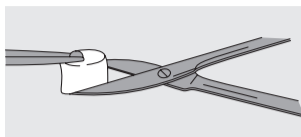


c.

(IT) Afferrare delicatamente e sollevare il campione di pelle con una piccola pinzetta anatomica, evitando qualsiasi frantumazione. Separare con forbici o bisturi alla base, se necessario.

2.

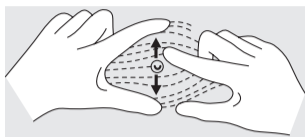


a. (IT) Tendere la cute, in modo da rilassare le linee di tensione della cute.

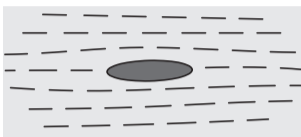

d.

(IT) Per le ferite $\leq 4\text{mm}$ comprimere delicatamente o chiudere con nastro idrocolloide. Per le ferite $\geq 4\text{mm}$ chiudere con punti di sutura, clip o strisce adesive clinicamente appropriate.

b.

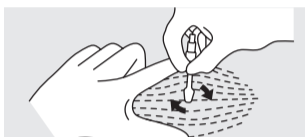

(IT) Tenere il punch tra il pollice e l'indice. Posizionarlo sulla superficie superiore della pelle, con una pressione moderata spingerlo verso il basso ruotandolo in senso orario.

3.



(IT) Sterilizzato con ossido di etilene da:
sfm medical devices GmbH, Brückenstrasse 5, D-63607 Wächtersbach.



GSK Consumer Healthcare (GMDT)
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
Ireland



4.

(IT) Vedere confezione o astuccio per:



5.

(IT) GlaxoSmithKline S.p.A. - Viale dell'Agricoltura, 7 -
37135 Verona - Italia