

# **PAD ESERCITAZIONE SUTURA - SUTURE TRAINING PAD**

## **COUSSIN D'ENTRAÎNEMENT AUX SUTURES**

### **ALMOHADILLA DE ENTRENAMIENTO DE SUTURA**

### **ALMOFADA PARA TREINO DE SUTURA**

**Material:** Silicone  
**Materiale:** Silicone  
**Matériau:** Silicone  
**Material:** Silicona  
**Material:** Silicone


**Size:** 17,2x12x1,2cm  
**Dimensioni:** 17,2x12x1,2 cm  
**Dimensions:** 17,2x12x1,2 cm  
**Dimensões:** 17,2x12x1,2 cm

**Weight:** 240g  
**Peso:** 240 g  
**Poids:** 240 g  
**Peso:** 240 g  
**Peso:** 240 g

#### **Tecniche di sutura**

Il pad esercitazione sutura prevede vari tipi di ferite. È possibile esercitarsi con le seguenti tecniche di sutura:


**1. Sutura interrotta a punti semplici:** semplice e applicata nella maggior parte dei casi; ciascun punto è chiuso con un singolo nodo; utilizzata nella cute, nel tessuto sottocutaneo, nei muscoli, nell'aponeurosi, specialmente per ferite che presentano infezioni.

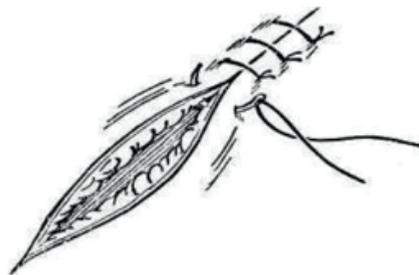


**2. Sutura continua a sopraggitto:** dopo il primo punto, il capo lungo del filo non viene tagliato ma utilizzato per formare una serie continua di successive anse fino all'estremità opposta della ferita, dove viene interrotto con un nodo finale spesso.




3. **Sutura continua a punti incavagliati:** questo metodo, che consente di risparmiare tempo e offre un buon effetto emostatico, consiste nell'allacciare il filo all'ansa precedente durante il processo di sutura ed è utilizzato prevalentemente per chiudere il tratto gastrointestinale e per la sutura durante i trapianti di cute.

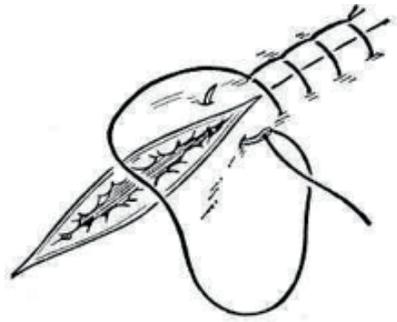

4. **Sutura a 8:** consiste in due suture intermittenti, sicure e rapide, quali le suture della fascia.

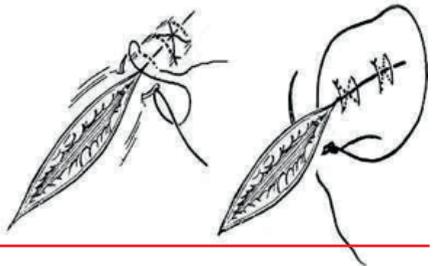

5. **Sutura sottocuticolare:** l'ago viene inserito da un'estremità dell'incisione e quindi passa alternativamente attraverso il bordo interno dell'incisione su entrambi i lati fino all'estremità opposta dell'incisione; infine il filo viene serrato con un nodo. Utilizzata comunemente per suturare le incisioni cutanee esposte, per esempio in caso di tiroidectomia cervicale.

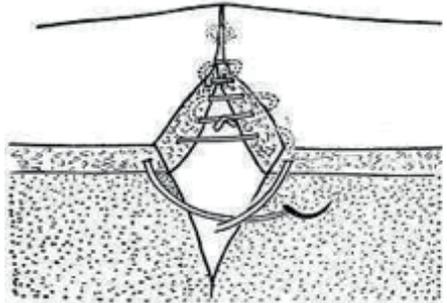

**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

**GIMA WARRANTY TERMS**

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

**CONDITIONS DE GARANTIE GIMA**

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante  
Hangzhou Haizhu MIM products Co., Ltd.  
No.868 shixin north Road, Hangzhou, 311215  
Made in China

REF **B3361**

**CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

**CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA**

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

Importato da / Imported by / Importé de  
Importado de / importado por:  
**Gima S.p.A.** Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
**www.gimaitaly.com** - Made in China



**Gima 23020**