


**REF** GIMA 24450 GIMA 24451 GIMA 24453 GIMA 24454

Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd  
No.1 Shuangshan Sanjian Road, Zhangqiu,  
Jinan City, 250200, Shandong  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
Made in China

**REF** 04-1818, 04-2122, 04-2322, 04-2618, 04-2818

**EC REP** Linkfar Healthcare GmbH, Niederrheinstraße 71,  
40474 Düsseldorf, Germania

**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

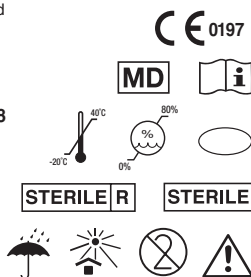

ITALIANO

## LANCETTE PUNGIDITO ATTIVATE A PRESSIONE

### Modello:


PA

### Specifiche:

| Specifiche   | Profondità (mm) |
|--------------|-----------------|
| 14G-33G      | 1,2-2,5         |
| 14G-33G Lama | 1,2-2,5         |

### Struttura principale del prodotto:

La lancetta di sicurezza è costituita da un nucleo dell'ago, un dispositivo elastico, un dispositivo pungidito e un involucro.

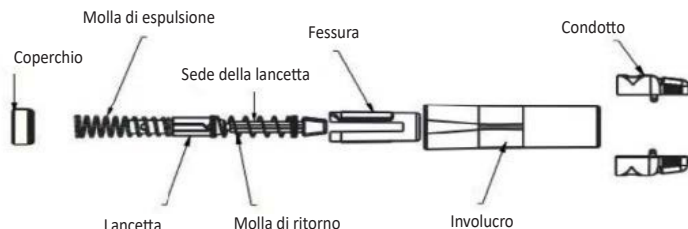

### Utilizzo previsto:

Le lancette di sicurezza sono destinate al campionamento del sangue capillare, per ottenere un piccolo campione di sangue per vari esami. Il prodotto è ideato per l'uso da parte di professionisti sanitari e di persone comuni e offre un metodo comodo e sicuro per il prelievo di campioni di sangue in contesti sanitari clinici e domiciliari.

### Controindicazioni:


Utilizzare con cautela in caso di individui affetti da disturbi della coagulazione.

### Procedura operativa:

- Leggere le istruzioni prima dell'uso.
- Lavare le mani prima dell'uso. Asciugare accuratamente.
- Sfregare e disinfettare l'intera superficie della pelle, in corrispondenza del sito di prelievo del sangue, utilizzando disinfettanti medici, come tintura di iodio o alcol ecc. I professionisti sanitari sono tenuti a indossare i guanti prima di procedere alla disinfezione del sito di puntura e a completare la procedura di puntura attenendosi alla procedura indicata di seguito.
- Usare la lancetta di sicurezza subito dopo aver aperto la confezione principale.
- Seguire la procedura riportata per utilizzare la lancetta di sicurezza per effettuare il prelievo del sangue.
- Smaltire tutte le lancette di sicurezza usate nel contenitore per i rifiuti a rischio biologico. Lavare le mani dopo l'uso.

### Istruzioni:

DOPPIA PROTEZIONE

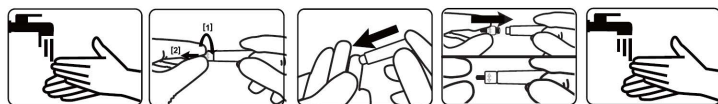

1. Lavare le mani prima dell'uso. Sfregare e disinfettare l'intera superficie della pelle, in corrispondenza del sito di prelievo del sangue, utilizzando disinfettanti medici, come tintura di iodio o alcol ecc. I professionisti sanitari sono tenuti a indossare i guanti prima di procedere alla disinfezione del sito di puntura e a completare la procedura di puntura attenendosi alla procedura indicata di seguito.
2. Svitare il tappo di protezione.
3. Appoggiare la lancetta di sicurezza contro la punta del dito del paziente e premere delicatamente verso il basso per effettuare il prelievo del sangue.
4. Premere il tappo al contrario nella lancetta di sicurezza usata, fino a quando esso non risulta completamente fissato. Smaltire quindi in un apposito contenitore per i rifiuti.
5. Lavare le mani dopo l'uso.
6. In caso di pazienti pediatrici e neonatali, è necessario immobilizzare il bambino

chiedendo al genitore di:

- 6.1 Sedersi sulla sedia per la flebotomia, tenendo il bambino sul proprio grembo;
- 6.2 Immobilizzare gli arti inferiori del bambino, incrociando le proprie gambe attorno a quelle del bambino;
- 6.3 Posizionare un braccio attorno il petto del bambino, quindi bloccare il braccio libero del bambino tenendolo ben fermo sotto il proprio;
- 6.4 Afferrare il gomito del bambino e tenerlo fermo in modo saldo;
- 6.5 Utilizzare l'altro braccio per mantenere ben fermo il polso del bambino, tenendo il palmo rivolto verso l'alto.

### Indicazioni per l'uso:

- La lancetta di sicurezza è un dispositivo monouso indicato per il prelievo di sangue capillare.
- Prodotto monouso. Non utilizzare su più di un paziente. Il dispositivo viene smesso dopo un singolo utilizzo.

### Avvertenza:

- Prodotto monouso. Prodotto non destinato a usi multipli. Non utilizzare su più di un paziente. Il dispositivo viene smesso dopo un singolo utilizzo e non può essere utilizzato più di una volta.
- L'uso improprio delle lancette di sicurezza può aumentare il rischio di trasmissione accidentale di agenti patogeni trasportati dal sangue, in particolare in contesti in cui più pazienti vengono sottoposti a esame.
- Il periodo di scadenza è 5 anni. L'utilizzo del prodotto oltre la data di scadenza è severamente proibito.
- Il prodotto non ha nessuna funzione terapeutica o diagnostica.
- Se il tappo di protezione della lancetta è danneggiato o è stato smarrito, non usare il prodotto.
- Utilizzare con cautela in caso di disturbi della coagulazione.
- Per gli utenti affetti da obesità o i soggetti che richiedono volumi maggiori di sangue, si raccomanda di scegliere i prodotti con un valore "G" piccolo o con una profondità di puntura per il prelievo del sangue elevata.

### Conservazione e trasporto:

1. Il dispositivo deve essere conservato in un ambiente in cui la temperatura sia compresa tra -20 °C e 40 °C e l'umidità relativa sia inferiore all'80%. È necessario che l'ambiente di conservazione sia asciutto, riparato dalla luce solare, ben ventilato e pulito e che non siano presenti gas corrosivi.
2. Il dispositivo deve essere oggetto di estrema cura durante il trasporto e la manipolazione.

### Durata di conservazione:

Il periodo di validità del prodotto è di 5 anni.

### Vantaggi clinici:

Il prodotto aiuta il personale medico e i pazienti a completare il prelievo di sangue capillare, per ottenere un piccolo campione di sangue per vari esami.

### Eventi avversi:

Abbiamo condotto delle ricerche sugli eventi avversi e sulla letteratura più recente relativa a dispositivi equivalenti e simili presenti sul mercato. L'assenza di eventi avversi rilevati per prodotti equivalenti e simili indica la conformità alle norme tecniche attualmente in vigore. Se dovesse verificarsi qualsiasi evento avverso durante l'uso del prodotto, si prega di contattare i sottoscritti che si prenderanno cura di risolvere i problemi segnalati il prima possibile.

Inoltre, si ricorda che qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

### Smaltimento:

- Il prodotto deve essere smaltito dopo l'uso.
- I prodotti contaminati con il sangue devono essere smaltiti in conformità ai regolamenti validi concernenti i materiali pericolosi.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.
- Effettuare lo smaltimento in sicurezza in conformità ai regolamenti nazionali in vigore.

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p><b>IT</b> - Fabricante <b>GB</b> - Manufacturer <b>FR</b> - Fabricant <b>ES</b> - Fabricante<br/> <b>PT</b> - Fabricante <b>DE</b> - Hersteller <b>GR</b> - Παραγωγός <b>PL</b> - Producent <b>CZ</b> -<br/> Výrobce <b>SE</b> - Tillverkare <b>FI</b> - Valmistaja <b>SI</b> - Proizvajalec <b>SK</b> - Výrobca <b>RO</b> -<br/> Producător <b>NL</b> - Fabrikant <b>HR</b> - Proizvođač <b>HU</b> - Gyártó <b>DK</b> - Fabrikant<br/> <b>NO</b> - Produsent <b>BG</b> - Производител <b>LT</b> - Gamintojas <b>LV</b> - Ražotājs <b>EE</b> - Tootja<br/> <b>RU</b> - Производитель</p> <p style="text-align: right;"><b>SA</b> - الشركة المصنعة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | <p><b>IT</b> - Data di fabbricazione <b>GB</b> - Date of manufacture <b>FR</b> - Date de fabrication<br/> <b>ES</b> - Fecha de fabricación <b>PT</b> - Data de fabrico <b>DE</b> - Herstellungsdatum<br/> <b>GR</b> - Ημερομηνία παραγωγής <b>PL</b> - Data produkcyj <b>CZ</b> - Datum výroby <b>SE</b> -<br/> Tillverkningsdatum <b>FI</b> - Valmistuspäivämäärä <b>SI</b> - Datum proizvodnje <b>SK</b> -<br/> Dátum výroby <b>RO</b> - Data fabricației <b>NL</b> - Productiedatum <b>HR</b> - Datum<br/> proizvodnje <b>HU</b> - Gyártás dátuma <b>DK</b> - Fabrikationsdato <b>NO</b> - Fabrikasjonsdato<br/> <b>BG</b> - Дата на производство <b>LT</b> - Pagaminimo data <b>LV</b> - Izgatavošanas datums<br/> <b>EE</b> - Valmistamise kuupäev <b>RU</b> - Дата выпуска</p> <p style="text-align: right;"><b>SA</b> - تاريخ التصنيع</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>STERILE</b></div> | <p><b>IT</b> - Sterilizzato per irradiazione <b>GB</b> - Sterilized using irradiation <b>FR</b> -<br/> Stérilisé par irradiation <b>ES</b> - Esterilizado por irradiación <b>PT</b> - Esterilizado<br/> por irradiação <b>DE</b> - Durch Bestrahlung sterilisiert <b>GR</b> - ποστεϊρώνεται με<br/> ακτινοβόληση <b>PL</b> - Sterylizowane napromienianiem <b>CZ</b> - Sterilizované<br/> ozařováním <b>SE</b> - Steriliserad genom bestrålning <b>FI</b> - Steriloitu säteilyttämällä<br/> <b>SI</b> - Sterilizirano z obsevanjem <b>SK</b> - Sterilizované ožiaraním <b>RO</b> - Sterilizat<br/> prin iradiere <b>NL</b> - Gesteriliseerd door bestraling <b>HR</b> - Sterilizirano zračenjem<br/> <b>HU</b> - Besugázzással sterilizált <b>DK</b> - Steriliseret ved bestråling <b>NO</b> - Steriliseret<br/> ved bestråling <b>BG</b> - Стерилизиран чрез облъчване <b>LT</b> - Sterilizuojamas<br/> švitinant <b>LV</b> - Sterilizēts ar apstarošanu <b>EE</b> - Steriliseeritud kiiritusega <b>RU</b> -<br/> Стерилизовано с использованием облучения</p> <p style="text-align: right;"><b>SA</b> - تعقيمها عن طريق التشعيع</p> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>IT</b> - Dispositivo monouso, non riutilizzare <b>GB</b> - Disposable device, do not re-use <b>FR</b> - Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser <b>ES</b> - Dispositivo monouso, no reutilizable <b>PT</b> - Dispositivo descartável, não reutilizar <b>DE</b> - Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden <b>CZ</b> - Jednorázový prostředek, nepoužívejte opakovaně <b>DK</b> - Engangsenhed, må ikke genbruges <b>GR</b> - Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου. <b>EE</b> - Ühekordne, ärge kasutage seda mitu korda <b>FI</b> - Kertakäyttöinen laite, ei saa käyttää uudelleen <b>HR</b> - Uredaj za jednokratnu upotrebu, nemojte ponovo koristiti <b>HU</b> - Eldobható eszköz, ne használja újra <b>LT</b> - Vienkartinis prietaisas, nenaudokite pakartotinai <b>LV</b> - Vienreiz lietojama ierīce, nelietojiet to atkārtoti <b>PL</b> - Jedno użyczenia, nie używaj ponownie <b>NL</b> - Voor eenmalig gebruik, niet hergebruiken <b>RO</b> - Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi <b>SK</b> - Zariadenie na jedno použitie, nepoužívajte opakovane <b>SI</b> - Za enkratno uporabo, ne uporabiti ponovno <b>SE</b> - Engångsanordning, får ej återanvändas <b>NO</b> - Engangsutstyr, ikke gjenbruk <b>BG</b> - Изделие за еднократна употреба, да не се използва повторно <b>RU</b> - Одноразовое изделие. Повторное использование запрещено</p> <p><b>SA</b> - أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد</p> |
|    | <p><b>IT</b> - Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>GB</b> - Keep in a cool, dry place <b>FR</b> - À conserver dans un endroit frais et sec <b>ES</b> - Conservar en un lugar fresco y seco <b>PT</b> - Armazenar em local fresco e seco <b>DE</b> - An einem kühlen und trockenen Ort lagern <b>GR</b> - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον <b>PL</b> - Przechowywać w suchym miejscu <b>CZ</b> - Skladujte na větraném a suchém místě <b>SE</b> - Förvara på svalt och torrt ställe <b>FI</b> - Säilytä kuivassa ja viileässä <b>SI</b> - Hraniti na suhem in hladnem mestu <b>SK</b> - Skladujte na chladnom a suchom mieste <b>RO</b> - A se păstra într-un loc răcoros și uscat <b>NL</b> - Koel en droog opslaan <b>HR</b> - Čuvati na hladnom i suhom mjestu <b>HU</b> - Száraz, hűvös helyen tárolandó <b>DK</b> - Opbevares køligt og tørt <b>NO</b> - Må oppbevares på et tørt og kaldt sted <b>BG</b> - Да се съхранява на хладно и сухо място <b>LT</b> - Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje <b>LV</b> - Uzglabāt vēsā, sausā vietā <b>EE</b> - Hoida jahedas ja kuivas kohas <b>RU</b> - Хранить в сухом прохладном месте</p> <p><b>SA</b> - يحفظ في مكان بارد وجاف</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p><b>IT</b> - Limite di umidità <b>GB</b> - Humidity limit <b>FR</b> - Limite d’humidité <b>ES</b> - Límite de humedad <b>PT</b> - Limite de humidade <b>DE</b> - Feuchtigkeitsgrenzwert <b>GR</b> - Όριο υγρασίας <b>PL</b> - Granica wilgotności <b>CZ</b> - Limit vlhkosti <b>SE</b> - Fuktighetsgräns <b>FI</b> - Kosteusraja <b>SI</b> - Omejitev vlažnosti <b>SK</b> - Hranica vlhkosti <b>RO</b> - Limită de umiditate <b>NL</b> - Drempelwaarde vochtigheid <b>HR</b> - Granica vlažnosti <b>HU</b> - Páratartalom határérték <b>DK</b> - Grænse for luftfugtighed <b>NO</b> - Fuktighetsgrense <b>BG</b> - Ограничение на влажността <b>LT</b> - Drėgmės riba <b>LV</b> - Mitruma robeža <b>EE</b> - Niiskuse piirang <b>RU</b> - предел влажности</p> <p><b>SA</b> - حد نسبة الرطوبة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p><b>IT</b> - Limite di temperatura <b>GB</b> - Temperature limit <b>FR</b> - Limite de température <b>ES</b> - Límite de temperatur <b>PT</b> - Limite de temperatura <b>DE</b> - Temperaturgrenzwert <b>GR</b> - Διατηρείται μεταξύ -10 και 49°C <b>PL</b> - Przechowywaj pomiędzy i °C <b>CZ</b> - Uchovávejte při teplotě mezi a °C <b>SE</b> - Lagras mellan och °C <b>FI</b> - Säilytyslämpötila -10/49°C <b>SI</b> - Hranite pri temperaturi med in °C <b>SK</b> - Uchovávať pri teplote od do °C <b>RO</b> - A se păstra la temperaturi cuprinse între și °C <b>NL</b> - Bewaren tussen en °C <b>HR</b> - Čuvati između i °C <b>HU</b> - és °C között tárolandó <b>DK</b> - Grænse for luftfugtighed <b>NO</b> - Oppbevares mellom og °C <b>BG</b> - Да се съхранява между и °C <b>LT</b> - Temperatūros riba <b>LV</b> - Uzglabāt temperatūrā līdz °C <b>EE</b> - Temperatuuripiirang <b>RU</b> - Хранить при температуре °C</p> <p><b>SA</b> - يحفظ بين و درجة مئوية</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STERILE</b>                                                                     | <p><b>IT</b> - Sterile <b>GB</b> - Sterile <b>FR</b> - Stérile <b>ES</b> - Estéril <b>PT</b> - Esterilizado <b>DE</b> - Steril <b>GR</b> - Στείλος <b>PL</b> - Jałowy <b>CZ</b> - Sterilní <b>SE</b> - Steril <b>FI</b> - Steriili <b>SI</b> - Sterilno <b>SK</b> - Sterilné <b>RO</b> - Steril <b>NL</b> - Steriel <b>HR</b> - Sterilno <b>HU</b> - Steril <b>DK</b> - Steril <b>NO</b> - Steril <b>BG</b> - Стерилен <b>LT</b> - Sterilus <b>LV</b> - Sterils <b>EE</b> - Steriilne <b>RU</b> - Стерильный</p> <p><b>SA</b> - معقمة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UDI</b>                                                                         | <p><b>IT</b> - Identificatore univoco del dispositivo <b>GB</b> - Unique device identifier <b>FR</b> - Identifiant unique de l'appareil <b>ES</b> - Identificador de dispositivo único <b>PT</b> - Identificador exclusivo do dispositivo <b>DE</b> - Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts) <b>GR</b> - Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής <b>PL</b> - Unikalny identyfikator urządzenia <b>CZ</b> - Jedinečný identifikátor zařízení <b>SE</b> - Unik identifierare för enheten <b>FI</b> - Laitteen yksilöllinen tunniste <b>SI</b> - Enolični identifikator naprave <b>SK</b> - Jedinečný identifikátor zariadenia <b>RO</b> - Identificatorul unic al dispozitivului <b>NL</b> - Unieke identificatie van het apparaat <b>HR</b> - Jedinstveni identifikator uređaja <b>HU</b> - Az eszköz egyedi azonosítója <b>DK</b> - Unik identifikator for enheden <b>NO</b> - Unik identifikator for enheten <b>BG</b> - Уникален идентификатор на устройството <b>LT</b> - Unikalus įrenginio identifikatorius <b>LV</b> - Unikāls ierīces identifikators <b>EE</b> - Seadme kordumatu identifikaator <b>RU</b> - Уникальный идентификатор устройства</p> <p><b>SA</b> - معرف فريد للجهاز</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>LOT</b>                                                                         | <p><b>IT</b> - Numero di lotto <b>GB</b> - Lot number <b>FR</b> - Numéro de lot <b>ES</b> - Número de lote <b>PT</b> - Número de lote <b>DE</b> - Chargennummer <b>GR</b> - Αριθμός παρτίδας <b>PL</b> - Kod partii <b>CZ</b> - Číslo šarže <b>SE</b> - Satsnummer <b>FI</b> - Eränumero <b>SI</b> - Številka partije <b>SK</b> - Číslo šarže <b>RO</b> - Număr de lot <b>NL</b> - Partijnummer <b>HR</b> - Broj serije <b>HU</b> - Tételszám <b>DK</b> - Batchnummer <b>NO</b> - Produksjonsserienummer <b>BG</b> - Номер на партида <b>LT</b> - Partijos numeris <b>LV</b> - Partijas numurs <b>EE</b> - Partii number <b>RU</b> - Номер партии</p> <p><b>SA</b> - رقم الدفعة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>REF</b>                                                                         | <p><b>IT</b> - Codice prodotto <b>GB</b> - Product code <b>FR</b> - Code produit <b>ES</b> - Código producto <b>PT</b> - Código produto <b>DE</b> - Erzeugniscode <b>GR</b> - Κωδικός προϊόντος <b>PL</b> - Numer katalogowy <b>CZ</b> - Kód výrobku <b>SE</b> - Produktkod <b>FI</b> - Tuotekoodi <b>SI</b> - Koda izdelka <b>SK</b> - Kód výrobku <b>RO</b> - Cod produs <b>NL</b> - Productcode <b>HR</b> - Šifra proizvoda <b>HU</b> - Termékkód <b>DK</b> - Produktkode <b>NO</b> - Produktkode <b>BG</b> - Код на продукта <b>LT</b> - Prekės kodas <b>LV</b> - Produkta kods <b>EE</b> - Toote kood <b>RU</b> - Код изделия</p> <p><b>SA</b> - كود المنتج</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MD</b>                                                                           | <p><b>IT</b> - Dispositivo medico <b>GB</b> - Medical Device <b>FR</b> - Dispositif médical <b>ES</b> - Producto sanitario <b>PT</b> - Dispositivo médico <b>DE</b> - Medizinprodukt <b>GR</b> - Ιατροτεχνολογικό προϊόν <b>PL</b> - Wyrób medyczny <b>CZ</b> - Zdravotnický prostředek <b>SE</b> - Medicinteknisk produkt <b>FI</b> - Lääkinnällinen laite <b>SI</b> - Medicinski pripomoček <b>SK</b> - Zdravotnícka pomôčka <b>RO</b> - Dispozitiv medical <b>NL</b> - Medisch hulpmiddel <b>HR</b> - Medicinski uređaj <b>HU</b> - Orvosteknikai eszköz <b>DK</b> - Medicinsk udstyr <b>NO</b> - Medisinsk utstyr <b>BG</b> - Медицинско изделие <b>LT</b> - Medicininis prietaisas <b>LV</b> - Mediciniskā ierīce <b>EE</b> - Meditsiiniline seade <b>RU</b> - Медицинское изделие</p> <p><b>SA</b> - جهاز طبي</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <p><b>IT</b> - Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> - Keep away from sunlight <b>FR</b> - À conserver à l’abri de la lumière du soleil <b>ES</b> - Conservar al amparo de la luz solar <b>PT</b> - Guardar ao abrigo da luz solar <b>DE</b> - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern <b>GR</b> - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία <b>PL</b> - Przechowywać z dala od światła słonecznego <b>CZ</b> - Skladujte mimo sluneční světlo <b>SE</b> - Skyddas från solljus <b>FI</b> - Säilytä auringonvalolta suojassa <b>SI</b> - Hraniti zaščiteno pred sončno svetlobo <b>SK</b> - Skladujte mimo slnečného svetla <b>RO</b> - A se păstra ferit de razele soarelui <b>NL</b> - Afgeschermd van zonlicht opslaan <b>HR</b> - Čuvati zaštićeno od sunčeve svjetlosti <b>HU</b> - Napfénytől védve tárolandó <b>DK</b> - Må ikke udsættes for sollys <b>NO</b> - Må oppbevares på et sted uten direkte sollys <b>BG</b> - Да се съхранява на място, защитено от слънчева светлина <b>LT</b> - Saugoti nuo saulės spindulių <b>LV</b> - Uzglabāt prom no saules gaismas <b>EE</b> - Hoida eemal päikesevalgusest <b>RU</b> - Беречь от попадания солнечных лучей</p> <p><b>SA</b> - يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <p><b>IT</b> - Data di scadenza <b>GB</b> - Expiration date <b>FR</b> - Date d’échéance <b>ES</b> - Fecha de caducidad <b>PT</b> - Data de validade <b>DE</b> - Ablaufdatum <b>GR</b> - Ημερομηνία λήξεως <b>PL</b> - Data ważności <b>CZ</b> - Datum ukončení platnosti <b>SE</b> - Utgångsdatum <b>FI</b> - Viimeinen voimassaolopäivä <b>SI</b> - Rok uporabnosti <b>SK</b> - Dátum expirácie <b>RO</b> - Valabil până la data de <b>NL</b> - Vervaldatum <b>HR</b> - Datum isteka <b>HU</b> - Lejárati dátum <b>DK</b> - Udløbsdato <b>NO</b> - Utløpsdato <b>BG</b> - Срок на годност <b>LT</b> - Galiojimo laikas <b>LV</b> - Derīguma termiņš <b>EE</b> - Aegumiskuupäev <b>RU</b> - Срок годности</p> <p><b>SA</b> - تاريخ انتهاء الصلاحية</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p><b>IT</b> - Leggere le istruzioni per l’uso <b>GB</b> - Consult instructions for use <b>FR</b> - Consulter les instructions d’utilisation <b>ES</b> - Consultar las instrucciones de uso <b>PT</b> - Consulte as instruções de uso <b>DE</b> - Gebrauchsanweisung beachten <b>GR</b> - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης <b>PL</b> - Przeczytaj instrukcję użytkowania <b>CZ</b> - Přečtěte si návod k použití <b>SE</b> - Läs bruksanvisningen <b>FI</b> - Lue käyttöohjeet <b>SI</b> - Preberite navodila za uporabo <b>SK</b> - Prečítajte si návod na použitie <b>RO</b> - Citiți instrucțiunile de utilizare <b>NL</b> - Lees de gebruiksaanwijzing <b>HR</b> - Pročitajte upute za uporabu <b>HU</b> - Olvassa el a használati útistájsokát <b>DK</b> - Se brugsvejledningen <b>NO</b> - Les bruksinstruksjonene <b>BG</b> - Прочетете инструкциите за употреба <b>LT</b> - Perskaitykite naudojimo instrukcijas <b>LV</b> - Izlasiet lietošanas instrukcijas <b>EE</b> - Lugege kasutusjuhendit <b>RU</b> - См. инструкцию</p> <p><b>SA</b> - اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CE</b>                                                                           | <p><b>IT</b> - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE <b>GB</b> - Medical Device complies with Directive 93/42/EEC <b>FR</b> - Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE <b>ES</b> - Dispositivo médico según a la Directiva 93/42 / CEE <b>PT</b> - Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE <b>DE</b> - Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE <b>GR</b> - Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE <b>PL</b> - Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42 / CEE <b>CZ</b> - Zdravotnický prostředek v souladu se směrnici 93/42/EHS <b>SE</b> - Den medicintekniska produkten överensstämmer med Direktiv 93/42/EEG <b>FI</b> - Direktiivin 93/42/ETY mukainen lääkitieteellinen laite <b>SI</b> - Medicinski pripomoček v skladu z Direktivo 93/42/EGS <b>SK</b> - Zdravotnícka pomôčka v súlade so smernicou 93/42/EHS <b>RO</b> - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE <b>NL</b> - Medisch apparaat dat voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG <b>HR</b> - Medicinski uređaj u skladu s Direktivom 93/42 / EEC <b>HU</b> - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE <b>DK</b> - Medicinsk udstyr i overensstemmelse med direktiv 93/42/EEG <b>NO</b> - Medisinsk utstyr i samsvar med direktiv 93/42/EEC <b>BG</b> - Медицинско устройство, отговарящо на Директива 93/42/EEC <b>LT</b> - Medicinos prietaisas, atitinkantis direktyvą 93/42/EEB <b>LV</b> - Medicīnas ierīce, kas atbilst Direktīvai 93/42/EEK <b>EE</b> - Meditsiiniseade, mis vastab direktiivile 93/42/EMÜ <b>RU</b> - Медицинское оборудование, соответствующее Директиве 93/42/EEC</p> <p><b>SA</b> - جهاز طبي يتوافق مع التوجيه CEE/93/42</p> |
|  | <p><b>IT</b> - Non utilizzare se l’imballaggio è danneggiato <b>GB</b> - Don't use if package is damaged <b>FR</b> - Ne pas utiliser si le colis est endommagé <b>ES</b> - No usar si el paquete está dañado <b>PT</b> - Não use se o pacote estiver danificado <b>DE</b> - Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist <b>CZ</b> - Nepoužívejte, pokud je obal poškozen <b>DK</b> - Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget <b>GR</b> - Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη <b>FI</b> - Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut <b>HR</b> - Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno <b>HU</b> - Ne használja, ha a csomagolás sérült <b>LT</b> - Nenaudokite, jei pakuočių pažeista <b>LV</b> - Nelietot, ja iepakojums ir bojāts <b>PL</b> - Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone <b>NL</b> - Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is <b>RO</b> - A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat <b>SK</b> - Nepoužívajte, ak je obal poškodený <b>SI</b> - Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana <b>SE</b> - Använd inte en förpackning som är skadad <b>NO</b> - Ikke bruk hvis emballasjen er skadet <b>BG</b> - Да не се използва, ако опаковката е с нарушена цялост <b>EE</b> - Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud <b>RU</b> - В случае повреждения упаковки не использовать</p> <p><b>SA</b> - لا تستخدم في حالة تلف الحزمة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>EC</div><div>REP</div></div>                                             | <p><b>IT</b> - Rappresentante autorizzato nella Comunità europea <b>GB</b> - Authorized representative in the European community <b>FR</b> - Représentant autorisé dans la Communauté européenne <b>ES</b> - Representante autorizado en la Comunidad Europea <b>PT</b> - Representante autorizado na União Europeia <b>DE</b> - Autorisierter Vertreter in der EG <b>GR</b> - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση <b>PL</b> - Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej <b>CZ</b> - Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství <b>SE</b> - Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen <b>FI</b> - Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä <b>SI</b> - Pooblaščení zastopnik za Evropsko skupnost <b>SK</b> - Splnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve <b>RO</b> - Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene <b>NL</b> - Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap <b>HR</b> - Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici <b>HU</b> - Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben <b>DK</b> - Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab <b>NO</b> - Autorisert representant i EU <b>BG</b> - Оторизиран представител в Европейската общност <b>LT</b> - Įgaliotasis atstovas Europos bendrijoje <b>LV</b> - Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā <b>EE</b> - Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses <b>RU</b> - Официальный представитель на территории стран Европейского сообщества</p> <p><b>SA</b> - ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي</p> |
|    | <p><b>IT</b> - Importato da <b>GB</b> - Imported by <b>FR</b> - Importé par <b>ES</b> - Importado por <b>PT</b> - Importado por <b>DE</b> - Eingeführt von <b>GR</b> - Εισαγωγή από <b>PL</b> - Importowane przez <b>CZ</b> - Dovezeno uživatelem <b>SE</b> - Importerad av <b>FI</b> - Tuojaa <b>SI</b> - Uvozil <b>SK</b> - Dovážal <b>RO</b> - Importat de <b>NL</b> - Geïmporteerd door <b>HR</b> - Uvezeno od strane <b>HU</b> - Importálta <b>DK</b> - Importeret af <b>NO</b> - Importert av <b>BG</b> - Внесено от <b>LT</b> - Importavo <b>LV</b> - Importēja <b>EE</b> - Importija <b>RU</b> - Ввозимые</p> <p><b>SA</b> - مستورد عن طريق</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <p><b>IT</b> - Sistema di barriera sterile singolo <b>GB</b> - Single sterile barrier system <b>FR</b> - Système de barrière stérile unique <b>ES</b> - Sistema de barrera estéril única <b>PT</b> - Sistema de barreira estéril único <b>DE</b> - Einzelbarriere-Sterilsystem <b>GR</b> - Μονό αποστειρωμένο σύστημα φραγμού <b>PL</b> - System pojedynczej bariery sterylnej <b>CZ</b> - Sterilní systém s jednou bariérou <b>SE</b> - Sterilt system med en barriär <b>FI</b> - Yhden esteen steriili järjestelmä <b>SI</b> - Sterilni sistem z eno pregrado <b>SK</b> - Sterilný systém s jednou bariérou <b>RO</b> - Sistem steril cu o singură barieră <b>NL</b> - Steriel systeem met enkele barrière <b>HR</b> - Sterilni sustav s jednom barijerom <b>HU</b> - Single barrier steril rendszer <b>DK</b> - Enkeltbarriere steril system <b>NO</b> - Enkelt steril barrieresystem <b>BG</b> - Единична бариерна стерилна система <b>LT</b> - Vieno barjero sterili sistema <b>LV</b> - Viena barjera sterila sistēma <b>EE</b> - Ühe barjääriga steriilne süsteem <b>RU</b> - Не содержит фталата ДЭГФ</p> <p><b>SA</b> - نظام حاجز معقم واحد</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p><b>IT</b> - Non-pirogeno <b>GB</b> - Non-pyrogenic <b>FR</b> - Apyrogène <b>ES</b> - Apirógeno <b>PT</b> - Não pirogênico <b>DE</b> - Nicht pyrogen <b>GR</b> - Μη πυρετογόνο <b>PL</b> - Niepirogenny <b>CZ</b> - Nepyrogenní <b>SE</b> - Icke-pyrogen <b>FI</b> - Ei-pyrogeeninen <b>SI</b> - Nepirogeno <b>SK</b> - Nepyrogénny <b>RO</b> - Apirogen <b>NL</b> - Niet-pyrogeen <b>HR</b> - Nepirogeno <b>HU</b> - Nem pirogén <b>DK</b> - Ikke-pyrogen <b>NO</b> - Ikke-pyrogen <b>BG</b> - Непирогенен <b>LT</b> - Nepirogeninis <b>LV</b> - Nepirogēns <b>EE</b> - Mittepürogeenne <b>RU</b> - Апирогенный</p> <p><b>SA</b> - غير يروجيني</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |