



## STATIMETRO PROFESSIONALE NEONATI MOD. WH80



CDN V030299  
N° REPERTORIO 676567



**Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo dello strumento**

### INDICE

1. SPECIFICHE TECNICHE ED UTILIZZO .....	2
2. MONTAGGIO STATIMETRO PESANEONATI BABYTWO .....	2
3. MISURAZIONE .....	3



### **AVVERTENZE!**

**Gli operatori devono leggere attentamente il presente manuale, attenersi alle istruzioni in esso contenute e familiarizzare con le procedure corrette d'uso e di manutenzione dello strumento.**

- Conservare questo manuale per consultazione e a supporto dell'addestramento del personale
- Per una migliore e più lunga durata del prodotto e bene eseguire periodicamente una accurata pulizia generale.
- La pulizia dello strumento va effettuata con un panno morbido, inumidito con acqua o detergente neutro, evitando l'utilizzo di solventi o sostanze abrasive. In caso di prolungato inutilizzo dello strumento, rimuovere le batterie dal terminale.
- Durante il trasporto, prestare attenzione a non sottoporre lo strumento a urti o eccessive sollecitazioni meccaniche.
- In caso di riparazione o assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore.

## 1. SPECIFICHE TECNICHE ED UTILIZZO

### SPECIFICHE


<b>RANGE MISURAZIONE</b>	35~80cm
<b>DIVISIONE</b>	1mm
<b>DIMENSIONI</b>	W87 x L30 x H7cm
<b>PESO</b>	700g
<b>TEMPERATURA D'UTILIZZO</b>	10°C~40°C

## 2. MONTAGGIO STATIMETRO PESANEONATI BABYTWO


Per l'installazione dello statimetro misura altezza procedere come segue:

<p>A) Applicare il supporto dello statimetro al piano di pesatura con le 2 viti a croce in dotazione (Fig.a)</p>	<p><b>Fig.A</b></p>	
<p>B) Inserire lo statimetro sul supporto precedentemente applicato al piano di pesatura (Fig.b)</p>	<p><b>Fig.B</b></p>	
<p>C) L'installazione è ora completa (Fig.c)</p>	<p><b>Fig.C</b></p>	

### 3. MISURAZIONE

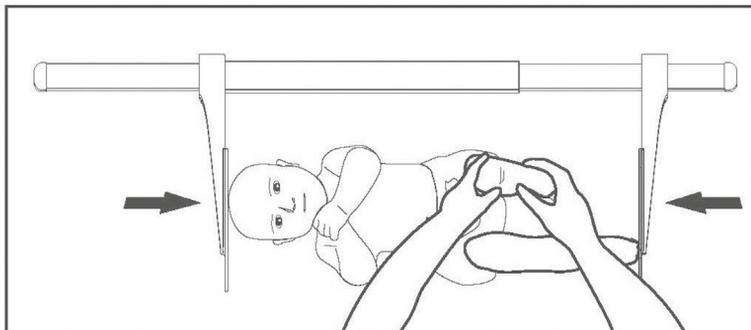

1. Appoggiare lievemente la testa del bambino alla paletta posta a sinistra
2. Allungare i piedi del bambino

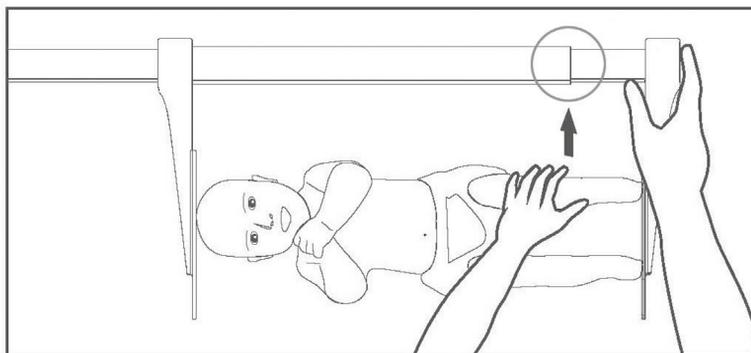

3. Muovere la paletta di destra fino a toccare i piedi del bambino
4. L'altezza del bambino viene letta in corrispondenza della linea rossa sullo statimetro



**Wunder Sa.Bi. S.r.l.**  
Via Vecchia per Monza, 20  
20056 Trezzo sull'Adda (MI)  
Tel. +39 02 90964566  
[www.wunder.it](http://www.wunder.it)