



**PESAPERSONE PROFESSIONALE
MOD. 960 150A / R150A**



 **Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo dello strumento**

INDICE

1. DISPOSIZIONI GENERALI	2
2. SICUREZZA	3
3. USO PREVISTO	3
4. SPECIFICHE TECNICHE.....	4
5. ISTRUZIONI PER L'USO	5
6. ASSEMBLAGGIO STATIMETRO TELESCOPICO (OPTIONAL).....	7
7. UTILIZZO STATIMETRO MANUALE MECCANICO (OPTIONAL)	8
8. CONFORMITÀ.....	9
9. TARGHETTE IDENTIFICATIVE.....	9
10. MANUTENZIONE E ASSISTENZA	10
11. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO.....	10
12. GARANZIA	11

Scegliendo la pesapersone professionale meccanica **WUNDER** mod. **960 150A / R150A** avete acquistato un apparecchio di alta precisione e qualità. Da oltre 40 anni **WUNDER** mette la propria esperienza al servizio della salute. Le pesapersone meccaniche **WUNDER** mod. **960 150A / R150A** sono conformi alle norme vigenti in ospedali, ambulatori medici e istituti di cura con ricovero.

Le pesapersone **960 150A / R150A** sono prodotti medicali di classe Im con dispositivo di misura e sono tarate in conformità alla classe di precisione IIII (secondo le norme 2017/745 e 90/384 CEE).

1. DISPOSIZIONI GENERALI



ATTENZIONE!

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo dello strumento in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la SICUREZZA D'USO E MANUTENZIONE.

WUNDER si riserva il diritto di modificare le immagini all'interno del seguente manuale, purché siano modifiche puramente estetiche e non incidano sulla sicurezza e le performance dello strumento, senza impegnarsi a comunicare gli aggiornamenti tempestivamente.

Il Servizio Assistenza Clienti è a disposizione per ulteriori informazioni sull'uso, sulla manutenzione e sull'assistenza di questo prodotto.

Convenzioni: In questo manuale sono stati adottati i seguenti simboli:

	DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AL REGOLAMENTO 2017/745/EEC
	STRUMENTO IDONEO PER USO LEGALE, IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2014/31/UE E ALLA NORMA EUROPEA EN45501
	DISPOSITIVO MEDICO
	IDENTIFICATIVO UNICO DEL DISPOSITIVO
	STRUMENTAZIONE CONFORME ALLA DIRETTIVA METRICA NAWI CLASSE DI PRECISIONE IIII 90/384-2014/31/UE E ALLA NORMA EN45501
	AVVERTENZA! POSIZIONATO PRIMA DI DETERMINATE PROCEDURE, LA SUA INOSSERVANZA PUÒ PROCURARE DANNI ALL'OPERATORE, AL PAZIENTE E AL PRODOTTO.
	LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LO STRUMENTO
	FABBRICANTE: WUNDER SA.BI. SRL – VIA VECCHIA PER MONZA, 20 – TREZZO S/ADDA (MI), ITALY

2. SICUREZZA



ATTENZIONE!

Gli operatori devono leggere attentamente il presente manuale, attenersi alle istruzioni in esso contenute e familiarizzare con le procedure corrette d'uso e di manutenzione dello strumento.

La casa costruttrice non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti, compresa la perdita di utili, o per qualsiasi altro danno di natura commerciale che possa derivare dall'uso del prodotto non conforme a quanto descritto nel presente manuale.

- Conservare questo manuale per consultazione e a supporto dell'addestramento del personale
- Non sovraccaricare lo strumento oltre il valore di portata massima
- Non applicare i carichi in modo brusco.
- Non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti per premere i tasti
- Non tentare di aprire lo strumento.
- Non rimuovere i sigilli di conformità presenti sullo strumento.
- Non immergere lo strumento in acqua o altri liquidi
- Fate eseguire regolarmente le operazioni di manutenzione e le verifiche metriche successive

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

3. USO PREVISTO

Tale dispositivo è destinato ad essere utilizzato per pesare le persone, in sede di ambulatorio medico, a scopo diagnostico generale.

Personale destinato all'uso del prodotto: operatori e medici che abbiano dimestichezza con il prodotto.

Controllo e Responsabilità: il dispositivo medico deve essere utilizzato sotto la supervisione di un medico qualificato o personale qualificato addetto alla manutenzione e verifiche periodiche.

Limiti d'uso: tale dispositivo medico può essere utilizzato solamente come descritto nel presente manuale.

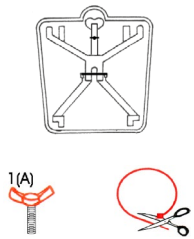
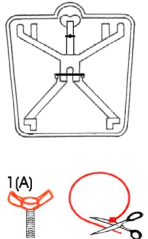
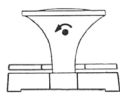
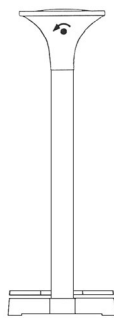
Vita utile del prodotto: 10 anni

4. SPECIFICHE TECNICHE

Modello	960 150A	R150A colonna
		
Capacità	150 kg	150kg
Divisione	1000g	1000g
Fabbricante	Wunder Sa.bi. srl Trezzo S/Adda Milano Italy	
Approvazione OIML	Classe IIII	Classe IIII
Unità di misura	Kg	
Temperatura operativa	da +10°C a +40°C	
Accessori		Statimetro telescopico 60-210/225 cm : 1mm / 2~6.6FT

5. ISTRUZIONI PER L'USO

960 150A	R150A colonna
Lo strumento si presenta pronto per l'utilizzo senza accessori da montare, completo di manuale con tutte le istruzioni per un corretto utilizzo dello strumento.	Lo strumento si presenta pronto per l'utilizzo senza accessori da montare, completo di manuale con tutte le istruzioni per un corretto utilizzo dello strumento. Accessori: - Statimetro ad asta 65-200cm (optional) - Ruote per il trasporto (optional)
INDICAZIONE PARTI	
	
1. Testa con quadrante analogico 2. Pedana rivestita in gomma 3. Base 4. Indicatore del peso 5. Vite regolazione dello zero	1. Testa con quadrante analogico 2. Pedana rivestita in gomma 3. Base 4. Indicatore del peso 5. Vite regolazione dello zero 6. Colonna ACCESSORI (OPTIONAL) 7. Staffa di supporto per statimetro 8. Statimetro telescopico 9. Kit ruote trasporto (solo su richiesta)

960A Preparazione all'uso	R150A Preparazione all'uso
1 	1 
1. Capovolgere lo strumento: togliere la fascetta rossa e svitare la vite a farfalla rossa per sbloccare il meccanismo delle leve.	
2 	2 
2. Posizionare lo strumento su una superficie piana per ottenere affidabilità nella misurazione del peso.	
3 	3 
3. Accertarsi che l'indice del peso (lancetta) sia sullo zero. Se non fosse posizionato correttamente a zero agire manualmente con la vite di regolazione posizionata dietro alla testa della strumentazione.	
4. Salire sulla base (pedana) della bilancia e leggere il peso attraverso l'indicazione della lancetta.	



Per entrambi i modelli **960 150A / R150A** il tappetino è removibile per consentire una migliore igienizzazione.

6. ASSEMBLAGGIO STATIMETRO TELESCOPICO (OPTIONAL)



Posizionare il supporto sul retro della colonna e fissarlo con le 2 viti in dotazione poste sulla colonna.

7. UTILIZZO STATIMETRO MANUALE MECCANICO (OPTIONAL)



PER LA MISURAZIONE DELL'ALTEZZA IL PAZIENTE VA FATTO SALIRE SULLA PEDANA DELLA BILANCIA

Misure superiori a 131 cm		Misure inferiori a 130 cm	
1	Alzare la parte superiore dello statimetro.	1	Abbassare la paletta poggia testa e premere il fermo centrale nero.
2	Posizionare la paletta poggia testa orizzontalmente.	2	Tenendo premuto il fermo nero abbassare la paletta poggia testa.
3	Abbassare l'asta fino al punto in cui la paletta tocca la testa del paziente. L'altezza può essere letta nel punto 'A'.	3	Abbassare l'asta fino al punto in cui la paletta tocca la testa del paziente. L'altezza può essere letta nel punto 'B'.

8. CONFORMITÀ

PESAPERSONE MECCANICA WUNDER MODELLO: 960 150A / R150A MATRICOLA
Si certifica che questo strumento è stato controllato e ha superato positivamente il collaudo funzionale. Risponde alle seguenti norme e direttive: 2009/23/CE; EN45501; REGOLAMENTO (UE) 2017/745

9. TARGHETTE IDENTIFICATIVE



Nella targhetta metrologica applicata è indicato l'anno di fabbricazione (M YY) es. M 24 = 2024, M 25 =2025...e così via.

 REF 960 150 A Max = 150 kg e = d = 1000 g Min = 10 kg +5 °C / +35 °C Manufacturer: Wunder Sa.Bi. s.r.l. Via Vecchia per Monza, 20 20056 - Trezzo sull'Adda (MI) - Italy CE M YY 0474 T12037 rev 0 SN 0000	IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2017/745 CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745 CE 0425
UDI  2025-01-16 MD (01)08052570460052 (11)250116 (21)C24010000 IC: 00011A SN C24010000	
 REF R150A Max = 150 kg e = d = 1000 g Min = 10 kg +5 °C / +35 °C Manufacturer: Wunder Sa.Bi. s.r.l. Via Vecchia per Monza, 20 20056 - Trezzo sull'Adda (MI) - Italy CE M YY 0474 T12037 rev 0 SN 0000	IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2017/745 CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745 CE 0425
UDI  2025-01-17 MD (01)08052570460007 (11)250117 (21)C24010000 IC: 00021A SN C24010000	

10. MANUTENZIONE E ASSISTENZA



ATTENZIONE!

Si raccomanda di mantenere sotto controllo lo strumento in dotazione con una corretta manutenzione periodica, con periodicità da definire a cura dell'utilizzatore.

Raccomandiamo di far eseguire tale controllo da personale qualificato per effettuare l'intervento. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico assistenza clienti che è a vostra disposizione.

Per una migliore e più lunga durata del prodotto e bene eseguire periodicamente una accurata pulizia generale. La pulizia dello strumento va effettuata con un panno morbido, inumidito con acqua o detergente neutro, evitando l'utilizzo di solventi o sostanze abrasive. In caso di prolungato inutilizzo dello strumento, rimuovere le batterie dal terminale e coprire la strumentazione per mantenerla integra. Durante il trasporto, prestare attenzione a non sottoporre lo strumento a urti o eccessive sollecitazioni meccaniche. In caso di riparazione o assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore o a un centro autorizzato contattando **service2@wunder.it** o **sales@wunder.it**.

11. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO

Accantonamento

In caso di accantonamento per un lungo periodo è necessario proteggere lo strumento dalla polvere.

Rottamazione

Quando si decide di non utilizzare più questo articolo, si raccomanda di renderlo inoperante. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti che possono essere causa di fonti di pericolo.

12. GARANZIA

Il presente certificato deve essere conservato fino alla data di scadenza della garanzia.

Esso dovrà essere presentato insieme alla fattura, ricevuta fiscale, o bolla di accompagnamento che riporti il nominativo del rivenditore e la data di vendita ogni volta che si renda necessario un intervento tecnico. Diversamente l'utente perderà ogni diritto di garanzia.

La garanzia ha inizio dalla data di acquisto e ha validità per il periodo previsto dal catalogo/listino vigente.

Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita entro i termini stabiliti, delle parti componenti l'apparecchio che a insindacabile giudizio della casa costruttrice risultassero difettosi all'origine; sarà quindi facoltà della Wunder, riparare o sostituire l'articolo.

La garanzia non copre:

- Avarie da trasporto, danni da cadute, danni causati da negligenza e manomissione
- Danni per incapacità d'uso dell'apparecchio e uso improprio dello stesso
- Danni causati dall'insufficienza o inadeguatezza dell'impianto elettrico o alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o di altra natura
- Danni dovuti a errata installazione dell'apparecchio e riparazioni effettuate da personale non autorizzato
- Interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti
- Manutenzione ordinaria e ciò che può essere considerato normale deperimento per uso

Il servizio di intervento può essere inoltre rifiutato quando l'apparecchiatura sia stata modificata o trasformata in qualsiasi modo.

Nel caso di intervento a domicilio l'utente è tenuto a corrispondere il diritto fisso d'uscita, qualora invece l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri del Servizio di Assistenza autorizzati Wunder, le spese ed i rischi relativi al trasporto saranno a carico dell'utente.

Wunder non risponde altresì di eventuali danni di qualsiasi natura, che possano derivare direttamente o indirettamente a persone, animali o cose conseguenti all'inosservanza di tutte le istruzioni indicate in questo manuale o comunque derivanti da un uso improprio.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo.



Wunder Sa.Bi. S.r.l.
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. +39 02 90964566
www.wunder.it