

FRANTUMAPILLOLE




Polverizza pillole di ogni misura

- 1) Posizionare la pillola nella cavità trasparente
- 2) Avvitare la parte blu fino in fondo
- 3) Dissolvere il medicamento in polvere in latte, acqua ...



ATTENZIONE: non frantumare capsule a rilascio temporizzato, nel dubbio consultare il proprio farmacista.

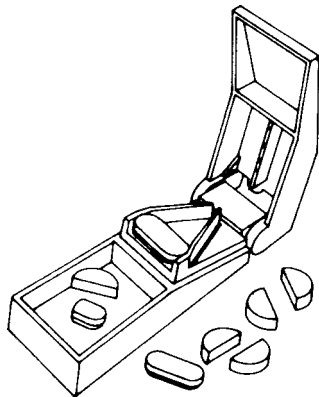

TAGLIAPILLOLE



Taglia in due pillole di ogni misura

- 1) Posizionarlo su una superficie pia
- 2) Riporre la pillola nella "V" in modo che la pillola tocchi le due estremità
- 3) Abbassare dolcemente il coperchio fino a chiudere il tagliapillole
- 4) Conservare le porzioni non utilizzate nell'apposito vano



ATTENZIONE: lama tagliente, tenere fuori dalla portata dei bambini.



GIMA

**TAGLIAPILLOLE - FRANTUMAPILLOLE
PILL SPLITTER - PILL PULVERIZER
COUPE-PILULE - BROYEUR DE PILULES
CORTAPÍLDORAS - TRITURADOR DE PÍLDORAS
CORTA-COMPRIMIDOS - QUEBRA-COMPRIMIDOS
ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΤΗΣ ΧΑΠΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ**

مكسر لأقراص الدواء - قاطع لأقراص الدواء

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

الحذر: على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكاملة قبل البدء باستعمال المنتج.



M25730-M-Rev.2-03.10

GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com