



ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

27246



Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel 199 400 401 – fax 199 400 403 – gima@gimaitaly.com
Export: phone + 39 02 953854209/221/225 – fax + 39 02 95380056
–export@gimaitaly.com – www.gimaitaly.com

1. Caratteristiche tecniche

- 1) Portata massima: 5000 g
- 3) Portata minima: 2g

- 2) Precisione: 1g
- 4) Scarto peso: $\pm 0.3\%$

2. Tasti funzione

Tasto [Alimentazione / Tara]



Tasto [g/lb-oz]

LCD

3. Istruzioni d'uso

1) Accensione



Estrarre dal vano batterie la pellicola protettiva nella direzione indicata dalla freccia.

2) Indicazioni d'utilizzo



Posizionare la bilancia su una superficie piana e rigida.

3) Tara

(1)



Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere la bilancia ed appoggiare il recipiente sulla piattaforma. Premere nuovamente il pulsante "ON/OFF" per eliminare il peso del vassoio, infine il display LCD visualizzerà la scritta zero.


(2)



La stessa operazione può essere effettuata appoggiando il recipiente sulla piattaforma, prima premere il pulsante "ON/OFF" per accendere la bilancia.

4) Misurazione del peso



Disporre gli oggetti da pesare nel recipiente sul piatto della bilancia o direttamente sul piatto della bilancia. Il peso può essere letto immediatamente. Togliere gli oggetti, la bilancia si resetterà automaticamente sul valore zero, quando il display mostra la scritta zero la bilancia è pronta per la misurazione successiva. Nel caso la bilancia non sia utilizzata si spegnerà automaticamente in 2 minuti, il dispositivo può anche essere spento manualmente premendo il tasto “”

5) Selezionare l'unità di misura



L'utente può scegliere l'unità di misura azionando il tasto “”


4. Prescrizioni

1)




Indicatore batteria quasi scarica, sostituire gli accumulatori con 1 nuova batteria (CR2032).

2)

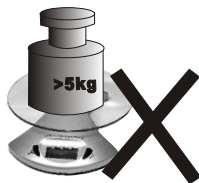

Non sovraccaricare la bilancia, il peso complessivo del recipiente e degli oggetti non dovrebbe eccedere 5 kg. Altrimenti la bilancia potrebbe danneggiarsi.

3)

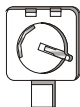

Togliere le batterie se non si prevede di utilizzare la bilancia per lunghi periodi.



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc. La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulta asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.



Disposal: The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment. For further information on recycling points contact the local authorities, the local recycling center or the shop where the product was purchased. If the equipment is not disposed of correctly, fines or penalties may be applied in accordance with the national legislation and regulations.

GIMA WARRANTY CONDITIONS Congratulations for purchasing a GIMA product. This product meets high qualitative standards both as regards the material and the production. The warranty is valid for 12 months from the date of supply of GIMA. During the period of validity of the warranty, GIMA will repair and/or replace free of charge all the defected parts due to production reasons. Labor costs and personnel travelling expenses and packaging not included. All components subject to wear are not included in the warranty. The repair or replacement performed during the warranty period shall not extend the warranty. The warranty is void in the following cases: repairs performed by unauthorized personnel or with non-original spare parts, defects caused by negligence or incorrect use. GIMA cannot be held responsible for malfunctioning on electronic devices or software due to outside agents such as: voltage changes, electro-magnetic fields, radio interferences, etc. The warranty is void if the above regulations are not observed and if the serial code (if available) has been removed, cancelled or changed. The defected products must be returned only to the dealer the product was purchased from. Products sent to GIMA will be rejected.