



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

METRO MISURA NEONATI
BABY HEIGHT MEASURE
TOISE POUR NOURRISSONS
MEDIDOR DE ESTATURA PARA BEBÉS
MEDIÇÃO DA ALTURA DO BEBÊ
GRÖSSENMESSER FÜR BABYS
POMIAR WZROSTU DZIECKA
CSECSEMŐ HOSSZMÉRŐ
ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ

قياس طول الطفل

REF

27331



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



0476



Il metro misura neonati GIMA è un dispositivo di precisione per misurare in cm la statura dei neonati e valutare la curva di crescita. Il metro misura neonati è destinato all'uso negli ambulatori pediatrici, negli ospedali per bambini oppure per le visite a domicilio di pediatri. Sulla staffa di fissaggio superiore sono presenti dei fori per appendere il materassino alla parete durante il non utilizzo. Il materassino può misurare 10-99 cm, con una approssimazione di ± 5 mm.

UTILIZZO


Come effettuare una misurazione

1. Disporre il neonato sdraiato sul materassino graduato dopo aver posizionato gli arresti in plastica correttamente verticali a 90° rispetto la scala graduata. La testa del neonato va appoggiata all'arresto in plastica tenendo con la mano sinistra ben saldo il lattante.
 2. Con la mano destra avvicinare ai piedi del neonato l'arresto posto al termine della scala graduata.
 3. Prestare attenzione a tenere dritte le gambe del neonato. Si consiglia di premere delicatamente con la mano sinistra le ginocchia del neonato verso il piano del materassino.
 4. Quando l'arresto finale è posizionato alle piante dei piedi del bambino ad angolo retto, leggere la statura indicata sul fondo del materassino graduato.
- Seguendo le indicazioni sopra indicate è possibile raggiungere un notevole livello di precisione.


INTERPRETAZIONE

Misurare l'altezza del neonato è utile per definire la corretta curva di crescita tramite il calcolo dei percentili, associandola al peso. Il "peso e l'altezza" dei neonati possono essere confrontati con curve di riferimento chiamate Tanner-Whitehouse. Queste curve identificano delle linee (percentili) che definiscono il range considerato normale e accettabile a seconda dell'età.

Peso: maschi da 0 a 3 anni

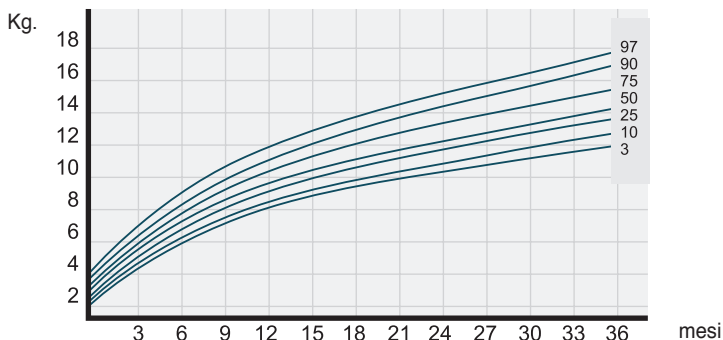

Peso: femmine da 0 a 3 anni

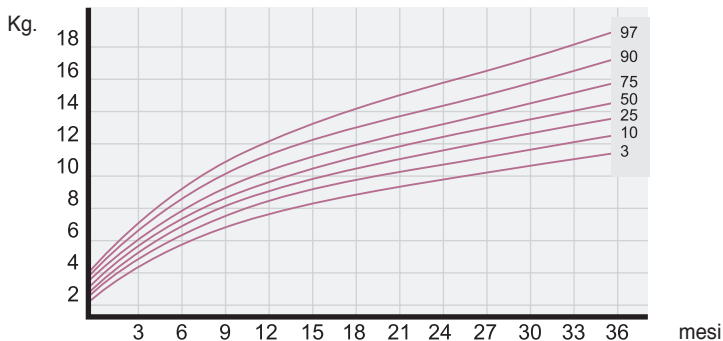

È auspicabile che la curva di crescita non sia troppo al di sopra o al di sotto della media (percentile 50). Un percentile di 50 (in linea mediana) in altezza significa che il 50% dei bambini della sua età sono più alti e l'altro 50% sono inferiori. L'utilità di queste curve è quella di evidenziare eventuali differenze che possono far ipotizzare (e quindi consigliare di eseguire una visita presso un medico curante) obesità, mancanza di crescita ossea o bassa statura.

PULIZIA

Pulire il materassino con un detergente delicato e un panno morbido.

AVVERTENZE DI SICUREZZA



- Non lasciare mai il neonato sdraiato sul materassino senza la supervisione di un adulto.
- Eseguire le misurazioni solo su superfici d'appoggio sicure (dalle quali il lattante non può cadere).
- Pulire e disinfettare regolarmente il materassino graduato.

Temperatura ambientale per il funzionamento: da 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura ambientale per conservazione e trasporto: -20°C~50°C (-4°F~122°F)

Umidità ambientale per il funzionamento: 15~90%

Umidità ambientale per conservazione e trasporto: 15~95%

	Fabbricante		Numero di lotto
	Codice prodotto		Limite temperatura
	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE		Limite umidità
	Leggere le istruzioni per l'uso		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Conservare al riparo dalla luce solare

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.