

MANUALE DI UTILIZZO

MNPG355-05 Edizione 30/06/2023

TAP2000

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Introduzione

Il dispositivo **TAP2000** è un applicatore a 6 solenoidi per magnetoterapia a bassa frequenza. Progettato per trattare la zona della colonna vertebrale appoggiandolo sullo schienale di una sedia o poltrona.

Il dispositivo è classificato classe I, conformemente alla regola 1 (4.1) di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/745 del parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici.

UDI-DI di base: 8019781PEMFLFTAPQS

UDI-DI: 08019781472090

Informazioni tecniche

Caratteristiche tecniche:

- Dimensione applicatore: 40x40cm;
- 6 solenoidi;
- 2 cavi di collegamento;
- Compatibile con i modelli MAG2000 e LaMagneto.

Etichettatura




Etichetta 1
(dietro il dispositivo)


Etichetta 1



Etichetta cavo

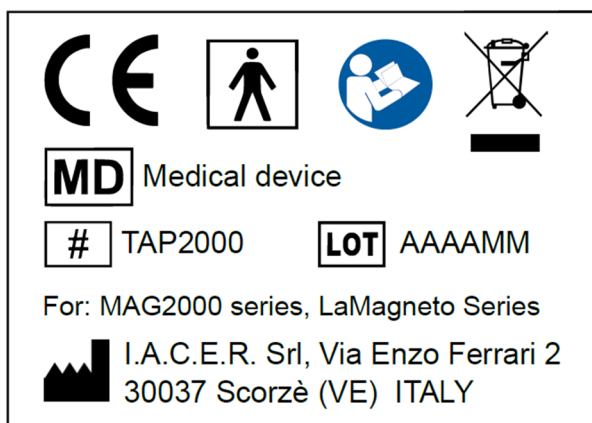




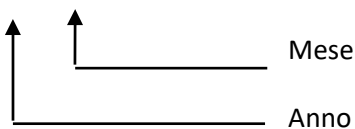


LOT AAAA-MM

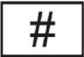

Simboli:

Simbolo	Significato
	Logo del fabbricante
	In conformità al regolamento (UE) n. 2017/745
	Dati Fabbricante
	Numero di lotto (AAAAMM)
	Dispositivo medico

Simbolo	Significato
	Modello
	Seguire le istruzioni per l'uso
	Direttiva RAEE per lo smaltimento dei rifiuti elettronici
	Parte applicata tipo BF
	Temperature ammesse (temperature di stoccaggio, su confezione)
	Umidità relativa (umidità relativa di stoccaggio, su confezione)

Trasporto e immagazzinamento

Non vi sono particolari cure da usare durante il trasporto. Per quanto riguarda l'immagazzinamento, l'apparecchiatura è protetta fino alle seguenti condizioni ambientali:

temperatura ambiente da +5 a + 40 °C

umidità relativa dal 15 al 93%

Modalità d'uso

Istruzioni per l'uso di TAP2000

Seguire quanto riportato nel Manuale d'Uso in corredo al dispositivo in possesso. Collegare il tappetino ai due canali del dispositivo.

Seguire le Avvertenze riportate nei manuali d'uso dei prodotti MAG2000 o LaMagneto.


Cura di TAP2000

Pulizia di TAP2000

Per la pulizia di TAP2000 si raccomanda di scollegare l'applicatore a 6 solenoidi dal dispositivo prima di compiere qualsiasi operazione. Procedere alla pulizia del tessuto con un panno inumidito con semplice acqua e sapone neutro ed attendere la completa asciugatura prima di riutilizzare l'applicatore a tre solenoidi per una seduta terapeutica.

Informazioni per lo smaltimento



Il prodotto è soggetto alla normativa RAEE (presenza sull'etichetta del simbolo ) relativa alla raccolta differenziata: per lo smaltimento del prodotto, usare apposite aree attrezzate alla raccolta di materiale elettronico contattando le competenti autorità del proprio Paese o direttamente il fabbricante.

Manutenzione e Assistenza

Il dispositivo non prevede alcuna particolare manutenzione ordinaria. Si prega di contattare il fabbricante in modo che ogni due anni venga verificata la funzionalità del dispositivo. Il fabbricante è il solo esclusivista per interventi di assistenza tecnica sull'applicatore TAP2000. Per qualsiasi intervento di assistenza tecnica rivolgersi a:

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari, 2 • 30037 Scorzè (VE)

Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684

Garanzia

TAP2000 è coperto da garanzia di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia decade in caso di manomissione, incuria ed uso inappropriato dell'applicatore ed in caso d'intervento sullo stesso da parte di personale non autorizzato dal costruttore o dal rivenditore autorizzato.

Segnalazione di incidenti

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/745, il fabbricante pone all'attenzione dell'utilizzatore la necessità di segnalare qualsiasi grave incidente verificatosi in relazione al dispositivo.

La segnalazione dovrà essere indirizzata:

- *al fabbricante del dispositivo:*

I.A.C.E.R. Srl

Via Enzo Ferrari 2 – 30037

Scorzè (VE) ITALY
Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684
e-mail: iacer@iacer.it

Tutti i diritti sono riservati. TAP2000 ed il logo  sono di esclusiva proprietà di I.A.C.E.R. Srl e sono registrati



I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari 2 - 30037, Scorzè (VE) – Italy
Tel.: (+39) 041 540 13 56 | Email: iacer@iacer.it

www.itechmedicaldivision.com

Share Capital: € 1.000.000 fully paid-up
Tax Code / VAT Number: IT 00185480274
Certified email: iacer@pec.it | SDI: SUBM70N