

(I)

CANNULA RIGIDA CURVA

Dispositivo per aspirazione endouterina e per interruzione volontaria di gravidanza

Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da personale medico specializzato

Il dispositivo è monouso: l'eventuale riutilizzo comporta il rischio di infezioni crociate e/o mancata sterilità o pulizia.

• Non esporre a fonti di calore; • Estrarre il dispositivo dalla confezione immediatamente prima dell'utilizzo ; • Prima dell'utilizzo, ispezionare visivamente il dispositivo per verificarne l'integrità.


Uso previsto: la cannula serve per effettuare aspirazioni endometriali e per effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza.

Indicazioni: è indicata per effettuare aspirazioni endometriali e per effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza

Controindicazioni: è controindicata in presenza di grave infezione vaginale, cervicale e/o pelvica.

Modalità d'uso: dopo aver anestetizzato la paziente: detergere accuratamente la cervice e la vagina con soluzione antisettica; dilatare il canale cervicale; scegliere la cannula del diametro ritenuto idoneo; estrarre la cannula dalla confezione; fissare la cannula al manipolo; introdurre la cannula in cavità uterina; procedere all'aspirazione.

(I)	Caratteristiche che deve avere il manipo della pompa aspirante per ottenere una combinazione sicura tra il raccordo della cannula e il manipo della pompa aspirante:
(GB)	Characteristics the suction pump handpiece must have to obtain a secure fitting between the cannula connector and the suction pump handpiece:
(F)	Caractéristiques que la pièce à main de la pompe aspirante doit présenter pour obtenir un ensemble fiable entre le raccord de la canule et la pièce à main.
(D)	Erforderliche Merkmale des Handstücks der Absaugpumpe für eine sichere Verbindung zwischen dem Anschluß der Kanüle und Handstück der Absaugpumpe.
(E)	Características que debe presentar la pieza manual de la bomba aspirante para obtener una una combinación segura entre la misma y la conexión de la cánula
(P)	Características que deve ter o manípulo da bomba de aspiração para haver combinação segura entre o conector da cânula e o manípulo da bomba de aspiração
(CZ)	Charakteristiky, které musí splňovat násadec aspirační pumpy, pro zaručení bezpečného spojení spojky kanyly a násadce aspirační pumpy
CANNULA RIGIDA CURVA	
REF	Ø
CRC 07 S01	7 mm
CRC 08 S01	8 mm
CRC 09 S01	9 mm
CRC 10 S01	10 mm
CRC 11 S01	11 mm
CRC 12 S01	12 mm

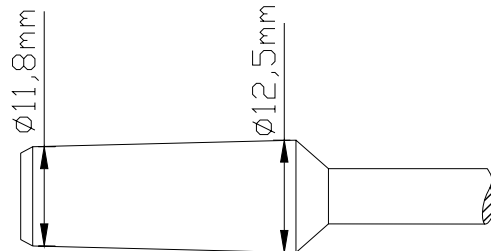

Biogyn s.n.c

Via A. Volta, 14 41037
Mirandola (MO) - Italy



Distributore:

GIMA S.P.A.

Via Marconi, 1

I-20060 Gessate (MI) – Italy

www.gimaitaly.com

