



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Distribuito da - Distributed by:

Gima S.p.A



Via Marconi, 1

20060 Gessate (MI) - Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com


www.gimaitaly.com

SCHERMO FACCIALE GIMA - GIMA FACE SHIELD

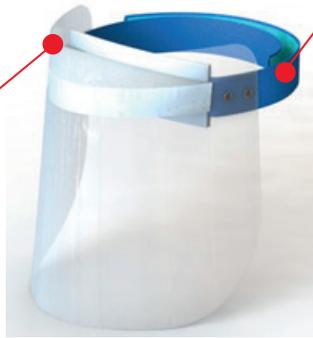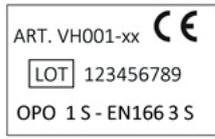

Chiusura a strappo
Loop closure

Accessorio di chiusura intercambiabile
Interchangeable locking accessory

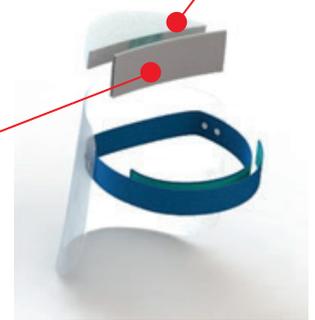

Imbottitura frontale intercambiabile
Replaceable forehead padding

IT

MARCATURA E SIMBOLOGIA

VH001: Modello Prodotto, xx codice colore del nastro **LOT**: numero di lotto OPO: Identificazione del fabbricante; 1: Classe ottica; S: Simbolo di impatto a bassa energia; - EN166 Norma tecnica di riferimento, 3: simbolo per liquidi; S: simbolo impatto bassa energia, CE: certificazione CE. Lo schermo è conforme al Regolamento UE 2016/425 e certificato CE da parte dell'Organismo Notificato N. 0426 (Italcert Srl, Viale Sarca 33, Milano) ed è conforme alla EN 166:2001. La dichiarazione di conformità CE è disponibile all'indirizzo web del Fabbricante e di Gima www.gimaitaly.com

APPLICAZIONE E REGOLAZIONE

- 1) Applicare l'appoggio frontale e serrarlo con la chiusura a strappo.
- 2) Appoggiare la maschera sulla fronte posizionandola centralmente.
- 3) Quindi tendere le cinghie e fissarle con la chiusura a strappo nella posizione desiderata.

MANUTENZIONE E RIUTILIZZO

Esaminare lo schermo prima di ogni utilizzo: controllare la pulizia, la trasparenza, l'assenza di incrinature, e l'integrità delle cuciture. Verificare inoltre che la fascia giro testa non risulti logora e, una volta fissata al capo, non si allenti. Sostituire lo schermo se danneggiato

- Effettuare la pulizia in caso di contaminazione con sostanze estranee
- Effettuare la sostituzione in caso di danneggiamento o in caso di contaminazione non rimovibile.

Pulizia: Il DPI deve essere pulito con detergente non aggressivo, acqua tiepida utilizzata con un panno morbido da utilizzarsi anche in fase di risciacquo. Per le attività di sanificazione utilizzare soluzioni igienizzanti a base alcolica. L'appoggio frontale può essere lavato in lavatrice a 40° per la normale igiene, ma se occorre la sanificazione deve essere sostituito.

Riutilizzo: Lo schermo è riutilizzabile purché preventivamente sanificato e previa sostituzione dell'appoggio frontale e l'eventuale accessorio di chiusura opzionale.

CONSERVAZIONE STOCCAGGIO IMBALLO E TRASPORTO

Proteggere dalla luce diretta del sole, dalle luci fluorescenti, dai raggi-X ed ozono. Conservare in luogo asciutto all'interno della loro confezione e proteggerli da deformazioni. Temperatura: +5°C ÷ +40°C, Umidità relativa: < 60%. Trasportare in busta chiusa e ben sigillata. Scadenza: 5 anni, dalla vendita all'utilizzatore finale, se conservato nel proprio imballo originale e nelle condizioni riportate sopra.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- ⚠ I materiali che possono venire a contatto con la pelle del portatore potrebbero causare reazioni allergiche agli individui sensibili.
- Lo schermo facciale, qualora indossato sopra occhiali oftalmici di riferimento, può trasmettere impatti, generando quindi un pericolo per il portatore
- Sostituire lo schermo qualora l'oculare risulti graffiato o danneggiato.
- Il protettore non è idoneo alla protezione contro le particelle ad alta velocità né a temperatura ambiente né a temperature estreme.

M30846-IT-GB-FR-ES-Rev.1-11.20



Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
(O.P.O srl). Società Unipersonale
Via Bellini, 33 40067 Rastignano - (Pianoro) BO Italy
www.opo.it
Made in Italy

REF 30846

Modello/Model VH001

