

IT – BOCCAGLI MONOUSO IN CARTONE ISTRUZIONI PER L'USO

DESTINAZIONE D'USO: I boccagli monouso sono destinati ad essere utilizzati insieme alle apparecchiature di studio della funzionalità polmonare e permettono al paziente di effettuare l'esame senza avere un contatto diretto con l'apparecchiatura.

Il paziente manipola personalmente il boccaglio inserendolo nell'apparecchiatura. Il boccaglio devono essere applicati a contatto soltanto con pelle integra, pulita e sana.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO: I dati identificativi (codice, lotto e data di produzione) sono riportati nell'etichetta identificativa apposta sulla scatola.

UTILIZZO:

- Seguire sempre e comunque le istruzioni d'uso dell'apparecchio ove si applica il boccaglio
- Inserire il boccaglio nel sensore dell'apparecchio (turbina o pneumotacometro) senza forzare.
- Non riutilizzare mai il boccaglio, per non esporre il paziente a rischi di contaminazione incrociata.
- Non aprire prima dell'uso.
- Non usare se l'imballo è danneggiato.
- Il dispositivo non è adatto all'uso in pediatria neonatale.

Prima dell'utilizzo conservare in luogo fresco e asciutto.

SMALTIMENTO E SICUREZZA: Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in normali contenitori di residui solidi non tossici o in quelli dei rifiuti ospedalieri generici.


CONTROINDICAZIONI: In base alle esperienze e ai risultati di diverse analisi non esistono effetti nocivi in conseguenza di un uso appropriato del prodotto.

IMMAGAZZINAMENTO: L'immagazzinamento deve avvenire in luogo fresco e asciutto.

AVVERTENZE:

- Il confezionamento singolo in busta termosaldata garantisce l'assenza di carica batterica, che viene monitorata periodicamente secondo il sistema di qualità del produttore.
- Se il dispositivo fosse riutilizzato, esistono rischi di infezione incrociata per il paziente.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

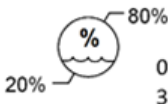

LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750