


ELETTRODI per DEFIBRILLAZIONE ADULTO Multifunzione

DEFIBRILLATORE, Monitoraggio, Cardioversione sincronizzata, Stimolazione cardiaca

Istruzioni


CUA0903PF

Passo-1

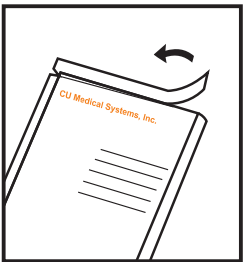


Strappare la confezione degli elettrodi.

Passo-2

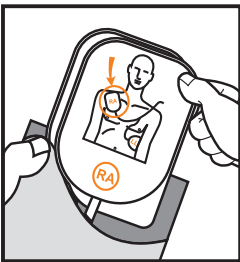


Rimuovere gli elettrodi dalla confezione.

Passo-3

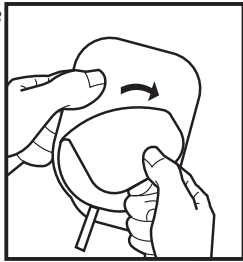

Rimuovere la copertura protettiva del gel conduttore degli elettrodi.

Passo-4

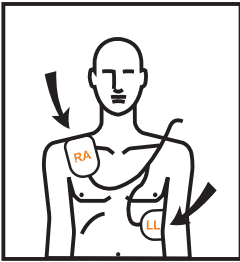

Attaccare gli elettrodi al paziente.
Vedere l'illustrazione sul retro degli elettrodi per il corretto posizionamento.

REF

CUA0903PF

LOT

YMMDDYY-XX

YYY-MM

YYY-MM

UDI

(01)08809435482083(17)YMMDD(10)YMMDDYY-XX

CU Medical Systems, Inc.



ATTENZIONE

- Non aprire fino al momento dell'uso.
- Non utilizzare se il gel è secco
- Non piegare, schiacciare, forare.
- Non utilizzare se l'elettrodo è danneggiato.
- Per un uso a lungo termine, applicare un nuovo set di elettrodi ogni 24 ore.



ATTENZIONE

- L'uso improprio o l'applicazione errata di un qualsiasi elettrodo possono comportare ustioni al paziente o l'inefficacia della terapia.
- La stimolazione cardiaca richiede derivazioni ed elettrodi separati per il monitoraggio.



CU Medical Systems, Inc.

130-1, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of KOREA
Tel : +82 33 747 7657 Fax : +82 33 747 7659
Homepage : <http://www.cu911.com>

EC

REP

Medical Device Safety Service, GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

CUA0903PF

U.S. Patent No. : 6,048,640

KR

모니터링, 페이스, 동기식 심장율동진한 및 제세동을 위한 자가 접착성 겔 및 폴리머 재질의 일회용 전극 2개

GB

2 self-adhesive, polymer, disposable electrodes for monitoring, defibrillation synchronised cardioversion and pacing.

I

Coppia elettrodi polimerici autoadesivi monouso per monitoraggio, defibrillazione, cardioversione sincronizzata e pacing.

D

2 selbstklebende Polymer-Einmalelektroden zur EKG-Überwachung, Defibrillation, synchronisierter Kardioversion und Schrittmacherfunktion.

E

2 electrodos polímero, desechables, autoadhesivos, para monitorización, desfibrilación, cardioversión sincronizada, y marcapasos.

NL

2 zelfklevende, polymere, wegwerp elektroden geschikt voor monitoring, defibrillatie, synchrone cardioversie en externe pacing.

F

2 électrodes pré-géifiées, adhésives, à usage unique pour monitoring, défibrillation, cardioversion, entrainement électrosystolique externe.

N

2 selvklebende, engangs, polymer-elektroder for monitoring, defibrillering, elektrokonvertering og pacing.

SF

Kaksi itsekiinnittyvää, kertakäyttöistä elektrodia monitorointiin, defibrilointiin, synkronoituun rytminsiirtoon sekä ulkoiseen tahdistukseen.

S

Två självhäftande, polymer, engångselektroder för monitoring, defibrillering, synkroniserad elkonvertering och pacing.

DK

2 selvklæbende, polymer, engangs elektroder til monitoring, defibrillering, synkroniseret DC stød og eksternt pacing.

USA

2 self-adhesive, polymer, disposable electrodes for monitoring, defibrillation synchronised cardioversion and pacing. Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

GR

2 αυτοκόλλητα, πολυμερή ηλεκτρόδια μιας χρήσης για παρακολούθηση, απινίδωση, συγχρονισμένη καρδιομετατροπή και pacing (λειτουργία βηματοδότη).

J

粘着ゲル付ポリマーディスプレイ電極 2個
モニター用、除細動用、同期電式的除細動・経皮ペースング用

中

两块自贴一次性的电极用于监测心律、除颤，并同步最转复心律和心脏起搏