

BASTONE A LED

Manuale utente




ATTENZIONE:

Prima dell'utilizzo, accertarsi di aver letto tutte le informazioni e le indicazioni!

- NON cercare di smontare da soli l'apparecchiatura.
- Non inserite aghi o elementi appuntiti nel manico.
- Non battere il bastone sul suolo o su superfici dure.
- ACCERTARSI di mantenere il bastone lontano dal fuoco.
- Spegnerne SEMPRE l'interruttore prima di estrarre le batterie.
- Max. capacità di peso **110 kg**.

SPECIFICHE MANICO

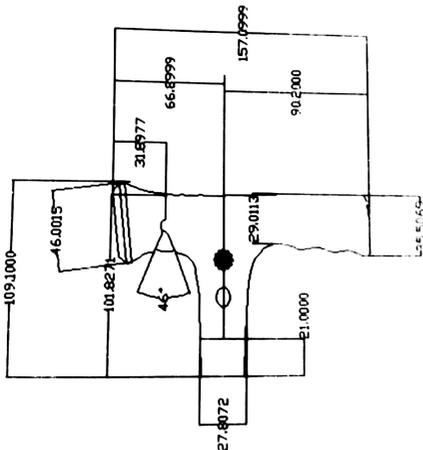


- 4 elementi di luce LED bianco ultra-brillante ϕ 5.
- 2 elementi di luce LED rosso ultra-brillante ϕ 5 - lampeggiante di avvertimento.
- Funzione sirena 100 dB.
- Fissaggio con nastro di fermo a mano.
- Bastone disponibile nei modelli pieghevole o regolabile.

ASSEMBLAGGIO




Sollevare per aprire il coperchio sul retro.

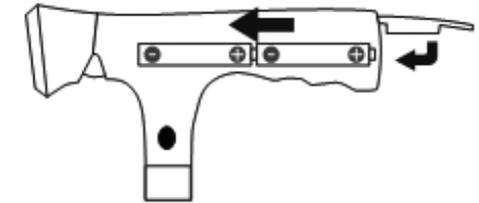


Posizionare due batterie AAA all'interno del manico, poi abbassare il coperchio per chiudere.

FUNZIONAMENTO DELL'INTERRUTTORE ON/OFF

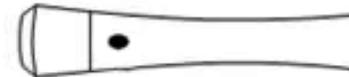

Pulsante superiore


- Premere una volta per accendere le luci LED.
- Premere due volte per accendere e fare lampeggiare simultaneamente le luci di avvertimento a LED bianche + rosse.
- Premere nuovamente per spegnere.

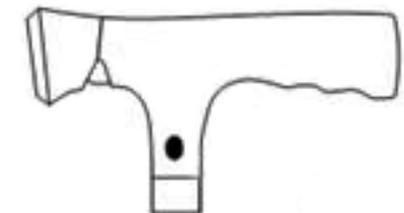

Pulsante laterale

- Premere per avviare il cicalino di avvertimento.

NOTA DI IMPIEGO

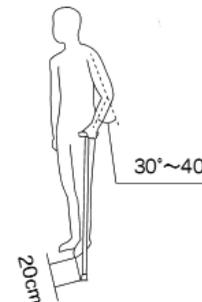

Posizione di utilizzo consigliata.



Altezza regolabile.
10 posizioni da 78 a 100.5 cm.



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF

GB-806 (GIMA 43050)
GB-806 (GIMA 43052)

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por
GIMA S.p.A. - Via Marconi, 1 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqué par/Fabricado por:
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd. No.1, Dali, Shenzen Town, Ninghai County
Ningbo 315614, China
Made in China

