



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PEDALIERA PIEGHEVOLE PER RIABILITAZIONE CON DISPLAY
FOLDABLE PEDAL EXERCISER WITH DISPLAY
APPAREIL D'EXERCICE À PÉDALE PLIABLE AVEC ÉCRAN
PEDALEADOR PLEGABLE CON PANTALLA
BICICLETA DE EXERCÍCIO DOBRÁVEL COM ECRÃ
ZUSAMMENKLAPPBARER PEDAL-EXERCISER MIT DISPLAY
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ
SALIEKAMA PEDĀĻU IERĪCE REHABILITĀCIJAI AR DISPLEJU
PEDALIER PLIABIL PENTRU RECUPERARE CU DISPLAY
SKLADACÍ PEDÁLOVÝ TRENAŽÉR NA REHABILITÁCIU S DISPLEJOM
ZLOŽLJIVO KOLO ZA REHABILITACIJO Z NASLONOM
HOPFÄLLBAR BENCYKEL FÖR REHABILITERING MED DISPLAY

Manuale utente - User manual - Notice d'utilisation - Manual del usuario - Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Εγχειρίδιο χρήσης - Lietotāja rokasgrāmata - Používateľská príručka - Uporabniški priročnik - Användarmanual

GIMA 43151


Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqu  par/Fabricado por/Hergestellt von/Tillverkad av Ra ots/
Proizvajalec/Κατασκευασ νο απ /Produce de/Vyr ba
Zhejiang Todo Hardware Manufacture co., Ltd
No.31th, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF TD001P-3

Importato da/Imported by/Import  par/Importado por/Eingef hrt von
Import rad av/Import ja/Uvozil/Eισαγωγ  απ /Importat de/Dov  al
Gima S.p.A. - Via marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimnaitaly.com - export@gimnaitaly.com
www.gimnaitaly.com



DESCRIZIONE

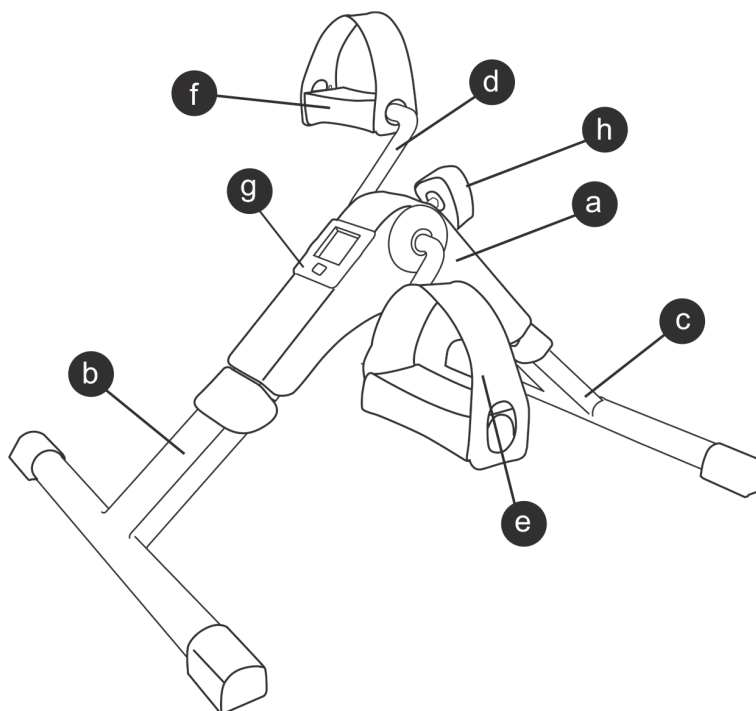

MONTAGGIO

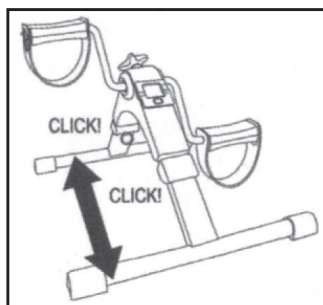


fig. 1

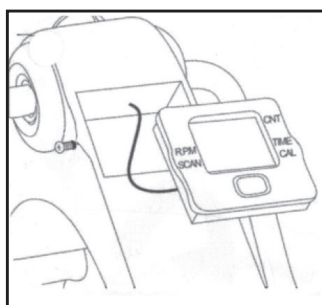


fig. 2

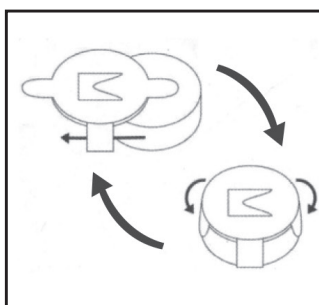


fig. 3

RINGRAZIAMENTO PER L'ACQUISTO

Grazie per la fiducia e per l'acquisto del nostro prodotto. Siamo sicuri che sarete sempre soddisfatti di tutti i nostri prodotti.

Il nostro servizio clienti è sempre a vostra disposizione per rispondere meglio alle vostre domande e soddisfare le vostre esigenze:

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| a. Corpo principale | e. Pedale destro |
| b. Base anteriore | f. Pedale sinistro |
| c. Base posteriore | g. Contatore e scomparto batterie |
| d. Manubrio | h. Regolatore sforzo |

AVVERTIMENTI PER LA SICUREZZA

- Le presenti istruzioni sono estremamente importanti. Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo e di tenerlo sempre a portata di mano per eventuali consultazioni.
- Non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto o per qualsiasi altro uso non descritto nel presente manuale.
- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, disimballare il prodotto e verificare che esso sia in condizioni perfette. Se non lo è, non utilizzare il dispositivo e contattare i responsabili. La garanzia copre infatti qualsiasi

danno presente fin dall'origine o eventuali difetti di produzione.

- Il presente prodotto è indicato esclusivamente per uso domestico. Non utilizzare il prodotto all'esterno. Mai utilizzare il dispositivo esposto ad agenti atmosferici come pioggia, neve, sole, ecc.
- Il dispositivo può essere impiegato da bambini da 8 anni in su e da persone disabili, persone con ridotte capacità mentali o sensoriali, persone senza esperienze o conoscenze, a condizione però che siano fornite loro adeguata supervisione e istruzioni per l'uso e che abbiano compreso i rischi legati all'utilizzo del prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere eseguite dall'utente, ma non dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano soggetti a supervisione di adulti.
- Tenere il dispositivo al di fuori della portata dei bambini al di sotto di 8 anni.
- I bambini devono essere tenuti sotto controllo assicurandosi che non giochino con il dispositivo.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Non mischiare batterie nuove con batterie vecchie e usurate.

MONTAGGIO

1. Distendere le basi anteriore e posteriore finché non sentite un "clic". Questo segnale indica che la struttura è correttamente fissata ai fini della pratica dell'esercizio. Prima di eseguire qualsiasi tipo di esercizio, accertarsi che entrambe le basi siano ben fissate (vedi fig. 1).
2. Collocare l'unità display nel rispettivo alloggiamento. Il filo deve essere opportunamente inserito all'interno (vedi fig. 2).
3. Collocare la vite del regolatore dell'intensità nel proprio alloggiamento, nella parte superiore della mini bike.

ISTRUZIONI PER L'USO

La pedaliera ha 5 funzioni diverse:

- CNT – CONTATORE: Numero totale dei giri effettuati con il dispositivo durante una sessione d'allenamento.
 - TEMPO: Conta il tempo effettivo di esercizio durante la data sessione d'allenamento.
 - CAL - CALORIE: Calorie bruciate durante l'esercizio.
 - RPM - Giri al minuto: Mostra il numero medio di giri al minuto sulla base dell'intensità dell'esercizio di pedalata.
 - SCAN - Mostra le altre funzioni ogni 5 secondi a turno.
1. Prima di iniziare l'esercizio, posizionare il dispositivo su una superficie piana e regolare la resistenza di pedalata a seconda della forza desiderata per l'esercizio (h). Al fine di ottenere una resistenza maggiore, girare il quadrante in senso antiorario.
 1. Premere il pulsante rosso collocato sul contatore (g) o iniziare a pedalare. Il contatore (g) si avvierà.
 - Quando si smette di pedalare, sul display viene visualizzata la dicitura STOP, che scomparirà non appena sarà stato ripreso l'esercizio.
 - Il display si spegne qualche minuto dopo l'arresto della pedalata.
2. Al fine di verificare i risultati ottenuti durante l'esercizio, leggere attentamente la procedura seguente:
Modalità automatica per la visualizzazione dei risultati:
 - Premere il pulsante rosso una sola volta. Lampeggerà la scritta "SCAN". Vengono poi visualizzati tutti i risultati (TEMPO, GIRI AL MINUTO, CALORIE). I risultati sono visualizzati sul display per circa 5 secondi.**Modalità manuale per la visualizzazione dei risultati:**
 - Per impostare la funzione che si desidera visualizzare durante l'esercizio e per passare da una funzione all'altra, premere il pulsante rosso per 2 volte consecutive e impostare la funzione desiderata sullo schermo (TIME, CAL, RPM). Premendo il pulsante rosso una volta sola, si ritorna alla modalità automatica senza impostare alcuna funzione particolare.

NOTA: Per impostare il contatore su "ZERO": premere il pulsante rosso per alcuni secondi. Tutti gli indicatori saranno impostati su "0".

3. Sostituzione delle batterie: Rimuovere il contatore (g) dalla sua posizione originaria con l'ausilio degli incavi attorno al contatore. Raggiungerete così il vano batterie e sarà possibile sostituire le batterie senza usare alcun tipo di strumento (vedi fig. 3).

PULIZIA E STOCCAGGIO

- Pulire dapprima con un panno umido e successivamente con un panno asciutto.
- Conservare il dispositivo in un posto sicuro.
- Ai fini dell'immagazzinaggio del dispositivo tirare gli anelli finché le due basi non si sganciano dal fissaggio.

DATI TECNICI

1,5V = 1 x LR44 1,5V

Il presente dispositivo è conforme ai requisiti di sicurezza e alle disposizioni delle direttive 2014/35/EU sui dispositivi a bassa tensione e 2014/30/EU sulla compatibilità elettromagnetica.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - DIRETTIVA 2011/65/EU

Il prodotto è stato progettato e realizzato con materiale e componenti di alta qualità con la possibilità di riciclo e riutilizzo.



La presenza del simbolo del bidone sbarrato su ruote accanto a un prodotto indica che lo stesso prodotto è conforme alla Direttiva europea 2011/65/EU.

■ Si prega di informarsi sul locale sistema di riciclaggio di prodotti elettrici ed elettronici.

Seguire le regole locali applicabili e non gettare i prodotti usati in comuni cestini o contenitori di rifiuti domestici. Un adeguato riciclo del prodotto usato contribuirà ad evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute delle persone.