

SEDIA COMODA E DOCCIA
COMMODE AND SHOWER CHAIR
CHAISE D' AISANCE ET DE DOUCHE
SILLA WC Y DUCHA
CÓMODA E CADEIRA DE DUCHE
KOMMODE UND DUSCHSTUHL
KOMMOD OCH DUSCHSTOL
KOMOΔΑ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΑ ΝΤΟΥΣ

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.


Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF HE10635081 (Gima 43193)



HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO.,LTD
NO.1,Chuangye Street,Matou Industry Park,HanDan City,HeBei
Province,China
Made in China

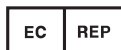

Y.Sung Handelsvertretung
Dusselthaler Str. 24, 40211
Dusseldorf Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



HE10678103

SEDIA PER DEGENZA A SOLLEVAMENTO IN ALLUMINIO

Parti del prodotto



1. Schienale
2. Bracciolo
3. Sedile in PU
4. Tubo della gamba
5. Suggesterimento

Istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.
- Prima dell'uso, verificare che tutti i componenti non siano danneggiati e che siano ben fissati.
- Approvato solo per uso interno.
- Gli indumenti o le parti del corpo possono essere schiacciati quando ci si siede, ci si alza, si inserisce il secchio della toilette e quando si sollevano i braccioli e li si blocca in posizione.
- Se è necessario superare qualche ostacolo, farlo lentamente e con attenzione, per evitare che le ruote si danneggino!
- Quando si utilizza una sedia a rotelle, utilizzare sempre i freni di stazionamento.
- Nel trasferimento da e verso la sedia a rotelle, i poggiapiedi devono essere spostati in modo da non essere d'intralcio.
- Non utilizzare mai i poggiapiedi come supporto per alzarsi: c'è il rischio di ribaltamento!
- Impedire l'uso non autorizzato, ad esempio da parte dei bambini.
- Prestare attenzione al peso massimo consentito per l'utente.
- Queste informazioni sono riportate nei dati tecnici di queste

istruzioni per l'uso e sulla targhetta di identificazione. Montaggio

Montaggio

Fase 1

Fissare il tubo dello schienale al telaio, premendo i pulsanti e facendo scorrere i tubi dello schienale nei tubi situati sotto il sedile.



**Fase 2**

Fissare le gambe al telaio premendo i pulsanti nei tubi situati su ciascun lato delle gambe.

Assicurarsi che i pulsanti “scattino” correttamente attraverso i fori e che siano stabili e regolati allo stesso modo.

Dati tecnici

Prodotto	SEDIA PER DEGENZA A SOLLEVAMENTO IN ALLUMINIO
Numero prodotto	HE10635081
Capacità di peso (libbre/kg)	300 libbre/ 136 kg
Dimensioni del prodotto (mm) L x L x A	(521-558)×(692-730)×(850-955)mm
Peso del prodotto (libbre/kg)	7,1 kg
Materiale dello schienale	PU
Materiale del sedile	PU
Materiale dei braccioli	Schiuma EVA
Materiale del telaio	Alluminio
Colore del telaio	Argento
Quantità nella scatola (pezzo)	1
Peso del prodotto inclusa la scatola (libbre/kg)	8,0 kg
Dimensione della scatola L x L x H	645 x 585 x 395 mm

Simboli

	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Fabbricante		Data di fabbricazione
	Numero di lotto		Codice prodotto
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Dispositivo medico		Leggere le istruzioni per l'uso
	Numero di serie		Importato da

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi