



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.


Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

LETTINI VISITA BASIC

Manuale utente

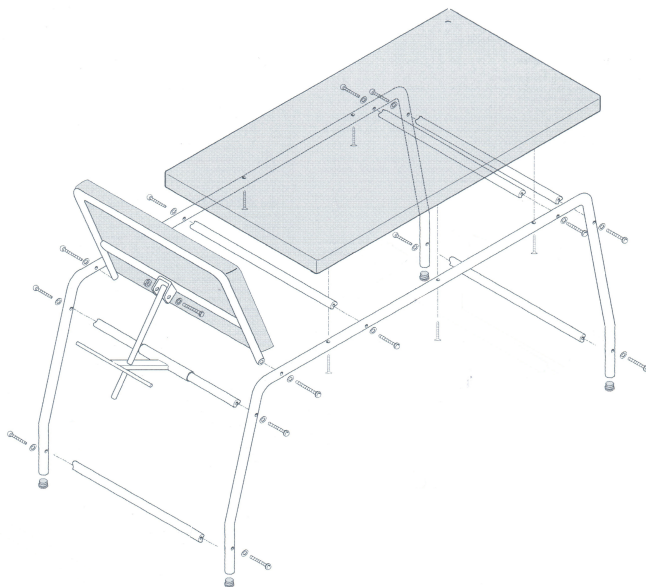

ATTENZIONE: Gli operatori
devono leggere e capire
completamente questo manuale
prima di utilizzare il prodotto.

REF 44450 - 44451 - 44455 - 44456



Gima S.p.A.
Gessate (MI) - Italy
Made in Italy



- 44450** - Lettino basic verniciato nero
- 44451** - Lettino basic verniciato bianco
- 44455** - Lettino basic cromato blu
- 44456** - Lettino basic cromato beige

INTRODUZIONE

Il Lettino basic da visita è destinato all'uso in luoghi ospedalieri, comunitari, case di cura; particolarmente adatto a studio medico / ambulatorio.

Ai fini della Direttiva 2007/47/EC il letto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il lettino ha dimensioni contenute; il materassino, lavabile ed ignifugo, è composto da due parti, una prima parte fissa, una seconda parte reclinabile in diverse posizioni.


Componenti

- N.2 Gambe
- N.1 traverso con alza schienale
- N.5 traversi
- Imbottitura schienale
- Imbottitura seduta

ISTRUZIONI

Il lettino si fornisce completamente smontato

1. Prendere le 2 Gambe e iniziare a fissare i traversi, compreso il traverso con alza schienale, attraverso bulloni.
2. Per ultimo fissare le imbottiture al telaio attraverso viti.

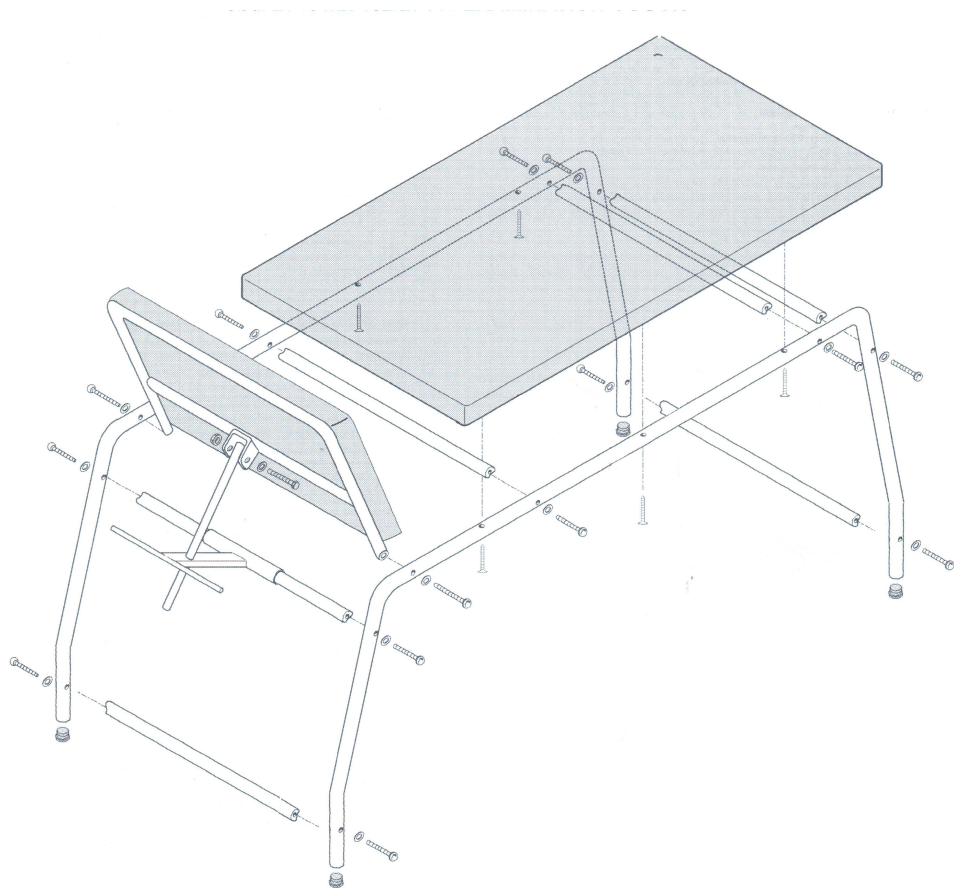

Scheda tecnica

2016	44450 - LETTINO VISITA ECONOMICO NERO 44451 - LETTINO VISITA ECONOMICO BIANCO 44455 - LETTINO VISITA ECONOMICO BLU 44456 - LETTINO VISITA ECONOMICO BEIGE	
DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO	Letto visita di dimensioni contenute, studiato per studio medico/ambulatorio. Il materassino è composto da due parti, una prima parte fissa, una seconda parte reclinabile in diverse posizioni.	
DESCRIZIONE SINGOLI PARTICOLARI	Struttura e particolari in metallo	- Struttura in tubolare acciaio ricavato da nastro a freddo dimensioni mm. 30x1,5 - Telaio cromato oppure verniciato con polvere epossidica colore bianco ral 9010
	Tessuto ed Imbottitura	- Dimensioni 61x50 - 61x130 - Imbottitura composta da truciolare mm. h.14 e gomma mm. h.40 - Materiale lavabile LEDERFLEX GAZEBO/AE (Composizione: 87%PVC – 13% CO) in CLASSE 1 - Colori disponibili: Nero 991, Bianco 9010, Blu 4915, Beige 151
	Misure	cm.180 x 61 x h75
	Peso	29 Kg
	Portata massima	90/100 Kg
	Norme di Pulizia (Tessuti)	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.
	Note	Colori e caratteristiche potranno essere cambiati per migliorie e/o modifiche.

AVVERTENZA D'USO

- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- **Quando si regola l'altezza dello schienale verificare che nessuno inserisca mani, gambe o altro all'interno dell'area di spostamento: rischio di schiacciamento**
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Adagiare il paziente solo quando la rete è completamente orizzontale in ogni sua parte.
- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote frenate.
- Vietato l'uso in ambienti aperti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.

- Verificare che i dadi del bloccaggio gambe siano ben stretti.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Pulire il materassino con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita.
- Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.
- Pulire il lettino senza utilizzare prodotti abrasivi. Asciugare con cura.
- Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.
- Utilizzare solo ricambi originali.

GARANZIA

- Il letto è garantito per due anni per difetti di materiale e di lavorazione, ad esclusione delle parti di consumo.
- Manomissioni o danni causati da un errato utilizzo del letto comportano la decadenza immediata della garanzia.
- Il presente dispositivo medico è stato creato esclusivamente per le modalità sopra citate. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio.
- Non si risponde di danni a persone e cose dovuti a utilizzo improprio del presidio.