

LETTINI VISITA BASIC
ECONOMIC EXAMINATION BEDS
LITS D'EXAMEN BASIC
UNTERSUCHUNGSBETT BASIC
CAMILLAS DE EXAMEN BASIC
MARQUESAS DE VISITA BASIC



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

REF**44452 – 44453 - 44457 - 44458**

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



ATTENZIONE! Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

INTRODUZIONE

Ai fini del regolamento (UE) 2017/745 il prodotto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

DESCRIZIONE

Il Lettino basic da visita è destinato all'uso in luoghi ospedalieri, comunitari, case di cura, particolarmente adatto a studi medici/ambulatori.

Il lettino ha dimensioni contenute; il materassino, lavabile ed ignifugo, è composto da due parti, una prima parte fissa, una seconda parte reclinabile in diverse posizioni. A seconda del modello, la struttura può essere verniciata oppure cromata.

- Struttura cromata o verniciata, composta da gambe, telaio e alzatesta
- Materassino rivestito con tessuto lavabile ed ignifugo
- Su richiesta: portalenzuolini

COMPONENTI

- N. 2 Gambe
- N. 1 trasverso con alza schienale ▲
- N. 3 traversi corti senza fori ☆
- N. 2 traversi corti con fori ●
- N. 1 trasverso lungo ◆
- Imbottitura schienale
- Imbottitura seduta

Sacchetto con materiale di montaggio


- N. 16 VITI TBE 8 x 50
- N. 18 RANELLE M8
- N. 6 PANELVITI TPS 4,5 x 45 (per fissare il materassino al telaio)
- BRUGOLA 5 mm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Il lettino si fornisce completamente smontato.

Fare attenzione ad usare i traversi corretti seguendo la simbologia indicata.

1. Prendere le gambe del lettino e assemblarle con i n.5 traversi tramite le viti e relative rondelle.
2. Prendere il trasverso lungo e fissarlo ai due traversi forati che sono stati precedentemente fissati alle gambe.
3. Fissare alla struttura anche il trasverso con l'asta dell'alzatesta già montata all'imbottitura dello schienale tramite vite esagonale e relativo dado.
4. Per ultimo fissare le imbottiture al telaio attraverso le viti.

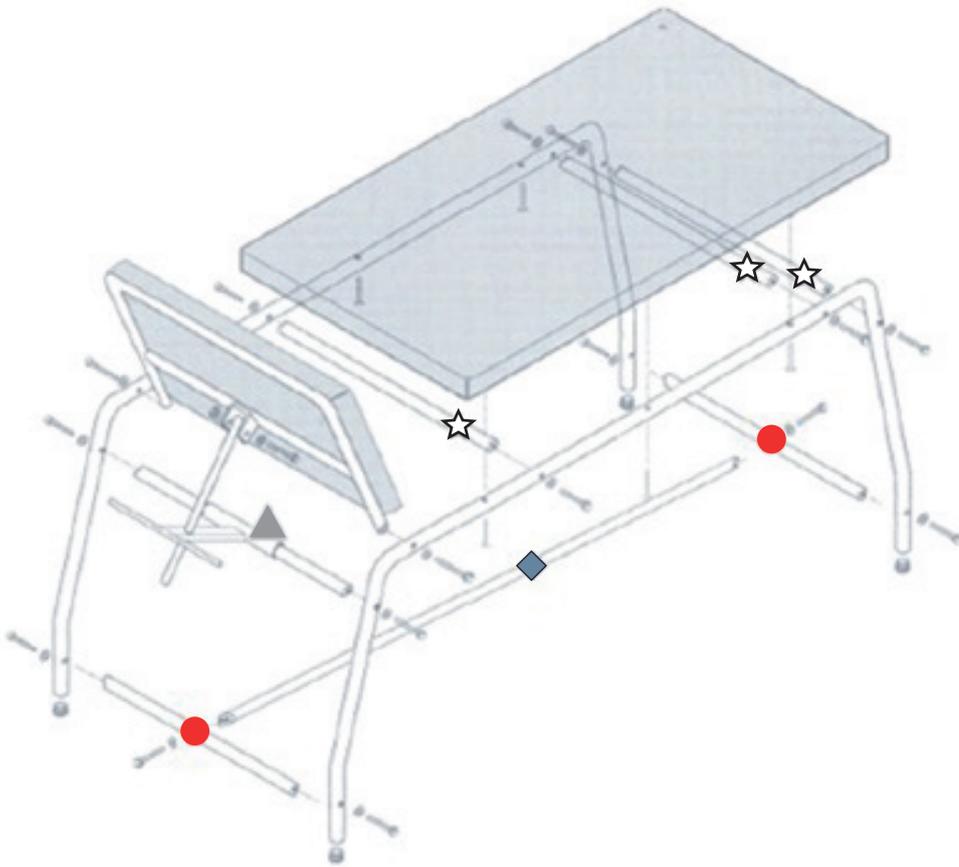

SCHEDA TECNICA

Misure	191 x 62 x 73 cm
Peso	27,50 kg
Portata massima	120 kg

AVVERTENZE D'USO

- Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.
- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Non adatto all'uso in ambienti aperti.
- Quando si regola l'altezza del lettino e dello schienale verificare che nessuno inserisca mani, gambe o altro all'interno dell'area di spostamento: RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO!
- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote frenate.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.
- Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.

INDICAZIONI DI PULIZIA PER IL TESSUTO:

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita.

Non usare solventi, candeggina e detergenti chimici o spray per lucidare.

Attenzione: In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.

	Conservare al riparo dalla luce solare		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Codice prodotto		Leggere le istruzioni per l'uso		Fabbricante
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Numero di lotto		Dispositivo medico
	Identificatore univoco del dispositivo		Data di fabbricazione		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.