

EN

FR

ES

DE

BR

NL

JA


ZH

KO

Multi-Venous IV Training Arm

Male, Female and Pediatric

User Guide

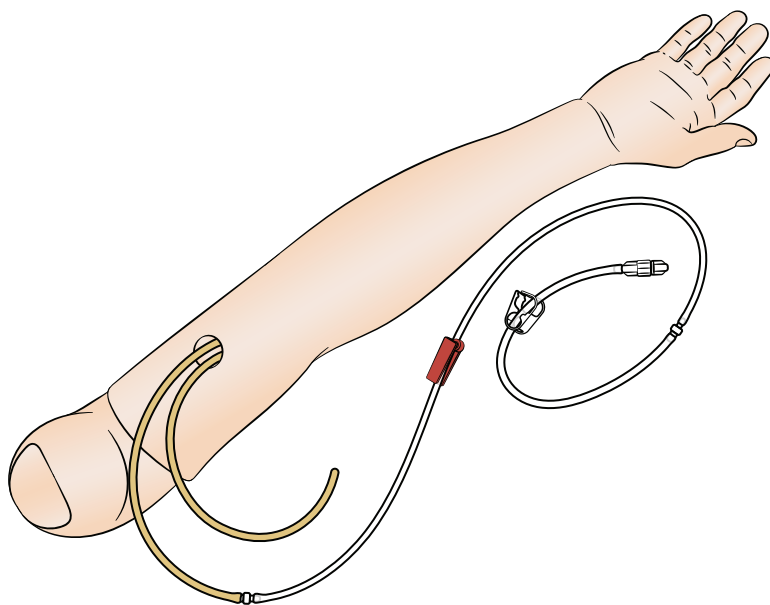

JA

IV トレーニングアームキットは、原寸大の腕を再現したトレーニングツールで、静脈システムが備わり、末梢静脈治療向けに設計されています。本取扱説明書は、3種類のIV トレーニングアームキット (成人男性、成人女性、小児) に関するものです。特別の定めのない限り、本取扱説明書の情報は3種類すべてに適用されるものとします。



警告

本製品には天然ゴムラテックスが含まれており、人体に接触するとアレルギー反応を引き起こすことがあります。



注意

汚れが取れなくなる場合があるため、アームにはヨード剤を使用しないでください。




注

- 推奨されるカテーテルサイズ: 22 ゲージ以下。
- より簡単に挿入するためにマネキン潤滑剤の使用をお勧めいたします。
- 穿刺部位での漏れがひどい場合は、静脈やスキンを交換します。

Items Included


EN

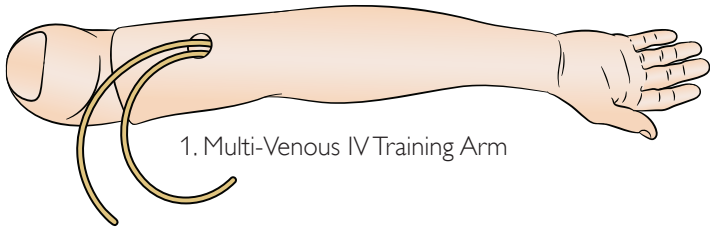


1. Multi-Venous IV Training Arm




2. Replacement Skin

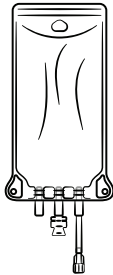


3. Blood Bag

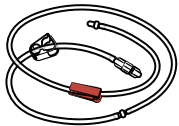

4. Tubing and Clamp

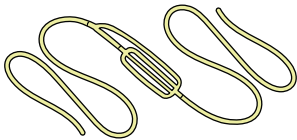


5. Multi-Vein System

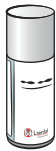

6. Manikin
Lubricant




7. Simulated Blood
Concentrate

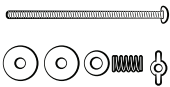

8. Shoulder Attachment
Hardware



9. Vein Bands (x 4)

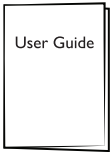

10. User Information

FR

1. Bras multi-veines de formation à la perfusion intraveineuse
2. Peau de remplacement
3. Poche de sang
4. Tubulure et clamp
5. Système multiveineux
6. Lubrifiant pour mannequin
7. Faux-sang concentré
8. Matériel de fixation de l'épaule
9. Bandes veineuses (x 4)
10. Informations utilisateur

ES

1. Brazo articulado con múltiples venas para el entrenamiento del acceso intravenoso
2. Piel de recambio
3. Bolsa de sangre
4. Tubos y abrazadera
5. Sistema de múltiples venas
6. Lubricante para el maniquí
7. Concentrado de sangre simulada
8. Piezas de conexión de hombro
9. Bandas para venas (x 4)
10. Información del usuario

DE

1. Multi-Venen-IV-Punktionsarm
2. Ersatzhaut
3. Blutbeutel
4. Schläuche und Klammer
5. Multi-Venensystem
6. Gleitmittel für Trainingsmodell
7. Simuliertes Blutkonzentrat
8. Befestigungsmaterial für die Schulter
9. Venenbänder (4 St.)
10. Anwenderinformationen

BR

1. Braço multivenoso para treinamento de acesso intravenoso
2. Pele de substituição
3. Bolsa de sangue
4. Tubos e clamps
5. Sistema multivenoso
6. Lubrificante para manequim
7. Concentrado de sangue simulado
8. Peças para colocação do ombro
9. Tiras para veias (x 4)
10. Informações para o usuário

NL

1. Multiveneuze IV-trainingsarm
2. Vervanghuid
3. Bloedzak
4. Slang en klem
5. Veneus systeem
6. Lubrificant voor de oefenpop
7. Gesimuleerd bloedconcentraat
8. Materiaal voor bevestiging aan de schouder
9. Aderbandjes (x 4)
10. Informatie voor de gebruiker

JA

1. IV トレーニングアーム
2. 交換用スキン
3. IVバッグ
4. チューブおよびクランプ
5. マルチ静脈システム
6. 潤滑剤
7. 疑似血液
8. 肩装着ハードウェア
9. 静脈帯 (x 4)
10. ユーザー情報

ZH

1. 多静脉注射训练臂
2. 备用皮肤
3. 输血袋
4. 夹子和挂钩
5. 多静脉系统
6. 模拟人润滑剂
7. 模拟血液浓缩液
8. 肩部连接配件
9. 静脉带 (x 4)
10. 用户手册


KO

1. 정맥로 확보 실습용 팔
2. 교체용 피부
3. 혈액 백
4. 튜브 및 클램프
5. 정맥로 시스템
6. 마네킹 윤활제
7. 인조 혈액 농축액
8. 어깨 부착 하드웨어
9. 정맥 밴드(4개)
10. 사용자 정보


Overview

EN

Adult Male Multi-Venous IV Arm

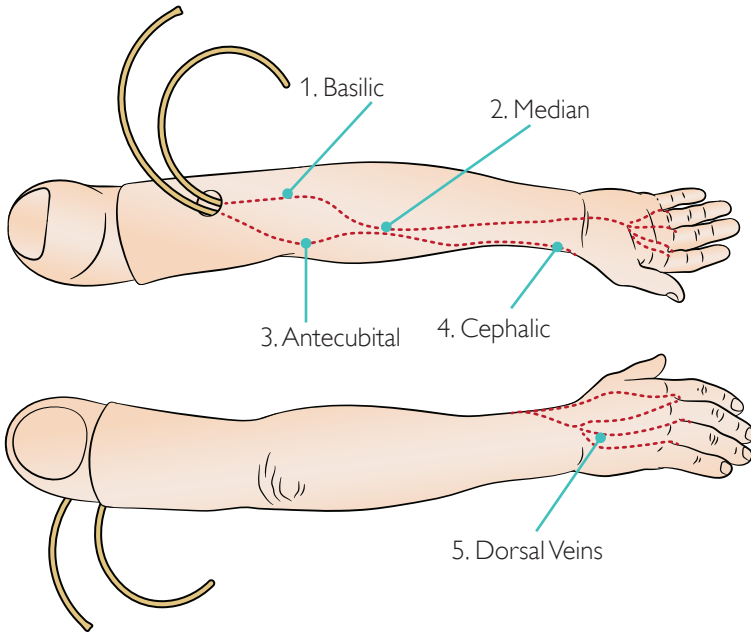

Adult Female / Pediatric Multi-Venous IV Arm

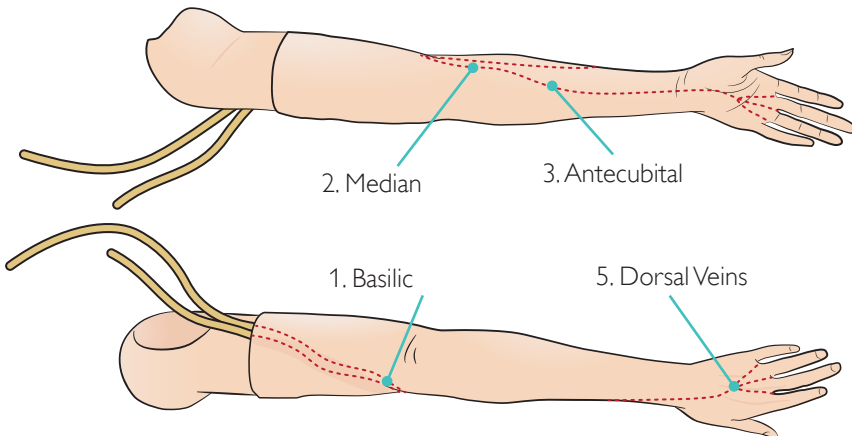

FR

Bras multi-veines de formation à la perfusion intraveineuse, version homme adulte

Bras multi-veines de formation à la perfusion intraveineuse, versions femme adulte/enfant

1. Veine basilique
2. Veine médiane
3. Veine antécubitale
4. Veine céphalique
5. Veines dorsales

ES

Brazo con múltiples venas para acceso intravenoso para hombre adulto

Brazo con múltiples venas para acceso intravenoso para mujer adulta/pediátrico

1. Basílica
2. Mediana
3. Antecubital
4. Cefálica
5. Venas dorsales

DE

Multi-Venen-IV-Punktionsarm erwachsen männlich

Multi-Venen-IV-Punktionsarm erwachsen weiblich/Kind

1. V. basilica
2. V. mediana cubiti
3. Armbeuge
4. Vena cephalica
5. Dorsale Venen

BR

Braço multivenoso para acesso intravenoso masculino adulto

Braço multivenoso para acesso intravenoso feminino adulto/pediátrico

1. Basílica
2. Mediana
3. Antecubital
4. Cefálica
5. Veias dorsais

NL

Multiveneuze IV-trainingsarm, volwassen man

Multiveneuze IV-trainingsarm, volwassen vrouw

1. Basilica
2. Mediana
3. Antecubitaal
4. Cephalica
5. Dorsale aderen

JA

成人男性 IV アーム

成人女性/小児 IV アーム

1. 尺側皮静脈
2. 正中静脈
3. 肘前窩静脈
4. 橈側皮静脈
5. 手背部静脈

ZH

成年男性多静脉注射臂

成年女性/儿童多静脉注射臂

1. 贵要静脉
2. 肘正中静脉
3. 前臂正中静脉
4. 头静脉
5. 手背静脉

KO


성인 남성 정맥로 확보 실습용 팔

성인 여성/소아 정맥로 확보 실습용 팔




1. 귀요 정맥
2. 정중 동맥
3. 전주와 동맥
4. 두부 정맥
5. 배면 정맥

Setup

1

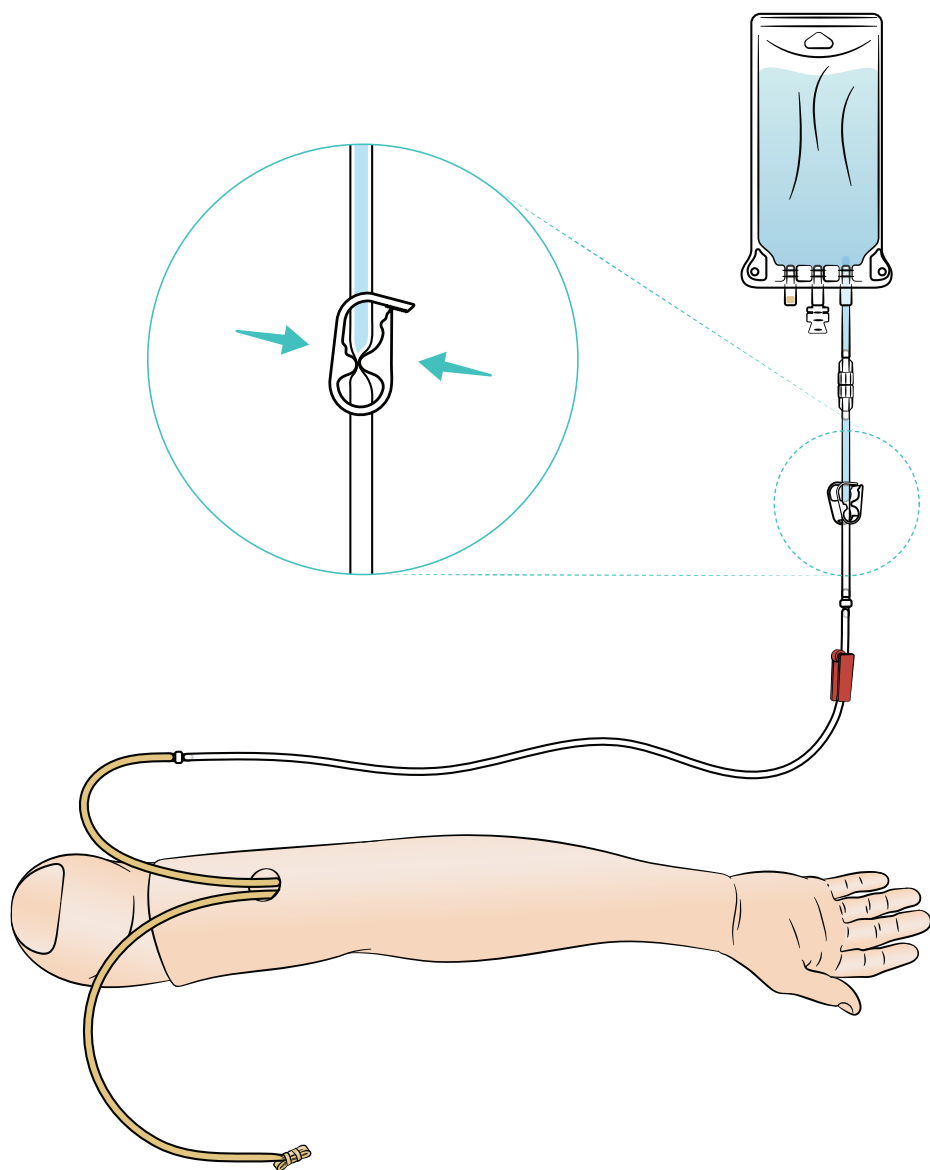


2

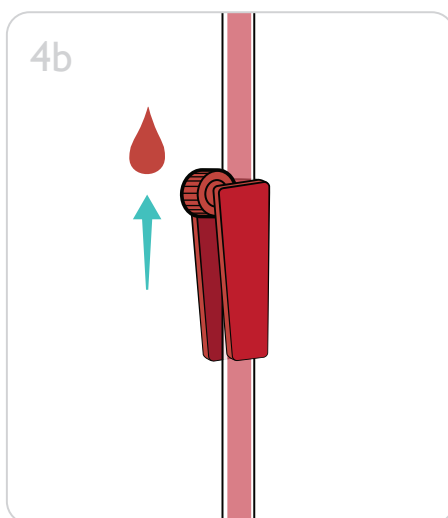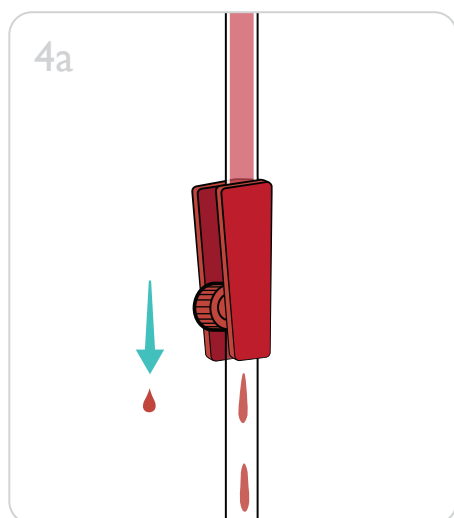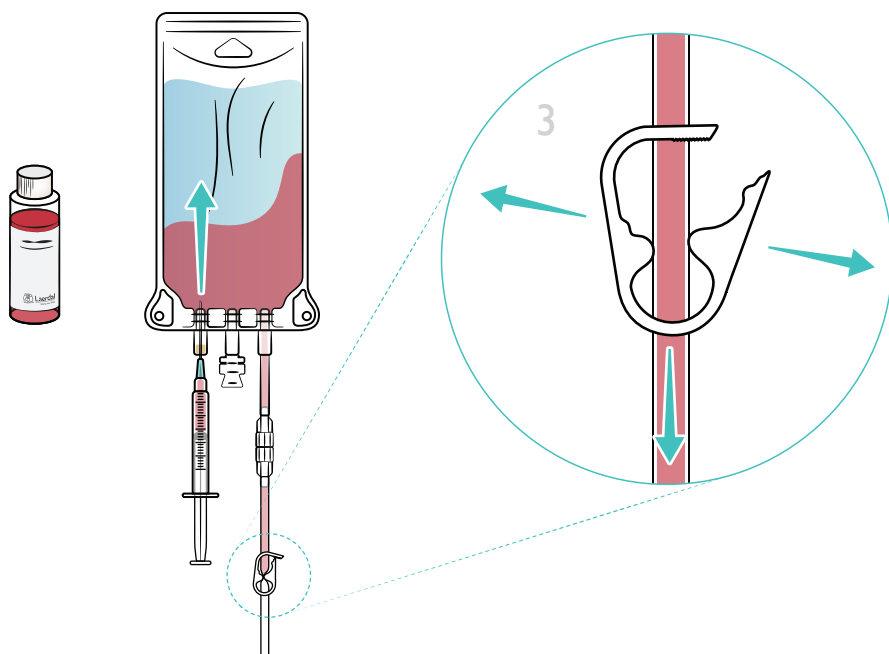


Removing Skin & Vein System


1

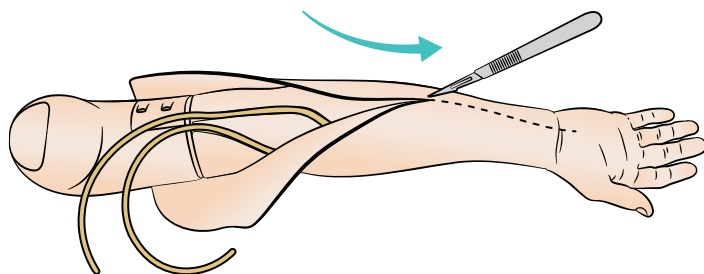


2

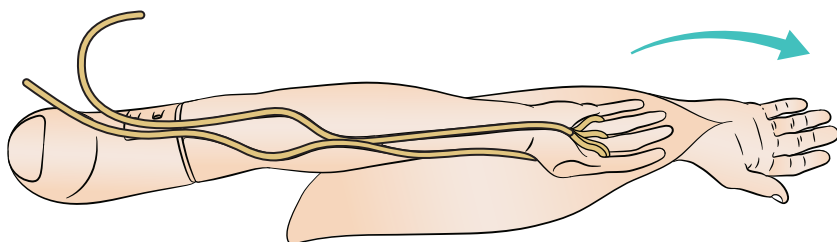



3

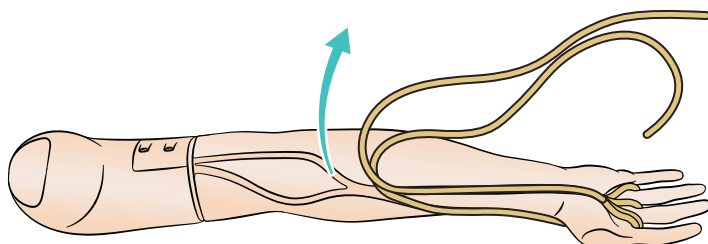

4

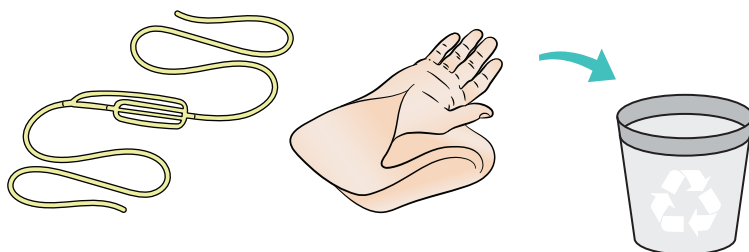

5

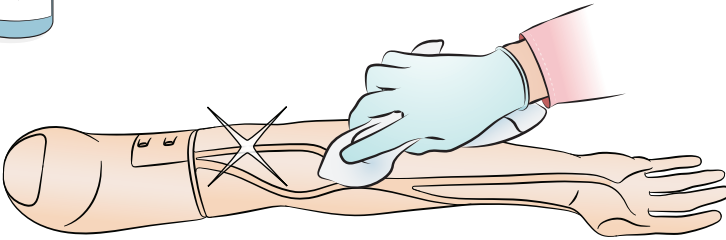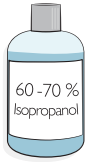

EN



Note

Excess dried glue may need to be scraped away.

FR



Note

Vous devrez éventuellement raclez la colle sèche en excès pour l'enlever.

ES



Nota

Puede que tenga que raspar para quitar el pegamento seco.

DE



Hinweis

Gegebenenfalls muss überflüssiger Klebstoff abgekratzt werden.

BR



Nota

O excesso de cola seca pode precisar ser removido.

NL



Opmerking

Overtollige lijmresten moeten worden weggeschrapt.

JA



注

チューブの固定のため予めいくつかのポイントに接着剤が用いられています。余分な接着剤は剥がしてください。

ZH



注意

刮除过量干胶。

KO




참고


건조된 접착제가 과도할 경우 긁어내야 합니다.

Replacing Skin & Vein System


6

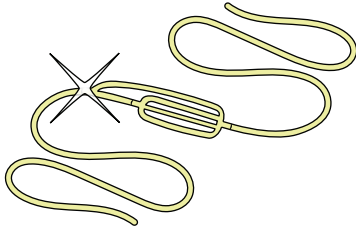


7

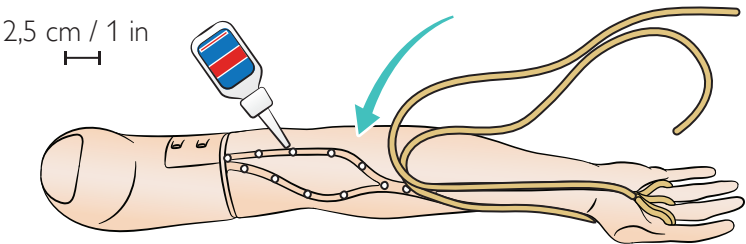

8

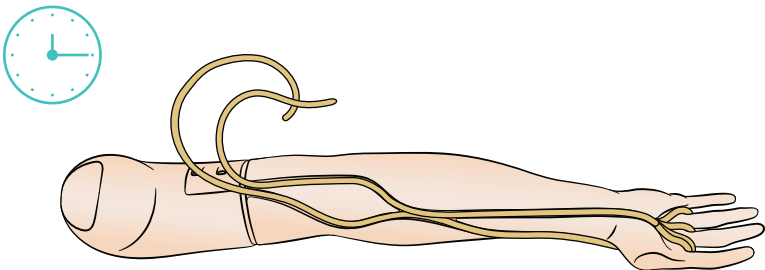

9

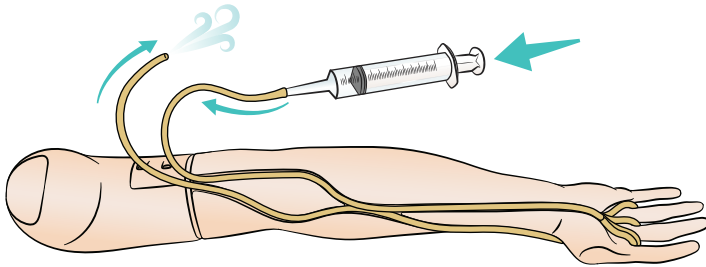

EN

9. Push air through vein with a syringe to check for kinks or blockages.

FR

9. Injectez de l'air dans la veine au moyen d'une seringue pour rechercher d'éventuels coudes ou obstructions.

ES

9. Introduzca aire por la vena con una jeringa para ver si hay pliegues o bloqueos.

DE

9. Spritzen Sie mithilfe einer Spritze Luft durch die Vene, um sie auf Knicke oder Verschlüsse zu überprüfen.

BR

9. Injete ar na veia com uma seringa, para verificar se há dobras ou obstruções.

NL

9. Duw met een spuit lucht door de aderen om te controleren op knikken of verstoppingen.

JA

9. シリンジで静脈内に空気を送り、ねじれや詰まりがないか確かめます。

ZH


9. 用注射器将空气推进静脉, 检查是否有扭结或堵塞。

KO

9. 정맥을 통해 주사기로 공기를 넣어 꼬이거나 막힌 부분이 있는지 확인합니다.

Replacing Skin & Vein System


10

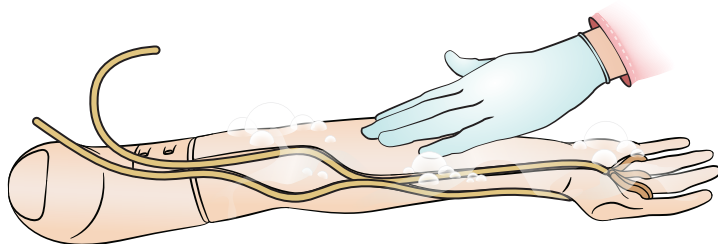


11



12

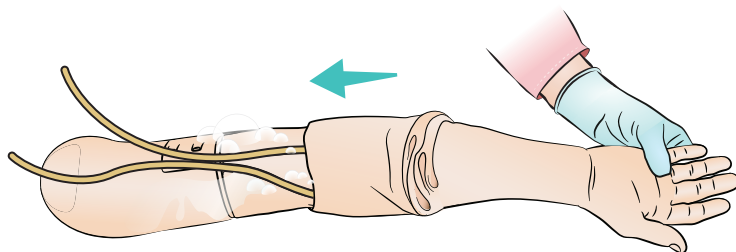

13

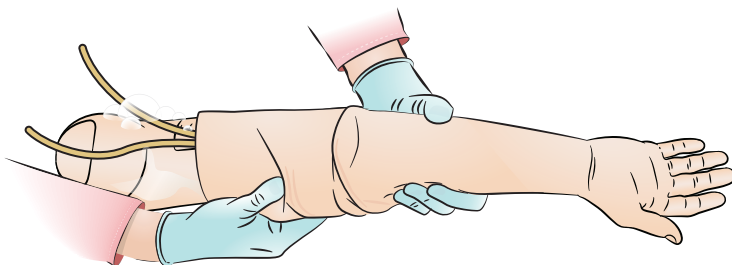

EN

Notes

- Heat arm skin before replacing on mandrel. This can be done with a hair dryer.
- Male arm skin includes thumb piece.

FR

Notes

- Chauffez la peau du bras avant de la remettre en place sur le mandrin, par exemple au moyen d'un sèche-cheveux.
- La peau du bras version homme inclut une pièce pour le pouce.

ES

Notas

- Caliente la piel del brazo antes de volver a colocarla sobre el molde. Esto se puede hacer con un secador.
- La piel del brazo masculino incluye una pieza para encajar el pulgar.

DE

Hinweise

- Erwärmen Sie die Armhaut, bevor Sie sie über die Armkonstruktion ziehen. Dies kann mithilfe eines Föns geschehen.
- Die männliche Armhaut umfasst ein Daumenstück.

BR

Notas

- Aqueça a pele do braço antes de recolocar no mandril. Isso pode ser feito com um secador de cabelo.
- A pele do braço masculino inclui a área do polegar.

NL

Opmerkingen

- Verwarm de huid voordat u deze op de arm plaatst. U kunt hiervoor een haardroger gebruiken.
- De huid van de mannelijke arm bevat een duimstuk.

JA

注

- アームスキンを温めてから取り付けてください。この際へアドライヤーをお使いいただくこともできます。
- 男性用アームスキンには親指パーツが含まれています。

ZH

注意

- 在芯轴上更换前预先加热手臂皮肤。此处可使用吹风机。
- 男性手臂皮肤包括拇指部位。

KO

참고

- 맨드릴에서 교체하기 전에 팔 피부에 열을 가하십시오. 헤어 드라이어로 열을 가할 수 있습니다.
- 남성 팔 피부에는 엄지 부분이 포함되어 있습니다.





JA

- トレーニングセッションが終わるごとに、低刺激性の石鹼と水でクリーニングし、定期的な点検を行ってください。
- 静脈に水を流した後に、シリンジで空気を送り込みます。必要に応じて、漂白剤を水で薄めた液体で滅菌し、その後空気を送り込みます。
- 三角筋注射パッドを使用している場合 (水専用)、トレーニングセッションが終わるごとに、フォームパッドの水を絞ってください。スキンに再度挿入する前に、パッドを空気乾燥させてください。コーンスターチを振りかけると簡単に挿入できます。カビが発生しないように、漂白剤を水で薄めた液体にパッドを浸してください。スキンのフォームパッドは、濡れたまま放置しないでください。

△ 注意

- アームまたは他の部品を洗浄液や水に浸水させないでください。
- アームスキンが変色する場合がありますので、色つきのゴム手袋は使用しないようにしてください。アームのそばで、フェルトペン、インクペン、アセトン、ヨウ素、またはその他の染色剤を使用しないでください。アームを印刷紙、新聞紙、色のついた紙の上に置かないよう注意してください。汚れが取れなくなる場合があります。



Important Information

JA

仕様			
保管温度	4°C～40°C		
操作温度	-15°C～50°C		
湿度	20%～90% (結露なし)		
	男性アーム	女性アーム	小児アーム
重量	1.7 kg	1.79 kg	0.91 kg
寸法	72.4 cm	73.7 cm	51.44 cm
直射日光の当たらない屋内に保管してください			

交換部品

最新の交換部品およびアクセサリについては、www.laerdal.com/jp/ をご確認ください。

警告と注意

「警告」は、重篤な人身傷害や死亡につながり得る条件、危険の元となる原因または危険な行為を特定するものです。

「注意」は、軽度の人身傷害または製品の損傷につながり得る条件、危険の元となる原因または危険な行為を特定するものです。

注

「注」は、製品および取扱いに関する重要な情報を示しています。



Warranty

EN

Global Warranty

Refer to the Laerdal Global Warranty for terms and conditions. For more information visit www.laerdal.com

FR

Garantie mondiale

Reportez-vous à la garantie mondiale de Laerdal pour en connaître les clauses. Pour plus d'informations, visitez le site www.laerdal.com/fr

ES

Garantía global

Consulte la garantía global de Laerdal para ver los términos y condiciones. Para obtener más información, visite www.laerdal.com/es

DE

Weltweite Garantie

Informationen zu den Gewährleistungsbedingungen finden Sie in der Broschüre über die weltweite Garantie von Laerdal. Weitere Informationen finden Sie unter www.laerdal.com/de

BR

Garantia global

Consulte a Garantia global da Laerdal para conhecer os termos e condições. Para obter mais informações, visite www.laerdal.com/br

NL

Wereldwijde garantie

Raadpleeg de algemene voorwaarden in de Laerdal Wereldwijde Garantie. Bezoek www.laerdal.com/nl voor meer informatie

JA

グローバル保証

諸条件については「Laerdal グローバル保証」をご参照ください。詳しくは、www.laerdal.com/jpをご覧ください。

ZH

全球保修

请参见《挪度全球保修》了解条款与条件。如需了解更多信息，请访问 www.laerdal.com/cn。

KO

제한보증

이용약관은 Laerdal 글로벌 보증서를 참조하십시오. 자세한 정보는 www.laerdal.com/kr 을 방문하십시오.

© 2020 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

Manufactured in USA for:
Laerdal Medical AS
P.O. Box 377, Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in USA

20-16104 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives