

EN

FR

DE

ES

IT

NL

NO

JA

KO

ZH

# Little Baby QCPR

Important Product Information

重要产品信息

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**

helping save lives



この重要な製品情報にはリトルベビー QCPRに関する情報が掲載されています。特別な定めのない限り、本情報はすべての製品構成に適用されます。

 警告と注意

「警告」は、重度の人身傷害や死亡につながる条件、危険を生じさせる要因または安全性に欠ける行為を特定するものです。

「注意」は、軽度の人身傷害または製品の損傷につながる状況、危険を生じさせる要因、または安全性に欠ける行為を特定するものです。

 注

「注」は、製品および取扱いに関する重要な情報を示しています。

## ケア、メンテナンスおよびクリーニング

マネキンには常に清潔な状態に保ってください。特に口対口換気を練習した場合など、講習の終了後は気道を交換してください。

マネキンフェイスは、受講者ごとに別のものを使用することを推奨します。

複数の受講者で1つのマネキンフェイスを使用する場合は、1回使用することにより表面をよく消毒してください。すべてのスキンパーツを定期的にクリーニングしてください。クリーニングには、石鹸を混ぜたぬるま湯か、Laerdal マネキンワイブを使用してください。

マネキンフェイスシールドを使うと、マネキンフェイスと使用者の唇との接触を避けることができます。

以下のものを使用するとマネキンが変色する恐れがあります：

- 口紅やペンなどに使用された顔料
- ラテックス製手袋
- 製品に付属しているもの以外の衣類

 注意

- マネキン内部のクリーニングには液体を使用しないでください。
- 部品を水中に沈めないでください。

## バッテリー

充電式でない一般用の炭素亜鉛電池またはアルカリ電池、LR6 1.5V AAのみを使用してください。バッテリーは正しい種類のもので交換してください。製品を長期間使用しない場合はバッテリーを取り外してください。

# 日本語

## リトルベビー QCPR

### 日本

MIC 認証 012-190010

### 廃棄物の取扱い

QCPR センサーには電子部品が含まれます。各地域の規制に準拠して適用される再利用施設に廃棄してください。

EU 指令 2012/19/EU WEEE: 本機器は、廃電気電子機器 (WEEE) に関する EU 指令 2012/19/EU に従って表示されています。本製品の廃棄を正しく行うことにより、本製品の不適切な廃棄処理により生じる環境および人間の健康に対する潜在的な悪影響を防ぐことができます。

製品または製品付属の書類に記載された記号は、本製品を家庭ごみとして取り扱うことができないことを明示するものです。本製品を、適切な電気機器および電子機器のリサイクル収集所へ持ち込むようにしてください。廃棄物処理に関する地域の環境規制に則って廃棄してください。本製品の取扱い、回収およびリサイクルに関する詳細については、居住地の地方自治体、家庭ごみ処理サービス業者、または製品を購入された Laerdal 代理店までお問い合わせください。

### 保証

諸条件については「Laerdal グローバル保証」をご参照ください。詳しくは、[www.laerdal.com/jp/](http://www.laerdal.com/jp/) をご覧ください。

### 記号

	CE マーク
	UKCA マーク
	オーストラリア無線通信および EMC 準拠マーク
	KC(韓国認証) 認証マーク
	日本 MIC 認証
	WEEE マーク
	製造元
	製造日
	参照注文番号
	ロット番号

### 仕様

操作温度	5°C~35°C 製品の性能低下は、低温下 (<15°C) で使用された場合に起きる可能性があります
保管温度	-10°C~50°C
湿度	5%~95% 相対湿度
重量	1.8 kg (± 0.2 kg)
寸法	65 × 26 × 14 cm



© 2022 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Manufactured in China for:  
Laerdal Medical AS  
P.O. Box 377  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway  
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in China

20-15510 Rev D


---


[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives

# Little Baby QCPR

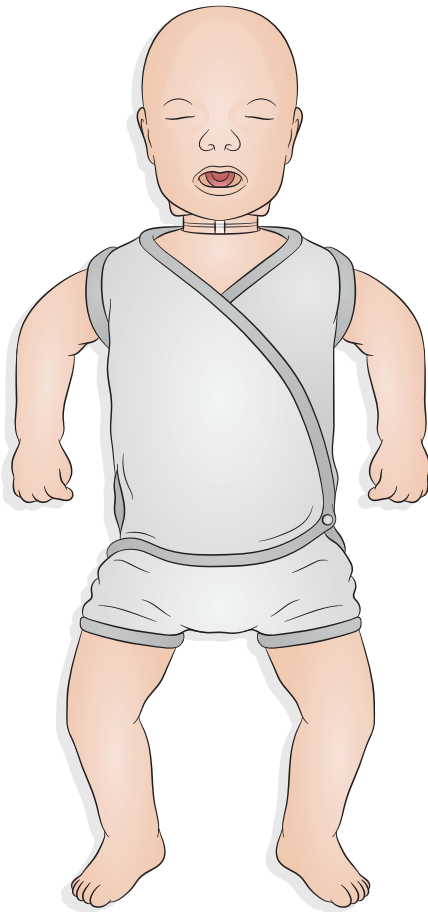

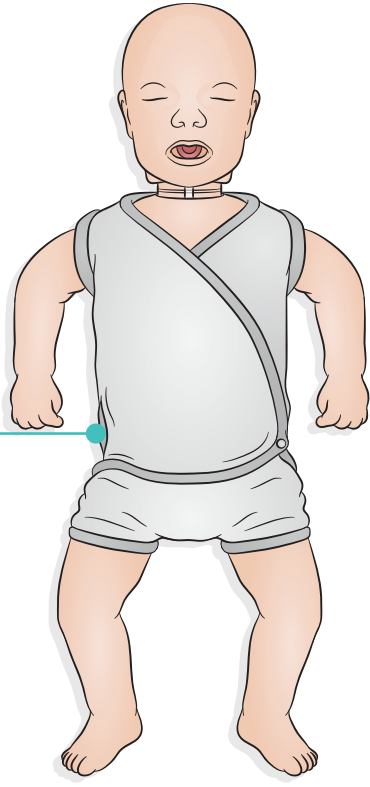
A large rounded rectangular panel with a light brown background. On the left is a large black power button and a blue starburst icon. A speech bubble on the right contains six icons arranged in two rows and three columns:



- Top row: a blue starburst icon above a dashed line, a power button icon, a red starburst icon above a dashed line, and a red battery icon with a plus sign.
- Bottom row: a blue starburst icon above a solid line, a blue Wi-Fi signal icon, a red starburst icon above a solid line, and a red warning triangle icon.








QCPR Instructor  
QCPR Learner

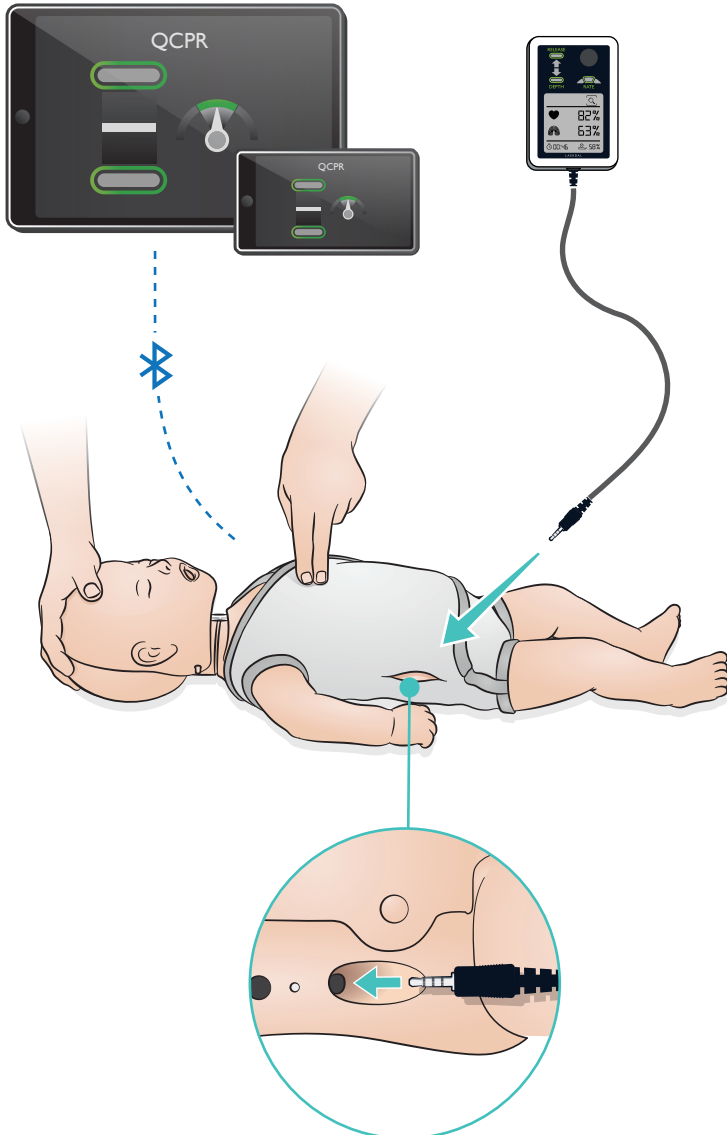


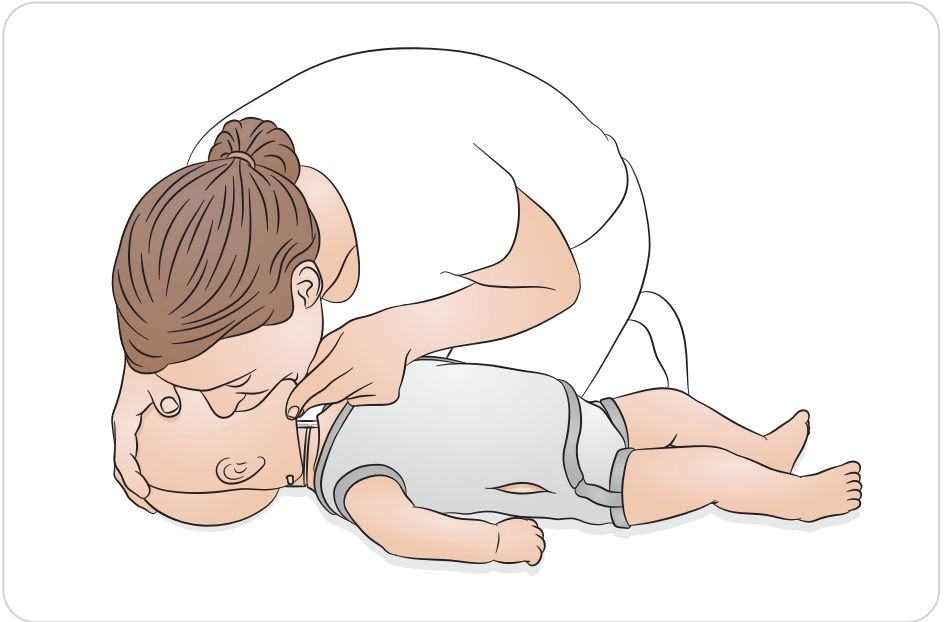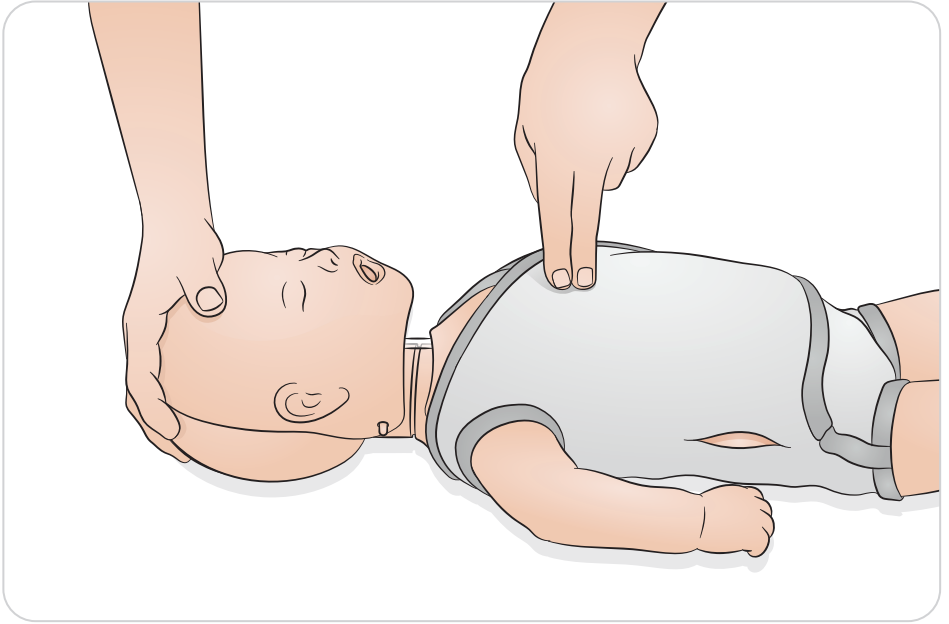

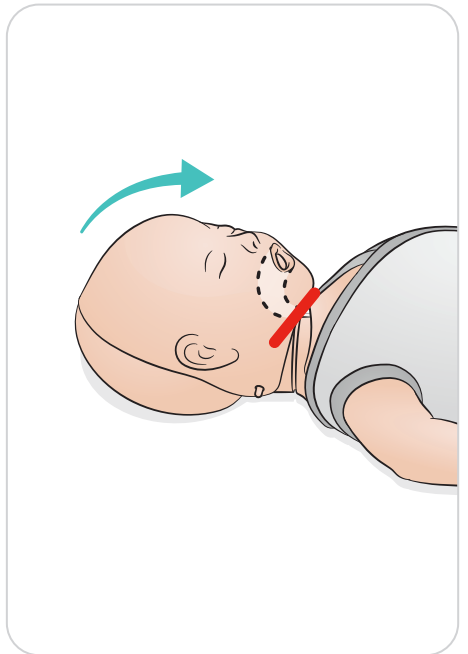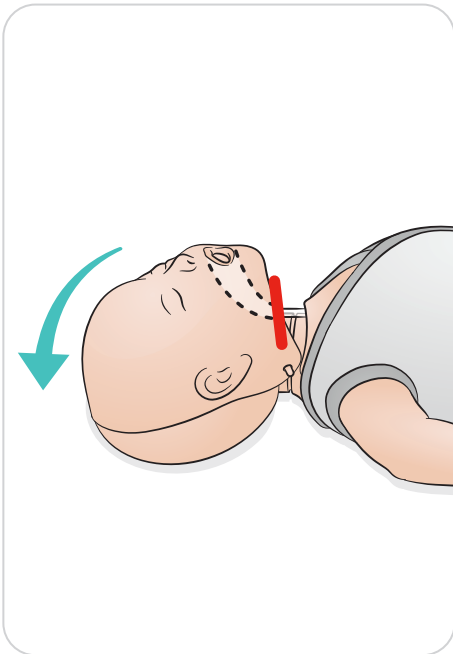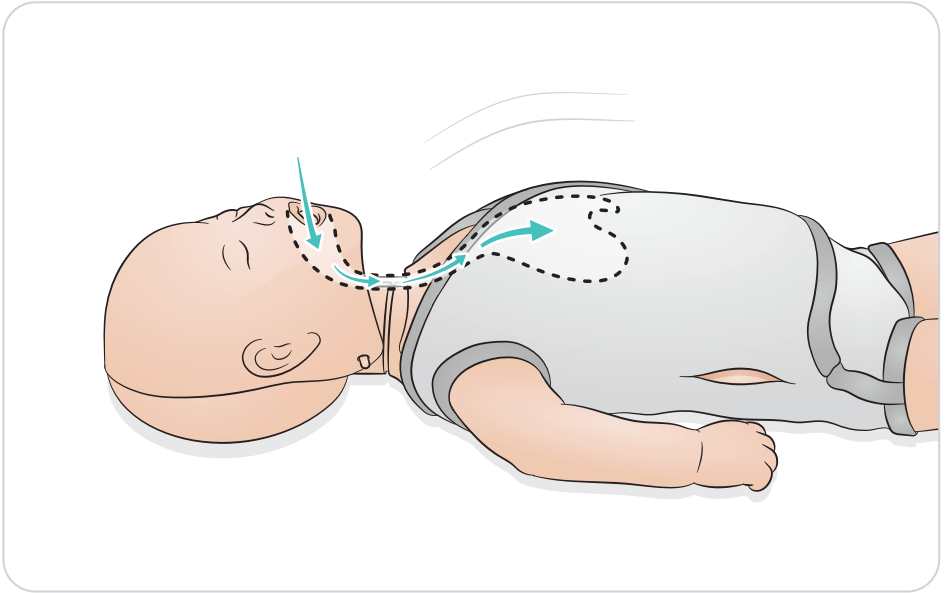





1

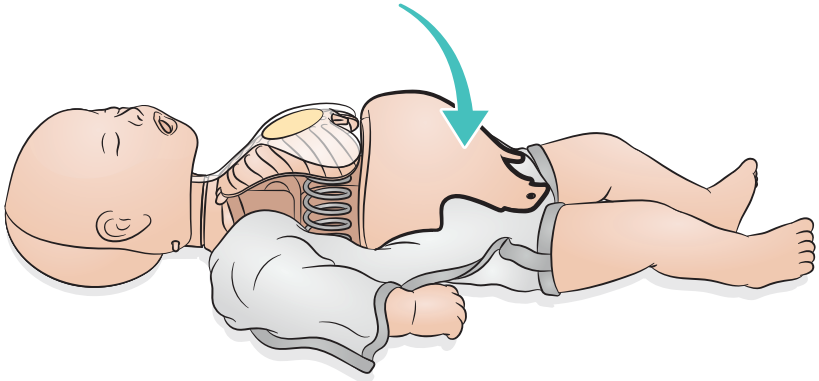

2

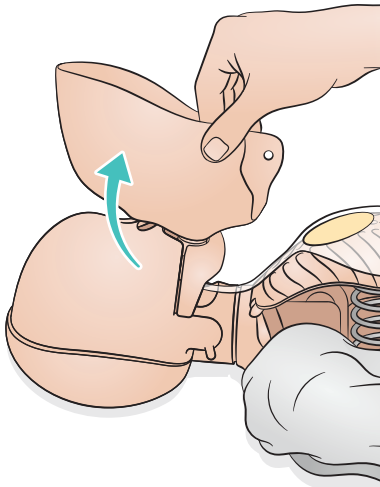


3

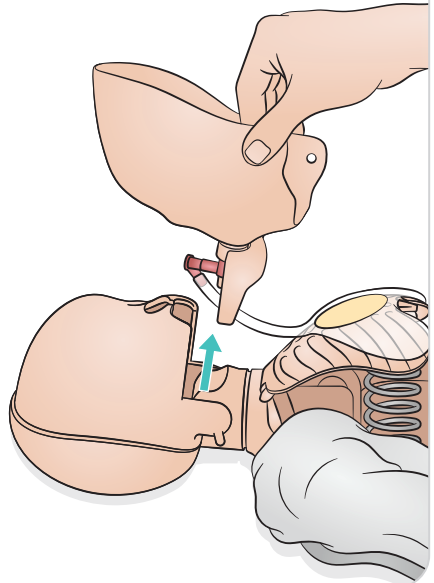





4

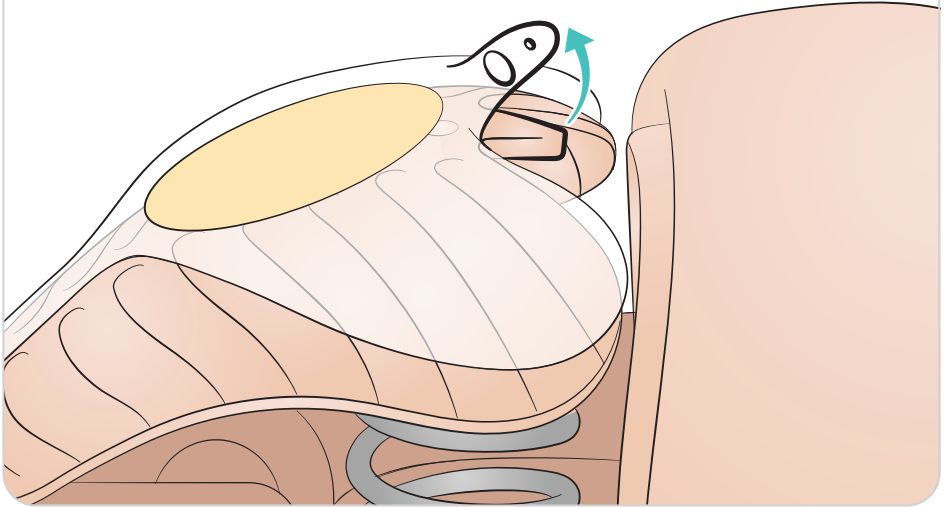

5

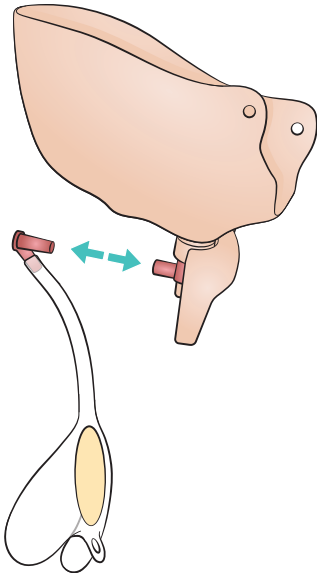


6

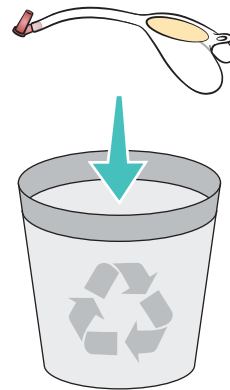





1

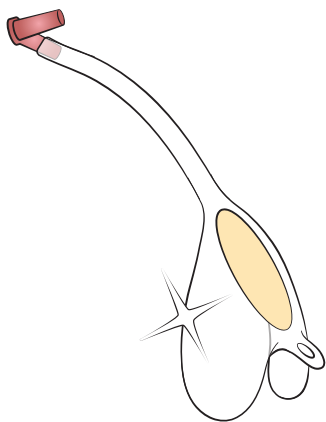


2

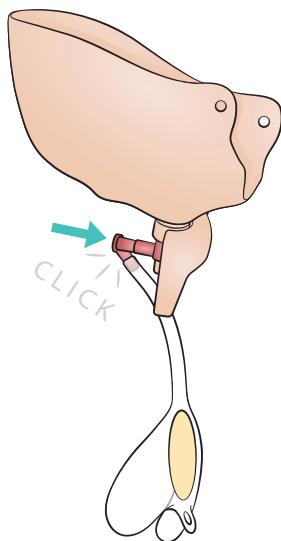

3

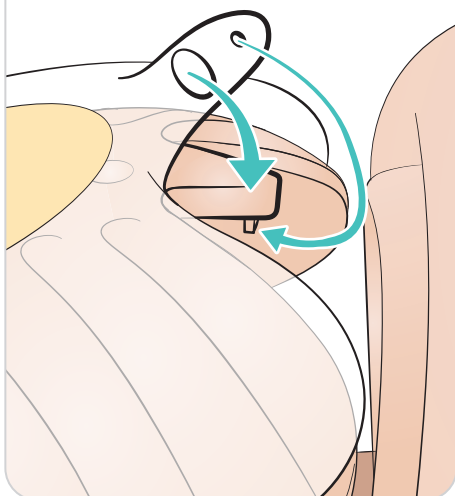


4

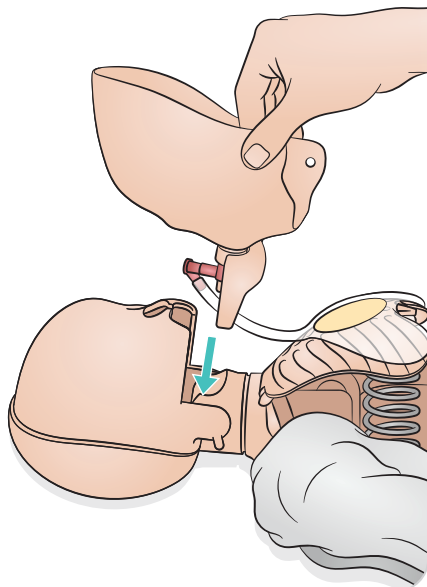





5

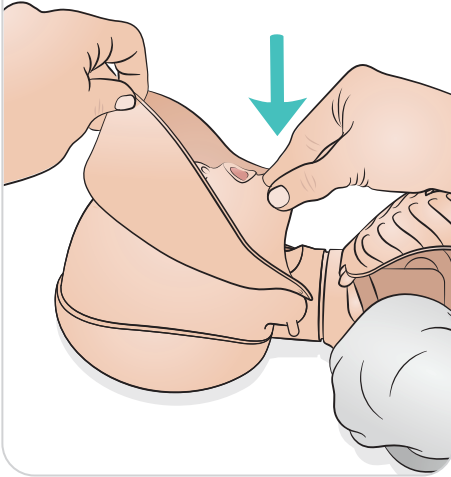


6

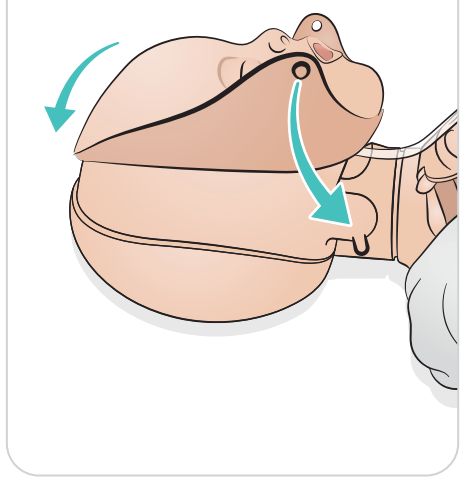


7

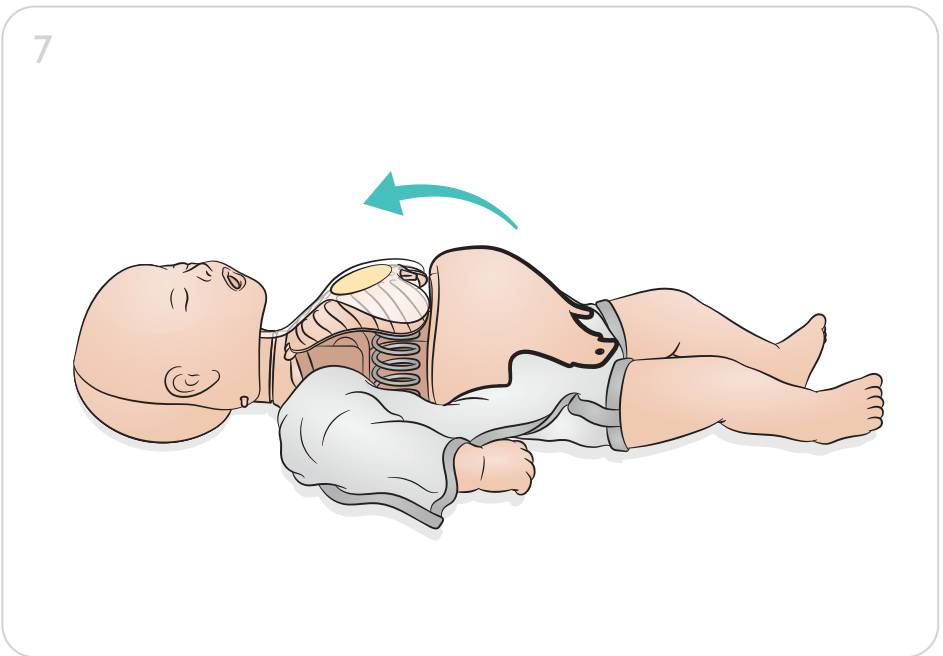


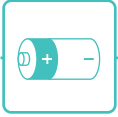


1

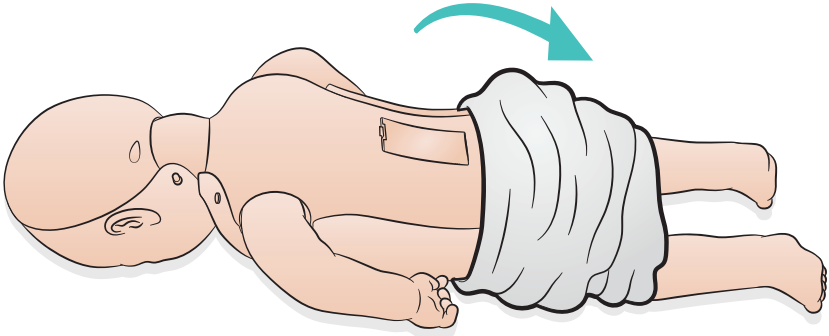

2

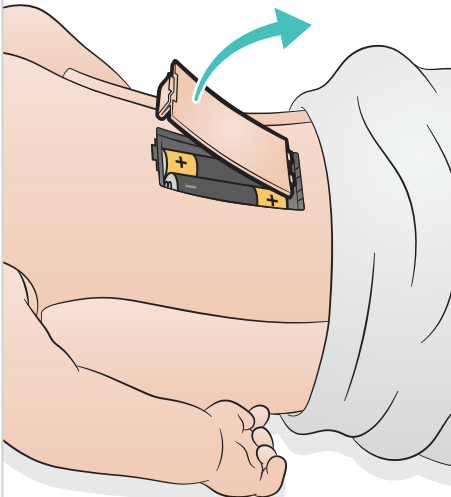

3

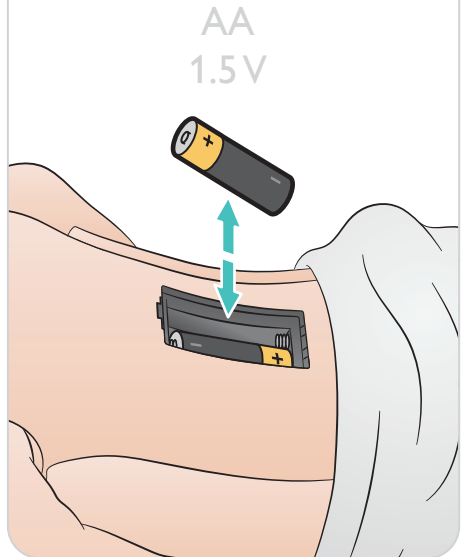







[www.laerdal.com/support](http://www.laerdal.com/support)

© 2019 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

Laerdal Medical AS  
P.O. Box 377,  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway  
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in China

20-15511 Rev A

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives